

# VAKUUM-CONTROLLER


*VACUU·SELECT® Kompakt-Controller (Stativ)*

*VACUU·SELECT® Kompakt-Controller (Einbau)*

*VACUU·SELECT® Kompakt-Controller (Tisch)*



## Betriebsanleitung

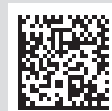

## **Originalbetriebsanleitung Für künftige Verwendung aufbewahren!**

*Das Dokument darf nur vollständig und unverändert verwendet und weitergegeben werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Gültigkeit dieses Dokumentes bezüglich seines Produktes sicherzustellen.*

Hersteller:

**VACUUBRAND GMBH + CO KG  
Alfred-Zippe-Str. 4  
97877 Wertheim  
GERMANY**

Tel.:

Zentrale: +49 9342 808-0

Vertrieb: +49 9342 808-5550

Service: +49 9342 808-5660

Fax: +49 9342 808-5555

E-Mail: [info@vacuubrand.com](mailto:info@vacuubrand.com)

Web: [www.vacuubrand.com](http://www.vacuubrand.com)

*Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns mit dem Kauf dieses Produkts der **VACUUBRAND GMBH + CO KG** entgegenbringen. Sie haben sich für ein modernes, hochwertiges Produkt entschieden.*

# INHALTSVERZEICHNIS

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                     | <b>7</b>  |
| 1.1      | Benutzerhinweise                      | 7         |
| 1.2      | Aufbau der Betriebsanleitung          | 8         |
| 1.3      | Zu dieser Anleitung                   | 9         |
| 1.3.1    | Darstellungskonventionen              | 9         |
| 1.3.2    | Symbole und Piktogramme               | 10        |
| 1.3.3    | Handlungsanweisungen (Bedienschritte) | 11        |
| 1.3.4    | Abkürzungen                           | 12        |
| 1.3.5    | Begriffserklärung                     | 13        |
| <b>2</b> | <b>Sicherheitshinweise</b>            | <b>14</b> |
| 2.1      | Verwendung                            | 14        |
| 2.1.1    | Bestimmungsgemäße Verwendung          | 14        |
| 2.1.2    | Unsachgemäße Verwendung               | 15        |
| 2.1.3    | Vorhersehbare Fehlanwendung           | 15        |
| 2.2      | Zielgruppenbeschreibung               | 16        |
| 2.2.1    | Personalqualifikation                 | 16        |
| 2.2.2    | Zuständigkeitsmatrix                  | 16        |
| 2.2.3    | Persönliche Verantwortung             | 17        |
| 2.3      | Sicherheitsmaßnahmen                  | 17        |
| 2.3.1    | Schutzmaßnahmen, allgemein            | 17        |
| 2.3.2    | Gefahrenquellen beachten              | 18        |
| 2.3.3    | ATEX-Gerätekategorie (Sensor)         | 19        |
| 2.4      | Entsorgung                            | 20        |
| <b>3</b> | <b>Produktbeschreibung</b>            | <b>21</b> |
| 3.1      | VACUU·SELECT Kompakt                  | 21        |
| 3.2      | Produktansichten                      | 23        |
| 3.2.1    | VACUU·SELECT Kompakt (Prinzipaufbau)  | 23        |
| 3.2.2    | VACUU·SELECT Sensor                   | 26        |
| 3.2.3    | Chemie-Saugleitungsventil             | 27        |
| 3.3      | VACUU·BUS-Peripherie (Option)         | 28        |
| 3.4      | Anwendungsbeispiel                    | 29        |
| 3.5      | Fernsteuerung und Schnittstellen      | 30        |
| 3.5.1    | Serielle Schnittstelle RS-232         | 30        |
| 3.5.2    | Modbus TCP                            | 30        |
| <b>4</b> | <b>Aufstellung und Anschluss</b>      | <b>31</b> |
| 4.1      | Transport                             | 31        |
| 4.2      | Aufstellung                           | 31        |
| 4.2.1    | Tischversion                          | 32        |
| 4.2.2    | Stativversion                         | 32        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 4.2.3    | Einbauversion . . . . .                         | 35        |
| 4.3      | Elektrischer Anschluss . . . . .                | 37        |
| 4.4      | Vakuumananschluss . . . . .                     | 39        |
| 4.5      | Belüftungsanschluss (Option). . . . .           | 41        |
| <b>5</b> | <b>Benutzeroberfläche</b>                       | <b>42</b> |
| 5.1      | Controller einschalten. . . . .                 | 42        |
| 5.1.1    | Touchscreen . . . . .                           | 43        |
| 5.1.2    | Gesten zur Bedienung . . . . .                  | 43        |
| 5.2      | Gerät einrichten . . . . .                      | 43        |
| 5.2.1    | Hinweis zu Datenspeicherung. . . . .            | 43        |
| 5.3      | Bildschirmausrichtung . . . . .                 | 44        |
| 5.4      | Anzeige- und Bedienelemente . . . . .           | 45        |
| 5.4.1    | Prozessanzeige (Hauptbildschirm) . . . . .      | 45        |
| 5.4.2    | Anzeigeelemente . . . . .                       | 46        |
| 5.4.3    | Bedienelemente und Symbole . . . . .            | 48        |
| <b>6</b> | <b>Bedienung</b>                                | <b>52</b> |
| 6.1      | Anwendungen . . . . .                           | 52        |
| 6.1.1    | Anwendung auswählen und starten . . . . .       | 52        |
| 6.1.2    | Solldruck anpassen . . . . .                    | 53        |
| 6.1.3    | Belüften . . . . .                              | 55        |
| 6.1.4    | Anwendung stoppen . . . . .                     | 56        |
| 6.2      | Anwendungsparameter (Parameterliste). . . . .   | 56        |
| 6.3      | Grafischer Druckverlauf . . . . .               | 58        |
| 6.4      | Hauptmenü. . . . .                              | 59        |
| 6.4.1    | Anwendungen. . . . .                            | 60        |
| 6.4.2    | Favoriten. . . . .                              | 61        |
| <b>7</b> | <b>Hauptmenü</b>                                | <b>62</b> |
| 7.1      | Erweiterte Bedienung . . . . .                  | 62        |
| 7.1.1    | Anwendungseditor . . . . .                      | 62        |
| 7.1.2    | Menüleiste und Beschreibung. . . . .            | 63        |
| 7.1.3    | Übersicht Prozessschritte . . . . .             | 64        |
| 7.1.4    | Prozessende. . . . .                            | 65        |
| 7.1.5    | Anwendung editieren . . . . .                   | 66        |
| 7.1.6    | Prozessschritt entfernen . . . . .              | 68        |
| 7.1.7    | Einstellungen . . . . .                         | 69        |
| 7.1.8    | Einstellungen/Administration . . . . .          | 71        |
| 7.1.9    | Administration/Import-Export . . . . .          | 73        |
| 7.1.10   | Administration/VACUU·BUS . . . . .              | 74        |
| 7.1.11   | Administration/Funktionserweiterungen . . . . . | 76        |
| 7.2      | Datenlogger . . . . .                           | 77        |
| 7.3      | Service . . . . .                               | 78        |
| 7.3.1    | Serviceinformationen . . . . .                  | 78        |



|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 7.3.2    | Diagnosedaten . . . . .                       | 79        |
| <b>8</b> | <b>Fehlerbehebung</b>                         | <b>80</b> |
| 8.1      | Störmeldungen . . . . .                       | 80        |
| 8.1.1    | Störungsanzeige . . . . .                     | 80        |
| 8.1.2    | Störmeldung quittieren . . . . .              | 81        |
| 8.2      | Fehler – Ursache – Beseitigung . . . . .      | 81        |
| 8.2.1    | Pop-up-Meldung . . . . .                      | 81        |
| 8.2.2    | Fehler allgemein . . . . .                    | 82        |
| 8.3      | Gerätesicherung . . . . .                     | 84        |
| <b>9</b> | <b>Anhang</b>                                 | <b>86</b> |
| 9.1      | Technische Informationen . . . . .            | 86        |
| 9.1.1    | Technische Daten . . . . .                    | 86        |
| 9.1.2    | Typenschild . . . . .                         | 89        |
| 9.1.3    | Medienberührte Werkstoffe . . . . .           | 90        |
| 9.1.4    | Vakuumdaten . . . . .                         | 90        |
| 9.2      | Bestelldaten . . . . .                        | 91        |
| 9.3      | Lizenzinformationen und Datenschutz . . . . . | 92        |
| 9.4      | Service . . . . .                             | 93        |
| 9.5      | Stichwortverzeichnis . . . . .                | 94        |
| 9.6      | EG-Konformitätserklärung . . . . .            | 96        |
| 9.7      | CU-Zertifikat . . . . .                       | 97        |



# 1 Einleitung

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des von Ihnen erworbenen Produkts.

## 1.1 Benutzerhinweise

### Sicherheit

Betriebsanleitung  
und Sicherheit

- Lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Bewahren Sie die Betriebsanleitung jederzeit zugänglich und griffbereit auf.
- Der korrekte Gebrauch des Produkts ist für den sicheren Betrieb unerlässlich. Beachten Sie insbesondere alle Sicherheitshinweise!
- Beachten Sie, zusätzlich zu den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung, die geltenden, nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Arbeitsschutz.

### Allgemein

Allgemeine  
Hinweise

- Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird anstelle des Produktnamens **VACUU-SELECT Kompakt** gleichermaßen die allgemeine Bezeichnung **Controller** verwendet.
- Geben Sie bei einer Weitergabe des Produkts an Dritte auch die Betriebsanleitung weiter.
- Alle Abbildungen und Zeichnungen sind Beispiele und dienen allein dem besseren Verständnis.
- Technische und gestalterische Änderungen sind im Zuge ständiger Produktverbesserung vorbehalten.

### Copyright

Copyright © und  
Urheberrecht

Der Inhalt dieser Betriebsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Kopien für interne Zwecke sind erlaubt, z. B. für Schulungen.

© VACUUBRAND GMBH + CO KG

## Kontakt

Sprechen Sie  
uns an

- Bei unvollständiger Betriebsanleitung können Sie Ersatz anfordern. Alternativ steht Ihnen unser Downloadportal zur Verfügung: [www.vacuubrand.com](http://www.vacuubrand.com)
- Bei Kontakt zu unserem Service halten Sie bitte Seriennummer und Produkttyp bereit → *siehe Typenschild auf dem Produkt*.
- Sie können sich jederzeit gerne schriftlich oder telefonisch an uns wenden, sollten Sie weitere Informationen wünschen, Fragen zu unseren Produkten haben oder wenn Sie uns Feedback geben möchten.


## 1.2 Aufbau der Betriebsanleitung

Modulare  
Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitungen für den Controller, Vakuumpumpen, Pumpstände, und mögliches Zubehör ist modular aufgebaut, d. h. die Anleitungen sind in separate Anleitungsbroschüren aufgeteilt.

## Anleitungsmodule

→ Beispiel  
Aufteilung der  
Betriebsanleitungen

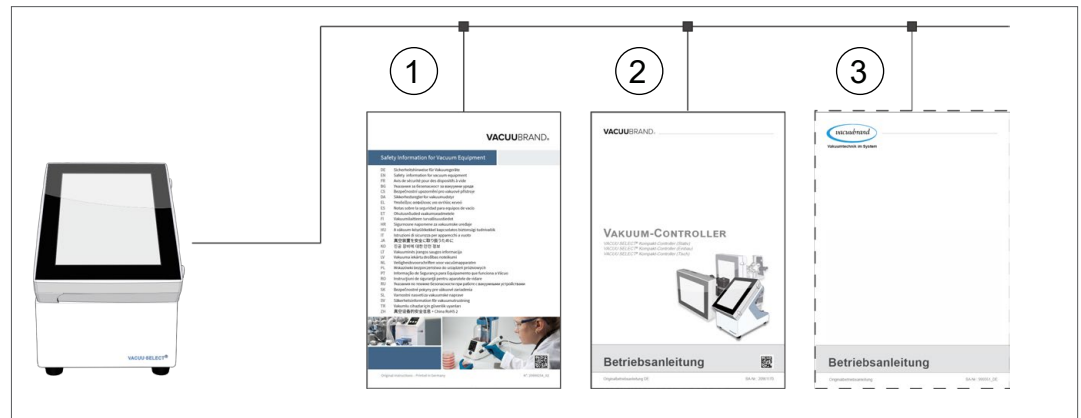

- 1 Sicherheitshinweise für Vakuumgeräte
- 2 Beschreibung: Vakuum-Controller – Steuerung und Bedienung
- 3 Optionale Beschreibung: Vakuumpumpe, Zubehör etc.

## 1.3 Zu dieser Anleitung

### 1.3.1 Darstellungskonventionen

#### Warnhinweise

Darstellungs-  
konventionen

|   |   |
|---|---|
|    | <b>GEFAHR</b><br><b>Warnung vor unmittelbar drohender Gefahr.</b><br>Bei Nichtbeachtung besteht eine unmittelbar drohende Lebensgefahr oder die Gefahr schwerster Verletzungen.<br>⇒ Hinweis zur Vermeidung beachten! |
|   | <b>WARNUNG</b><br><b>Warnung vor einer möglicherweise gefährlichen Situation.</b><br>Bei Nichtbeachtung besteht Lebensgefahr oder die Gefahr schwerer Verletzungen.<br>⇒ Hinweis zur Vermeidung beachten!             |
|   | <b>VORSICHT</b><br><b>Kennzeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation.</b><br>Bei Nichtbeachtung besteht Gefahr leichter Verletzungen oder Sachschäden.<br>⇒ Hinweis zur Vermeidung beachten!                  |
| <b>HINWEIS</b><br><b>Verweis auf möglicherweise schädliche Situation.</b><br>Bei Nichtbeachtung können Sachschäden entstehen. |   |

#### Ergänzende Hinweise

#### WICHTIG!

- ⇒ Beschreibung, die Sie bei Handlungen beachten müssen.
- ⇒ Wichtige Information für den einwandfreien Betrieb Ihres Produkts.



- ⇒ Tipps + Tricks
- ⇒ Hilfreiche Informationen

## 1.3.2 Symbole und Piktogramme

Diese Betriebsanleitung verwendet Symbole und Piktogramme. Sicherheitssymbole weisen auf besondere Gefahren im Umgang mit dem Produkt hin. Symbole und Piktogramme sollen helfen, Beschreibungen leichter zu erfassen.

### Sicherheitssymbole

Erklärung  
Sicherheitssymbole



Allgemeines  
Gefahrenzeichen.



Warnung vor elektrischer  
Spannung.



Warnung vor heißer  
Oberfläche.



Allgemeines  
Verbotssymbol.



Allgemeines  
Gebotszeichen.



Netzstecker ziehen.



Elektrostatisch gefährde-  
te Bauelemente ESD



Cadmiumfrei

### Weitere Symbole und Piktogramme

Ergänzende  
Symbole



Positivbeispiel – **So!**  
Ergebnis – o. k.



Negativbeispiel –  
**So nicht!**



Verweis auf Inhalte in  
dieser Betriebsanleitung.



Verweis auf Inhalte  
ergänzender Dokumente.



Elektro-, Elektronikgeräte sowie Batterien dürfen am  
Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt  
werden.



Akustisches Signal – Signalton/Warnton.



Blinktakt, Audiotakt



Strömungspfeil  
Vakuum

### Symbole und Gesten zur Bedienung

→ siehe Kapitel: 5.1.2 Gesten zur Bedienung auf Seite 43



⇒ Weitere, ausführliche Beschreibungen zu Symbolen (Icons) und Signalen im Display erhalten Sie im Kapitel **5.4 Anzeige- und Bedienelemente**.

### 1.3.3 Handlungsanweisungen (Bedienschritte)

Darstellung  
Bedienschritte als  
Text

#### Handlungsanweisung (einfach)

⇒ Sie werden zu einer Handlung aufgefordert.

- ☒ Ergebnis der Handlung

#### Handlungsanweisung (mehrere Schritte)


1. erster Handlungsschritt
2. nächster Handlungsschritt

- ☒ Ergebnis der Handlung

Führen Sie Handlungsanweisungen, die mehrere Schritte erfordern, in der beschriebenen Reihenfolge durch.

Prinzip-Darstellung  
Bedienschritte als  
Grafik

#### Handlungsanweisung (grafisch dargestellt)

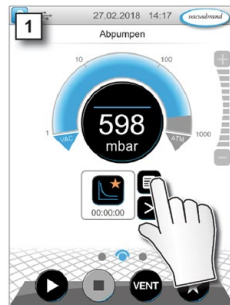

1. erster Handlungsschritt
  2. nächster Handlungsschritt
- ☒ Ergebnis der Handlung

### 1.3.4 Abkürzungen

Verwendete  
Abkürzungen

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>abs.</b>               | absolut  |
| <b>AK</b>                 | Abscheiderkolben                                       |
| <b>ATM</b>                | Atmosphärendruck (Bar-Grafik, Programm)                |
| <b>d<sub>i</sub></b> (di) | Innendurchmesser                                       |
| <b>DN</b>                 | Nennweite (Diameter Nominal)                           |
| <b>EX*</b>                | Auslass  |
| <b>FPM</b>                | Fluor-Polymer-Kautschuk                                |
| <b>gasartunab.</b>        | gasartunabhängig                                       |
| <b>GB</b>                 | Gasballast   |
| <b>ggf.</b>               | gegebenenfalls   |
| <b>Gr.</b>                | Größe  |
| <b>hh:mm:ss</b>           | Zeitangabe in Stunde/Minute/Sekunde                    |
| <b>hPa</b>                | Druckeinheit, Hektopascal (1 hPa = 1 mbar = 0.75 Torr) |
| <b>IN*</b>                | Einlass  |
| <b>KF</b>                 | Kleinflansch   |
| <b>max.</b>               | Maximalwert  |
| <b>min.</b>               | Minimalwert  |
| <b>mbar</b>               | Druckeinheit, Millibar (1 mbar = 1 hPa = 0.75 Torr)    |
| <b>PA</b>                 | Polyamid   |
| <b>PBT</b>                | Polybutylenterephthalat                                |
| <b>PC ....</b>            | Pumpsstand Chemie mit Typenkennziffer                  |
| <b>PE</b>                 | Polyethylen  |
| <b>RMA-Nr.</b>            | Rücksendenummer  |
| <b>sog.</b>               | sogenannt  |
| <b>SW</b>                 | Schlüsselweite (Werkzeug)                              |
| <b>Torr</b>               | Druckeinheit (1 Torr = 1.33 mbar = 1.33 hPa)           |
| <b>USB</b>                | Universal Serial Bus                                   |
| <b>VAC</b>                | Vakuum (Druckbogen)                                    |
| <b>verantw.</b>           | verantwortlich(e)                                      |
| <b>VMS-B</b>              | Vakuum-Management-System - Modul                       |
| <b>z. B.</b>              | zum Beispiel   |

\* Kennzeichnung auf der Vakuumpumpe



### 1.3.5 Begriffserklärung

Produktspezifische  
Begriffe

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Feinvakuum</b>              | Druckmessbereich in der Vakuumtechnik, von: 1 mbar–0,001 mbar (0.75 Torr–0.00075 Torr)   |
| <b>Grobovakuum</b>             | Druckmessbereich in der Vakuumtechnik, von: Atmosphärendruck–1 mbar (atmospheric pressure–0.75 Torr)   |
| <b>VACUU·BUS</b>               | Bussystem von <b>VACUUBRAND</b> zur Kommunikation von Peripheriegeräten mit <b>VACUU·BUS</b> -fähigen Messgeräten und -Controllern. Die maximal zulässige Kabellänge eines Leitungsstrangs beträgt 30 m. |
| <b>VACUU·BUS-Adresse</b>       | Adresse, die eine eindeutige Zuordnung des <b>VACUU·BUS</b> -Clients im Bussystem ermöglicht, z. B für den Anschluss mehrerer Sensoren gleichen Messbereichs.  |
| <b>VACUU·BUS-Client</b>        | Peripheriegerät oder Komponente mit <b>VACUU·BUS</b> -Anschluss, das im Bussystem eingebunden ist, z. B. Sensoren, Ventile, Füllstandsmelder etc.  |
| <b>VACUU·BUS-Konfiguration</b> | Mit einem Messgerät oder Controller, einer <b>VACUU·BUS</b> -Komponente eine andere <b>VACUU·BUS</b> -Adresse zuweisen.  |
| <b>VACUU·BUS-Stecker</b>       | 4-poliger Rundstecker für das Bussystem von <b>VACUUBRAND</b> .  |
| <b>VACUU·SELECT</b>            | Vakuum-Controller, Controller mit Touchscreen; bestehend aus Bedieneinheit und Vakuumsensor.   |
| <b>VACUU·SELECT Kompakt</b>    | Vakuum-Controller in Ausführung als Zweipunkt-Vakuumregler für vorhandene Vakuumquellen wie Einzelpumpen oder leistungsfähige Vakuumnetzwerke  |
| <b>VACUU·SELECT Sensor *</b>   | Externer Vakuumsensor<br>▶ für den <b>VACUU·SELECT</b><br>oder<br>▶ als eigenständiger Vakuumsensor separat.   |

*\* mit und ohne Belüftungsventil verfügbar*

## 2 Sicherheitshinweise

Die Informationen in diesem Kapitel sind von allen Personen, die mit dem hier beschriebenen Gerät arbeiten, zu beachten.

Die Sicherheitshinweise gelten für alle Lebensphasen des Geräts.

### 2.1 Verwendung

Das Gerät darf nur in technisch einwandfreiem Zustand verwendet werden.

#### 2.1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Bestimmungsgemäße  
Verwendung

Der **VACUU·SELECT Kompakt** ist ein Laborinstrument, der für vorhandene Vakuumquellen wie Einzelpumpen oder leistungsfähige Vakuumnetzwerke, zur Regelung von Absolutdruck im Bereich von Grob- und Feinvakuum bestimmt ist.

Das Gerät darf nur in Innenräumen in nicht-explosionsfähiger Umgebung verwendet werden. Das Gerät ist für den Dauerbetrieb von 10 °C–40 °C ausgelegt.

**Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch:**



- die Hinweise in dem Dokument **Sicherheitshinweise für Vakuumgeräte** zu beachten,
- die Betriebsanleitung zu beachten,
- die Betriebsanleitung angeschlossener Komponenten zu beachten,
- nur zugelassenes Zubehör und Ersatzteile zu verwenden.

Eine andere oder darüber hinausgehende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

### 2.1.2 Unsachgemäße Verwendung

Unsachgemäße  
Verwendung

Bei nicht bestimmungsgemäßigem Einsatz sowie jeder Anwendung, die nicht den technischen Daten entspricht, kann es zu Personen- oder Sachschäden kommen.

#### Als unsachgemäße Verwendung gilt:

- der Gebrauch entgegen der bestimmungsgemäßen Verwendung,
- der Betrieb bei unzulässigen Umgebungs- und Betriebsbedingungen,
- die Vakuumregelung von explosionsfähiger Atmosphäre, die nicht der ATEX-Zulassung des Sensors entspricht → *siehe Typenschild Sensor*.
- der Betrieb bei offensichtlichen Störungen oder defekten Sicherheitseinrichtungen,
- der Gebrauch in unvollständigem Zustand,
- Steckverbindungen am Kabel aus der Buchse zu ziehen,
- der Einsatz im Bergbau oder unter Tage.

### 2.1.3 Vorhersehbare Fehlanwendung



Möglicherweise  
Vorhersehbare  
Fehlanwendung

Neben der unsachgemäßen Verwendung gibt es Nutzungsarten, die im Umgang mit dem Gerät verboten sind:

- die Aufstellung und der Betrieb in explosionsgefährdeter Umgebung,
- eigenmächtige An- und Umbauten, insbesondere wenn diese die Sicherheit beeinträchtigen,
- das Gerät vollständig dem Vakuum auszusetzen, in Flüssigkeiten einzutauchen, Spritzwasser auszusetzen oder dampfzustrahlen,
- die Vakuumregelung von Medien, die heiß, instabil, explosionsfähig oder explosiv sind,
- die Bedienung mit scharfkantigen Gegenständen,
- das Gerät mit Werkzeugen oder dem Fuß ein-/auszuschalten,
- den Controller ohne Kenntnisse zum verbundenen Vakuumsystem fernzusteuern.

## 2.2 Zielgruppenbeschreibung

### WICHTIG!

Nutzer der in der **Zuständigkeitsmatrix** aufgeführten Kompetenzbereiche müssen die entsprechende Qualifikation für die gelisteten Tätigkeiten aufweisen.

### 2.2.1 Personalqualifikation

Bedeutung  
Personalqualifikation

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Bediener</b>                  | Laborpersonal, z. B. Chemiker, Laborant   |
| <b>Fachkraft</b>                 | Person mit beruflicher Qualifikation für Mechanik, Elektrik oder Laborgeräte          |
| <b>verantwortliche Fachkraft</b> | Person wie Fachkraft nur zusätzlich mit Fach-, Abteilungs- oder Bereichsverantwortung |

### 2.2.2 Zuständigkeitsmatrix

Zuständigkeitsmatrix  
und  
Kompetenzbereiche

| <b>Tätigkeit</b>           | Bediener | Fachkraft | Verantwortliche Fachkraft |
|----------------------------|----------|-----------|---------------------------|
| Aufstellung                | x        | x         | x                         |
| Inbetriebnahme             | x        | x         | x                         |
| Netzwerkintegration        |          |           | x                         |
| Update                     |          | x         | x                         |
| Daten Import/Export        |          | x         | x                         |
| Datenlogger download       | x        | x         | x                         |
| Fehlersuche                | x        | x         | x                         |
| Bedienung                  | x        | x         | x                         |
| Erweiterte Bedienung       |          | x         | x                         |
| Störungsmeldung            | x        | x         | x                         |
| Störungsbeseitigung        | (x)      | x         | x                         |
| Platinensicherung wechseln |          | x         | x                         |
| Reparaturauftrag           |          |           | x                         |
| Reinigung, einfache        | x        | x         | x                         |
| Sensor reinigen*           |          | x         | x                         |
| Sensor abgleichen*         |          | x         | x                         |
| Außerbetriebnahme          | x        | x         | x                         |
| Dekontamination**          |          | x         | x                         |

\* Option

\*\* oder Dekontamination durch qualifizierten Dienstleister durchführen lassen

### 2.2.3 Persönliche Verantwortung


Sicherheitsbewusst  
arbeiten

Sicherheit und Schutz von Personen hat oberste Priorität. Tätigkeiten und Prozesse, die eine potentielle Sicherheitsgefährdung darstellen, sind nicht erlaubt.

Arbeiten Sie stets sicherheitsbewusst. Beachten Sie die Betriebsanweisungen des Betreibers und die nationalen Bestimmungen bezüglich Unfallverhütung, Sicherheit und Arbeitsschutz.

⇒ Verwenden Sie den Controller nur, wenn Sie die Betriebsanleitung und die Funktionsweise verstanden haben.

Schutzkleidung

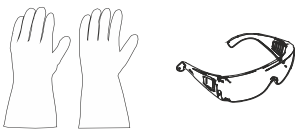

⇒ Bei den Tätigkeiten, die Schutzkleidung erfordern, ist die persönliche Schutzausrüstung, die durch den Betreiber vorgegeben ist, zu tragen.

## 2.3 Sicherheitsmaßnahmen

Qualitätsanspruch  
und  
Sicherheit

Produkte der **VACUUBRAND GMBH + CO KG** unterliegen hohen Qualitätsprüfungen bezüglich Sicherheit und Betrieb. Jedes Produkt wird vor der Auslieferung einem umfangreichen Testprogramm unterzogen.

### 2.3.1 Schutzmaßnahmen, allgemein

⇒ Befolgen Sie beim Umgang mit kontaminierten Teilen die einschlägigen Vorschriften und Schutzmaßnahmen.

⇒ Lassen Sie Reparaturen nur vom Hersteller-Service durchführen.

**WICHTIG!**

**Für alle Serviceleistungen müssen Gefahrstoffe ausgeschlössen werden können.**

⇒ Beachten Sie, dass von anhaftenden Prozessmedien Gefahren für Mensch und Umwelt ausgehen können. Führen Sie deshalb geeignete Maßnahmen zur Dekontamination durch.

⇒ Bevor Sie Geräte an unseren Service schicken, müssen Sie eine [Unbedenklichkeitsbescheinigung](#) ausfüllen, die Angaben mit Ihrer Unterschrift bestätigen und uns vorab zuschicken.

## 2.3.2 Gefahrenquellen beachten

### Vakuumregelung kritischer Prozesse

Explosionsgefahr bei kritischen Prozessen



#### GEFAHR

##### Explosionsgefahr durch Steuerung kritischer Prozesse.

Prozessabhängig kann sich in Anlagen ein explosionsfähiges Gemisch bilden.

⇒ Steuern Sie kritische Prozesse nie unbeaufsichtigt!

### Beschädigte Bauteile

#### WICHTIG!

Beschädigte Bauteile, insbesondere die die Sicherheit beeinträchtigen, müssen umgehend getauscht werden.

⇒ Achten Sie darauf, dass Sie nicht mit beschädigten Bauteilen arbeiten.

⇒ Tauschen Sie defekte Bauteile umgehend aus, z. B. brüchiges Kabel, defekte Stecker.

### Gefahren durch Elektrische Energie

Elektrische Energie

Nachdem der Controller abgeschaltet und vom Stromnetz getrennt wurde, können am Steckernetzteil noch Gefahren durch Restenergien bestehen:

⇒ Tauschen Sie das Steckernetzteil bei Defekt aus.

⇒ Niemals das Steckernetzteil öffnen.

### Serviceeinsendungen

Sicherheit bei Servicearbeiten

Produkte, die eine potentielle Sicherheitsgefährdung darstellen, dürfen erst eingeschickt, gewartet oder repariert werden, wenn alle gefährlichen Verunreinigungen entfernt wurden.



⇒ Das Formblatt zur Bestätigung der Unbedenklichkeit steht Ihnen auf unserer Homepage als PDF zur Verfügung: [Unbedenklichkeitsbescheinigung](#).

### 2.3.3 ATEX-Gerätekategorie (Sensor)

#### Aufstellung und explosionsfähige Umgebung




Die Aufstellung und der Betrieb in Bereichen, in denen eine explosionsfähige Atmosphäre in gefährdender Menge auftreten kann, ist nicht erlaubt.

Die ATEX-Zulassung gilt ggf. nur für den **inneren, medienberührten Bereich des Geräts**, nicht für den Umgebungsbereich.

#### ATEX-Gerätekenzeichnung

ATEX-  
Gerätekategorie



Mit der Kennzeichnung  beschriftete Vakuumgeräte haben eine Zulassung gemäß der ATEX-Kennzeichnung auf dem Typenschild.

- ⇒ Betreiben Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand.
- ⇒ Die Geräte sind für einen niedrigen Grad mechanischer Gefahr ausgelegt und sind so aufzustellen, dass sie von außen nicht mechanisch beschädigt werden können.
- ⇒ Nach Eingriffen am Gerät muss die Leckrate des Geräts überprüft werden.

ATEX-  
Zulassung

Bei Einsatz des Geräts an Apparaturen mit explosionsfähigen Atmosphären (gemäß seiner Zulassung) sind Modifikationen des Geräts unzulässig und führen zum Erlöschen seiner ATEX-Zulassung. Medienberührte Anbauteile am Gerät müssen eine mindestens gleichwertige ATEX-Zulassung aufweisen wie das Gerät selbst und dürfen die ATEX-Zulassung des Geräts nicht negativ beeinflussen, insbesondere die Temperatur im medienberührten Bereich.

Explosionsfähige  
Gemische  
verhindern


Die Verwendung von Gasballast und/oder Belüftungsventilen ist nur zulässig wenn sichergestellt ist, dass dadurch normalerweise keine oder aber aller Wahrscheinlichkeit nach nur kurzzeitig oder selten explosionsfähige Gemische im Innenraum des Geräts erzeugt werden.

- ⇒ Belüften Sie ggf. mit Inertgas.

Informationen zur ATEX-Gerätekategorie sind auch auf unserer Homepage abrufbar: [www.vacuubrand.com/.../Information-ATEX](http://www.vacuubrand.com/.../Information-ATEX)



Erläuterung Einsatz-  
bedingungen X  
Beispiel-Ausschnitt  
Typenschild

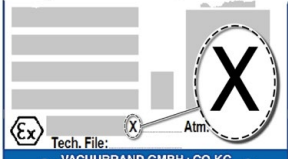

## Einschränkung der Betriebsbedingungen

Bedeutung für Geräte die mit X gekennzeichnet sind:

- Die Geräte haben einen niedrigen mechanischen Schutz und sind so aufzustellen, dass sie von außen nicht mechanisch beschädigt werden können, z. B. Pumpstände stoßgeschützt aufstellen, wegen möglicher Implosion einen Splitterschutz für Glaskolben anbringen etc.
- Die Geräte sind für eine Umgebungs- und Medientemperatur bei Betrieb von +10 °C – +40 °C ausgelegt. Diese Umgebungs- und Medientemperaturen dürfen keinesfalls überschritten werden. Beim Fördern/Messen nicht-explosionsfähiger Gase gelten erweiterte Gasansaugtemperaturen; siehe, Kapitel: Technische Informationen, Medientemperatur.

## 2.4 Entsorgung

### HINWEIS

**Elektronikkomponenten und Batterien dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden.**

Elektronische Altgeräte und Batterien enthalten Schadstoffe, die die Umwelt oder die Gesundheit schädigen können. Ausgediente Elektrogeräte enthalten außerdem wertvolle Rohstoffe, die bei fachgerechter Entsorgung im Recyclingprozess der Rohstoffrückgewinnung dienen.

Endnutzer sind gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu einer zugelassenen Sammelstelle zu bringen sowie zur Rückgabe von Batterien.

- ⇒ Sichern und löschen Sie eigenverantwortlich mögliche Daten vor der Entsorgung Ihres Elektrogeräts.
- ⇒ Sind Batterien enthalten: Entfernen Sie Altbatterien vor der Entsorgung. Sie können diese kostenfrei an einer zugelassenen Sammelstelle zurückgeben.
- ⇒ Entsorgen Sie Elektroschrott, Elektronikkomponenten und am Ende ihrer Lebensdauer fachgerecht.
- ⇒ Beachten Sie die nationalen Vorschriften zu Entsorgung und Umweltschutz.





### 3 Produktbeschreibung

#### 3.1 VACUU-SELECT Kompakt

Beschreibung  
Vakuumregler

Der **VACUU-SELECT Kompakt** ist ein komplett ausgestatteter Zweipunkt-Vakuumregler für vorhandene Vakuumquellen wie Einzelpumpen oder leistungsfähige Vakuumnetzwerke.

Der Controller besteht aus dem Vakuum-Controller **VACUU-SELECT** mit integriertem Keramik-Vakuumsensor und Belüftungsventil, einem Rückschlagventil und einem Chemie-Saugleitungsventil.

Schließen Sie den Controller einfach zwischen Vakuumpumpe und Anwendung.

Der Controller ist verfügbar als Tischgerät, für die Stativ-Montage oder als Einbauversion für Laborarbeitsplätze.

Controller-Versionen



Der Controller wurde für Anwendungen entwickelt, die ein geregeltes Vakuum erfordern. Für die Bedienung und Vakuumregelung stehen verschiedene Anwendungen und Menüs zur Verfügung. Die Bedienung des Controllers erfolgt über Touchscreen. Die Menüs sind benutzerfreundlich gestaltet.

Der Controller regelt je nach Betriebsart und angeschlossener Peripherie bedarfsorientiert das Prozessvakuum. Bei Lösemittelverdampfung erkennt er den Siededruck selbstständig und schaltet in den Zweipunkt-Regelbetrieb.

Als Bestandteil des **VACUU·BUS**-Systems bietet der Controller zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für verschiedenste Anwendungen.

Vakuump Prozesse werden durch Steuern von Saugleitungs- und/oder Belüftungsventilen geregelt. Falls mehrere Ventile eines Typs angeschlossen sind, schalten diese Ventile gleichzeitig, z. B. mehrere Belüftungsventile.



Zum Betrieb des Controllers als Vakuumregler ist mindestens ein Vakuumsensor, Ventile und/oder Vakuumpumpen erforderlich.

**Ohne ansteuerbare Ventile/Vakuumpumpen, nur mit Vakuumsensor, arbeitet der Controller nicht.**

## 3.2 Produktansichten


### 3.2.1 VACUU-SELECT Kompakt (Prinzipaufbau)

Der Controller verfügt über ein farbiges Display mit Touchscreen. Je nach Einbauart lässt sich die Anzeige jeweils um 90° drehen.

Alle Controllerversionen verfügen über die gleichen Anschlüsse, wie hier exemplarisch für die Stativversion beschrieben.

#### Seitenansicht + Frontseite

→ Beispiel  
Seitenansicht und  
Frontansicht  
Stativversion

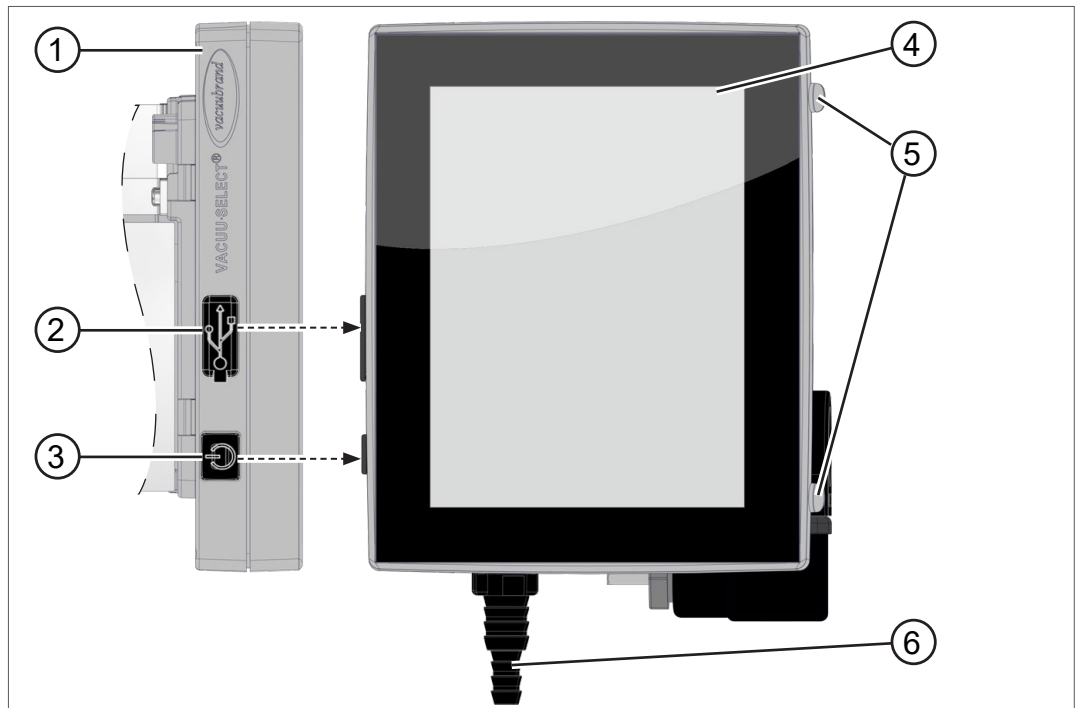

Bedeutung


- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1 | Chemiebeständiges Kunststoffgehäuse   |
| 2 | Abdeckung USB-Steckplatz Typ A*       |
| 3 | ON/OFF-Taste                          |
| 4 | Display                               |
| 5 | Gummifüße                             |
| 6 | Vakuumanschluss (hier: Schlauchwelle) |



**USB Typ A\*** ist nur für den Anschluss von USB-Speichersticks oder WLAN USB-Adaptern geeignet, nicht für den Anschluss an einen USB-Master, wie z. B. PC.

## Rückseite

→ Beispiel  
Rückseite und  
Schnittstellen  
Stativversion

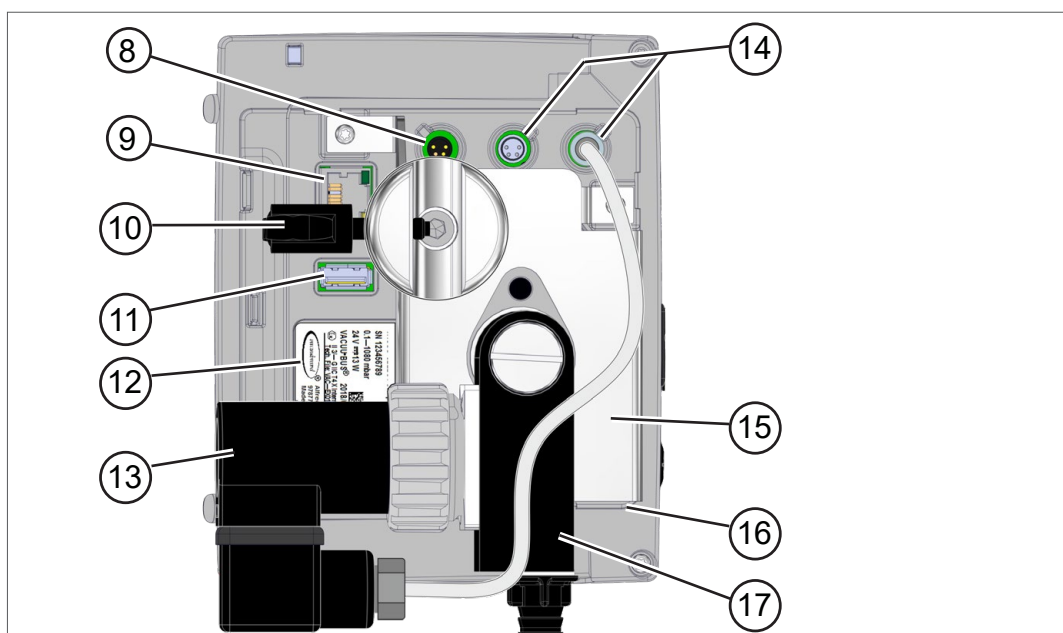

Bedeutung

- |    |   |
|----|---|
| 8  | Spannungsversorgung via <b>VACUU-BUS</b> -Steckernetzteil |
| 9  | RJ45 Buchse – LAN-Anschluss (Ethernet)                    |
| 10 | Stativhalter mit Flügelmutter                             |
| 11 | USB-Steckplatz Typ A                                      |
| 12 | Typenschild   |
| 13 | Chemie-Saugleitungsventil                                 |
| 14 | Anschlussbuchsen für <b>VACUU-BUS</b> -Komponenten        |
| 15 | Stativblech   |
| 16 | <b>VACUU-SELECT Sensor</b>                                |
| 17 | Ventilblock mit Anschlüssen                               |


*Beachte: Die VACUU-BUS-Anschlüsse sind jeweils mit einer Führungsnut ausgestattet, als Verdrehsicherung und Anschlusscodierung für VACUU-BUS-Buchsen und -Stecker.*

### WICHTIG!

⇒ Verwenden Sie die USB-Anschlüsse nicht als Verteiler, außer für USB-Hubs mit eigener Spannungsversorgung.

## Draufsicht

→ Beispiel  
Draufsicht  
Stativversion

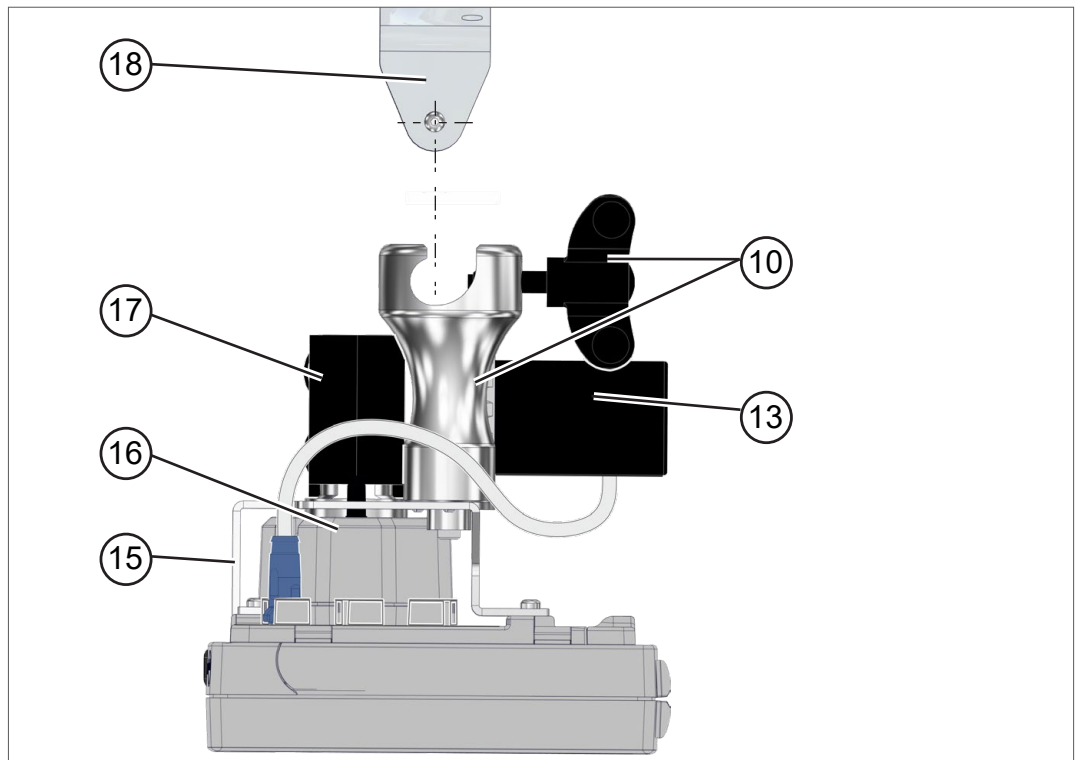

Bedeutung

- |           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| <b>10</b> | Stativhalter mit Flügelmutter |
| <b>13</b> | Chemie-Saugleitungsventil     |
| <b>15</b> | Stativblech                   |
| <b>16</b> | <b>VACUU-SELECT Sensor</b>    |
| <b>17</b> | Ventilblock mit Anschlüssen   |
| <b>18</b> | Wandhalter (Option)           |

### 3.2.2 VACUU-SELECT Sensor

Beschreibung  
VACUU-SELECT  
Sensor


Der Vakuumsensor ist am **VACUU-SELECT Kompakt** montiert. Die Kommunikation mit dem Controller erfolgt über **VACUU-BUS**.

Der **VACUU-SELECT Sensor** ist in zwei Varianten erhältlich, mit und ohne Belüftungsventil.

Der Vakuumsensor ist für die Messung im Grobvakuumbereich ausgelegt mit hoher chemischer Beständigkeit. Der Vakuumanchluss erfolgt über den Ventilblock.

#### Seitenansicht, Draufsicht

→ Beispiel  
Ansichten  
VACUU-SELECT  
Sensor

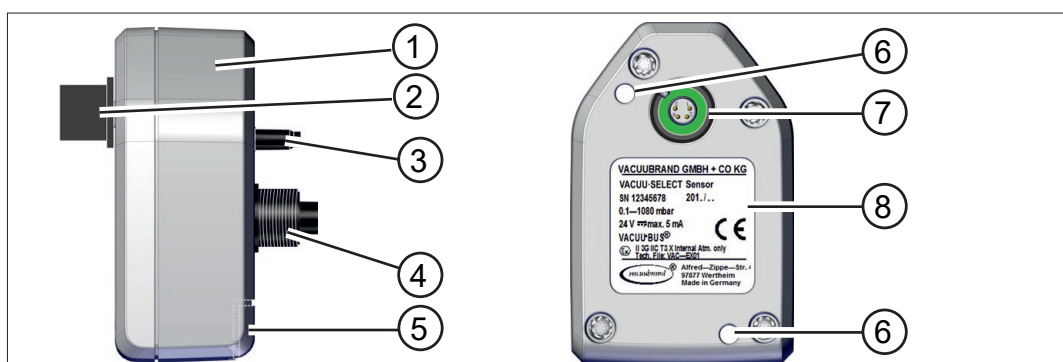

Bedeutung

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>VACUU-SELECT Sensor</b>                                    |
| 2 | <b>VACUU-BUS-Steckeraufsatz, abnehmbar (Option)</b>           |
| 3 | Belüftungsventil (Option)                                     |
| 4 | Vakuum-Schraubanschluss                                       |
| 5 | Steckplatz für <b>VACUU-BUS-Steckeraufsatz</b> (Parkposition) |
| 6 | Durchstecköffnung für Befestigungsschrauben                   |
| 7 | <b>VACUU-BUS-Anschluss</b>                                    |
| 8 | Typenschild   |


### 3.2.3 Chemie-Saugleitungsventil

Das angebaute, chemiebeständige Saugleitungsventil besteht aus einem elektromagnetischem Antrieb und einem Ventilblock und wird als Vakuum-Regelventil genutzt. Ein eingebautes Rückschlagventil verhindert die Beeinflussung benachbarter Anwendungen an einer Vakuumversorgung.

Als Anschlüsse für Vakuumpumpe und Anwendung stehen, je nach Controller-Version, Schlauchwellen oder Einschraubverschraubungen zur Verfügung.

#### Seitenansicht, Draufsicht

→ Beispiel  
Ansichten  
Chemie-  
Saugleitungsventil

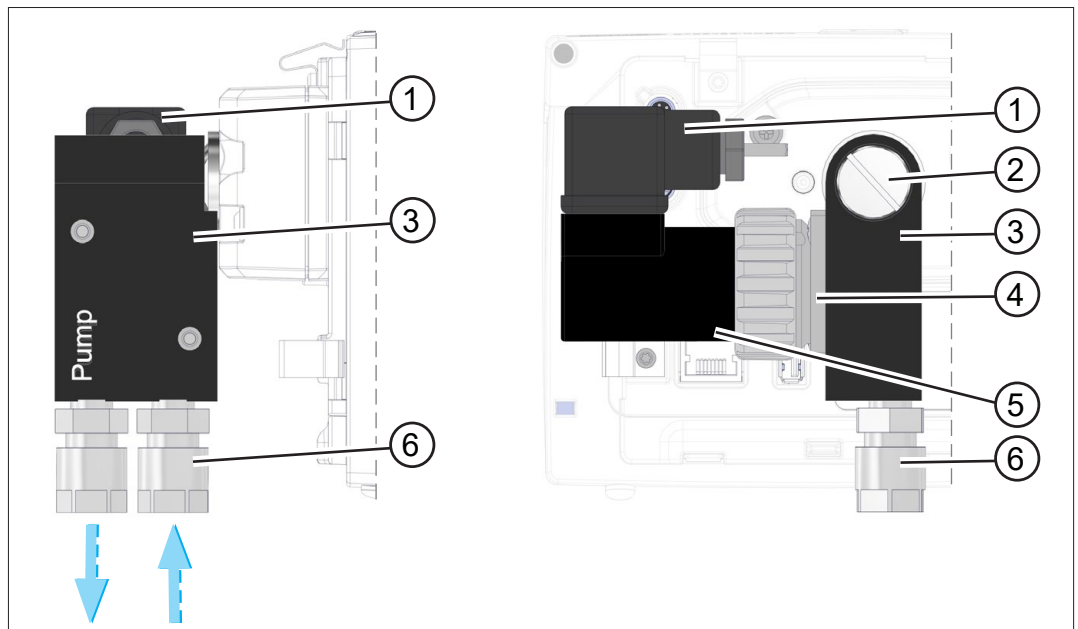

Bedeutung

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | Ventilstecker                      |
| 2 | Flachkopfschraube M6 x 10          |
| 3 | Ventilblock                        |
| 4 | Innen: Rückschlagventil            |
| 5 | Elektromagnetischer Antrieb        |
| 6 | Vakuumanschlüsse: Pumpe, Anwendung |



**Bei der Einbauversion ist der komplette Ventilblock und bei der Stativversion der Stativhalter um 90° drehbar.**

So kann der Controller entweder horizontal oder vertikal genutzt werden.

### 3.3 VACUU·BUS-Peripherie (Option)

#### VACUU·BUS-Prinzip

Externe Ventile, Füllstandssensoren und Vakuumsensoren (bis in den Feinvakuumbereich) sind Komponenten, die über VACUU·BUS direkt an den Controller angeschlossen werden können.

Über die Komponentenerkennung können jederzeit und ganz einfach VACUU·BUS-Komponenten hinzugefügt oder entfernt werden. Die Komponentenaktivierung erlaubt die Aktivierung oder Deaktivierung angeschlossener Komponenten.

#### VACUU·BUS-Komponenten<sup>1</sup> (Clients)

Beim Einschalten prüft der Controller die aktuelle Konfiguration. VACUU·BUS-Komponenten werden automatisch erkannt und bis zum Ausschalten des Controllers genutzt und überwacht. Wird eine vorher angeschlossene Komponente nicht mehr gefunden, gibt der Controller eine Fehlermeldung aus.



Beim **VACUU-SELECT Kompakt** können alle **VACUU·BUS**-Komponenten einzeln aktiviert oder deaktiviert werden, ohne dass der Stecker gezogen werden muss. Auch das Belüftungsventil eines **VACUU-SELECT Sensor** kann einfach am Controller deaktiviert werden.


→ siehe auch Kapitel: **7.1.10 Administration/VACUU·BUS**



### 3.4 Anwendungsbeispiel

#### Vakuumnetzwerk

→ Beispiel  
Vakuumnetzwerk mit  
Rotationsverdampfung

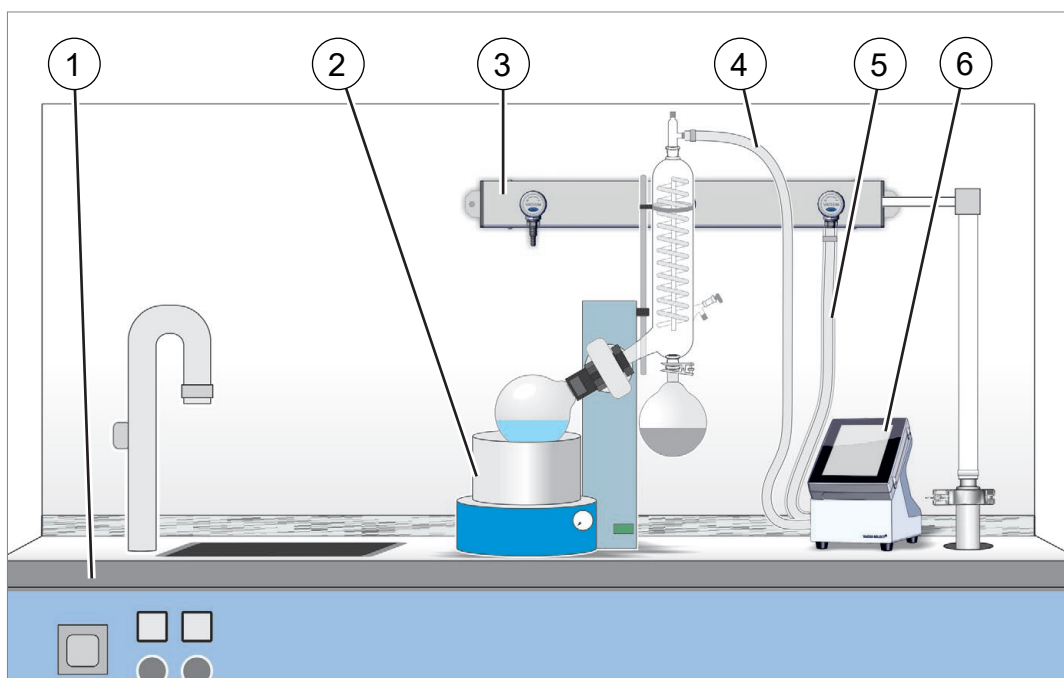

Bedeutung

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Labormöbel  |
| 2 | Anwendungsbeispiel: Rotationsverdampfer               |
| 3 | VACUU·LAN – Netzwerk-Anordnung mit drei Ventilmodulen |
| 4 | Vakuumschlauch zur Anwendung                          |
| 5 | Vakuumschlauch von der Vakuumpumpe/Vakuum-Netzwerk    |
| 6 | <b>VACUU·SELECT Kompakt</b>                           |

### 3.5 Fernsteuerung und Schnittstellen

Ab Softwareversion V1.04/V1.00 des **VACUU-SELECT** wird die Kommunikation via RS-232 sowie Modbus TCP unterstützt. So können Sie von zentraler Stelle den Controller fernüberwachen oder fernsteuern, z. B. mit einem PC oder Prozessleitsystem.


Anschlüsse → siehe Kapitel: **3.2.1 VACUU-SELECT Kompakt (Prinzipaufbau)** auf Seite 23

#### 3.5.1 Serielle Schnittstelle RS-232

Als serielle Schnittstelle können Sie einen RS-232-USB-Adapter an einem der USB-Anschlüsse des Controllers anschließen.

→ Beispiel  
Anschluss RS-232

Erforderliches  
Zubehör

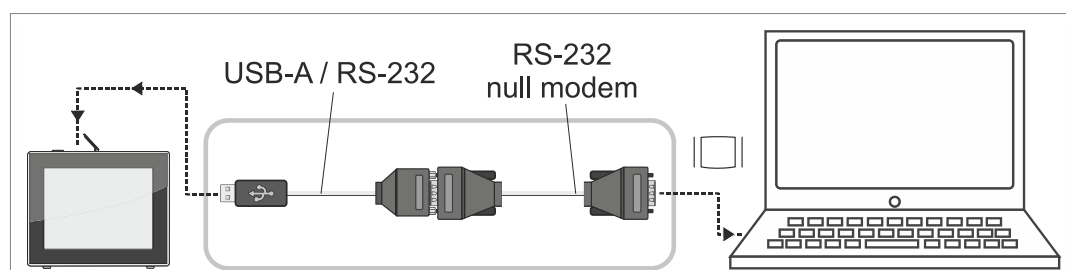


|  |          |
|--|----------|
| Adapterkabel USB auf RS-232, 1 m                     | 20637838 |
| Nullmodemkabel RS-232C, 2x Buchse Sub-D 9pol., 1,5 m | 20637837 |

#### 3.5.2 Modbus TCP

Nutzen Sie für die Fernsteuerung per Modbus TCP den Ethernetanschluss RJ45 auf der Rückseite des Controllers.

→ Beispiel  
Anschluss Ethernet

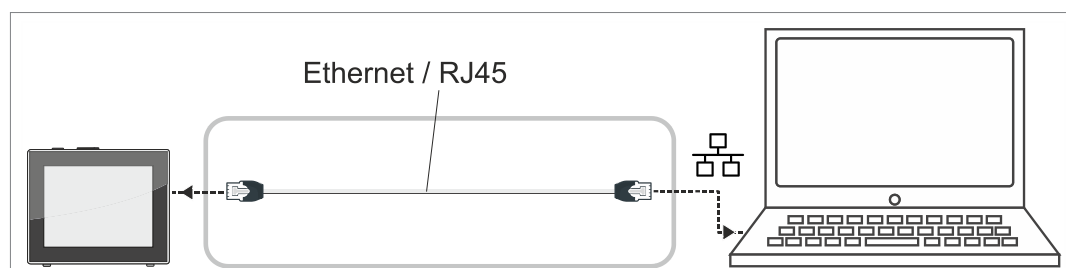

Ausführliche Beschreibungen zu den Schnittstellen, finden Sie hier: [Betriebsanleitung zu den Schnittstellen](#).

## 4 Aufstellung und Anschluss

### 4.1 Transport

Produkte von **VACUUBRAND** sind in einer transportsicheren, wiederverwertbaren Verpackung eingepackt.



Die Originalverpackung ist, für den sicheren Transport, genau auf Ihr Produkt angepasst.

⇒ Falls möglich, bewahren Sie bitte die Originalverpackung auf, z. B. zur Reparatursendung.

### Wareneingang

Wareneingang  
kontrollieren

Prüfen Sie die Lieferung direkt nach Erhalt auf mögliche Transportschäden und auf Vollständigkeit.

⇒ Melden Sie Transportschäden unverzüglich und schriftlich dem Lieferanten.

⇒ Gleichen Sie den Lieferumfang mit dem Lieferschein ab.

### 4.2 Aufstellung

#### Aufstellungsbedingungen prüfen

Aufstellungs-  
bedingungen  
abgleichen

- Das Gerät ist akklimatisiert.
- Die Umgebungsbedingungen sind eingehalten und liegen innerhalb der Einsatzgrenzen.

| Einsatzgrenzen   |                         | (US)                       |
|--|-------------------------|----------------------------|
| Umgebungstemperatur  | 10–40 °C                | 50–104 °F                  |
| Aufstellhöhe, maximal  | 2000 m<br>über NHN      | 6562 ft<br>above sea level |
| Luftfeuchte  | 30–80 %, nicht betauend |                            |
| Schutzart (Frontseite)   | IP 40 (IP 42)           |                            |
| Kondensat oder Verschmutzung durch Staub, Flüssigkeiten, korrosive Gase vermeiden. |                         |                            |

#### WICHTIG!

⇒ Beachten Sie den IP-Schutz des Controllers.

⇒ Der IP-Schutz ist nur garantiert, wenn der Controller entsprechend montiert oder aufgestellt wird.

**HINWEIS****Kondensat kann die Elektronik schädigen.**

Ein großer Temperaturunterschied zwischen Lagerort und Aufstellungsort kann zur Kondensatbildung führen.

⇒ Lassen Sie Ihr Vakuumgerät nach Wareneingang oder Lagerung vor der Inbetriebnahme mindestens 3-4 Stunden akklimatisieren.

**4.2.1 Tischversion**


Verwendung als  
Tischgerät

Als Tischversion kann der Controller direkt auf der Arbeitsfläche aufgestellt und angeschlossen werden, z. B. auf dem Labortisch.

**4.2.2 Stativversion**

Verwendung als  
Stativgerät

Für die Stativversion ist auf der Rückseite des Controllers ein Stativhalter montiert. Mit dem Stativhalter lässt sich der Controller direkt an einem Stativsystem im Labor befestigen oder mit dem Wandhalter an einer Wand.

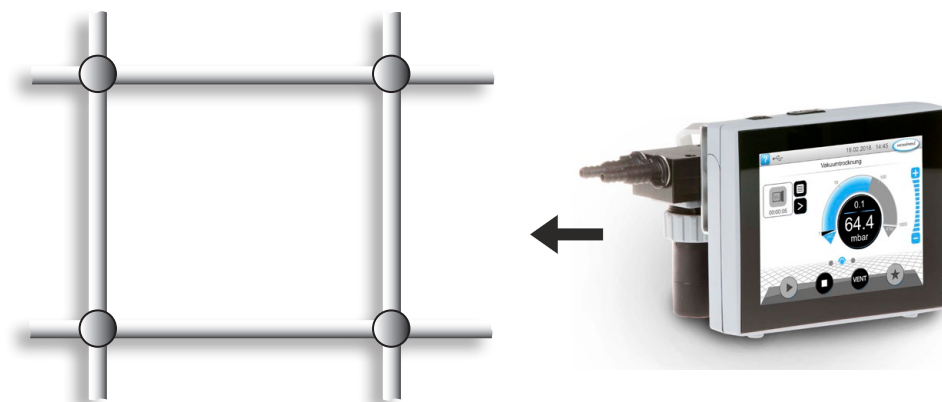


## Wandhalter befestigen

Montage des  
Wandhalters




### Vorbereitung:


⇒ Legen Sie Werkzeug und Verschraubungen bereit; z. B. Schlagbohrmaschine, Steinbohrer Ø6 mm, 6er Dübel, Universal-Schrauben, min. 5x30, Schraubendreher.

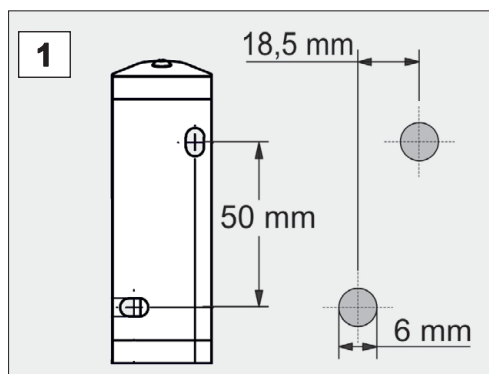


1. Zeichnen Sie anhand des Bohrbilds die Maße auf die Fläche, an welcher der Wandhalter befestigt werden soll.

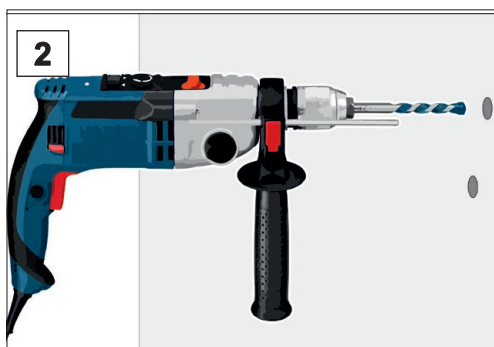


2. Bohren Sie 2 Löcher in die Wand und entfernen Sie das Bohrmehl.

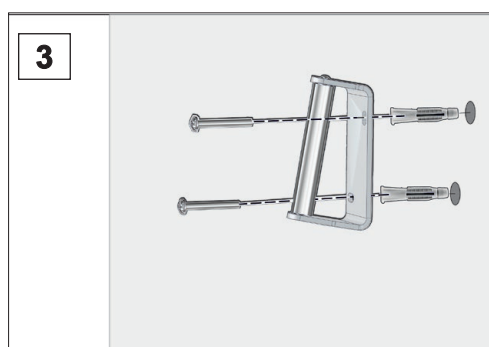


3. Stecken Sie die Dübel ein und befestigen Sie anschließend den Wandhalter mit den Schrauben.

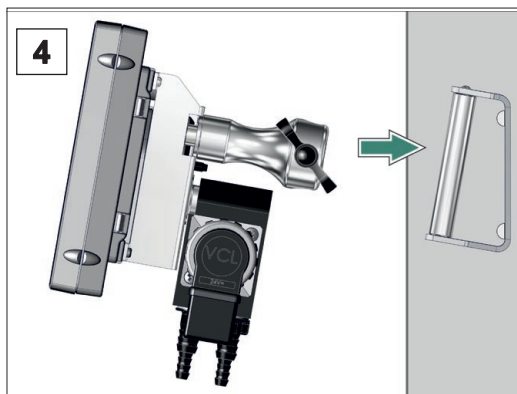


4. Stecken Sie den Controller mit dem Stativhalter auf.

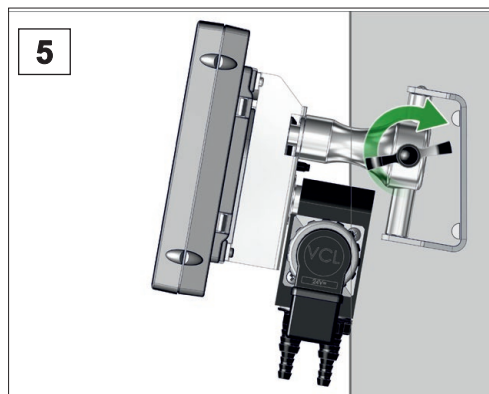

5. Fixieren Sie den Controller mit der Flügelmutter.

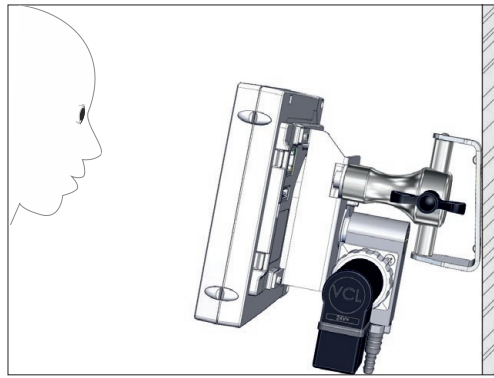

- ☒ Wandhalter montiert mit Controller.

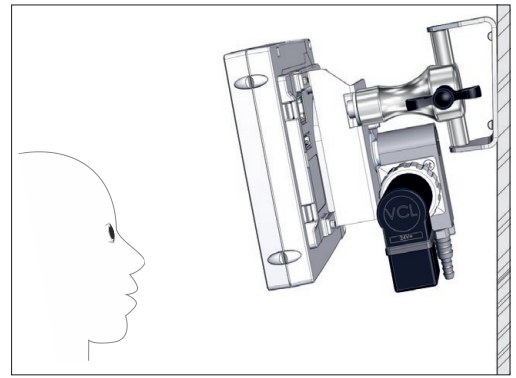


Alternativ kann der Wandhalter gedreht montiert werden.

## Stativhalter drehen


Soll der Controller horizontal genutzt werden, lässt sich der Stativhalter auf der Rückseite um 90° drehen.

Stativhalter 90° drehen

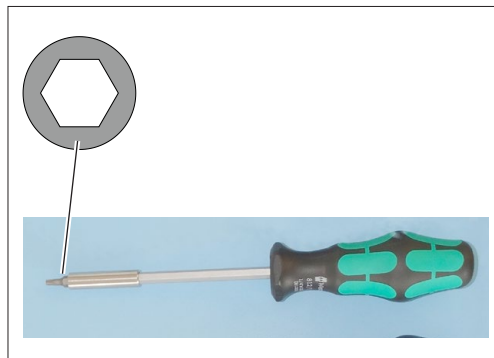


### Vorbereitung:


- ⇒ Legen Sie Werkzeug bereit; Innensechskantschlüssel Gr. 5.

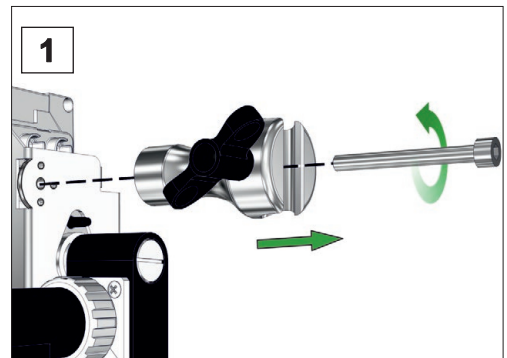

1. Drehen Sie zuerst die Flügelschraube und dann die Innensechskantschraube heraus.

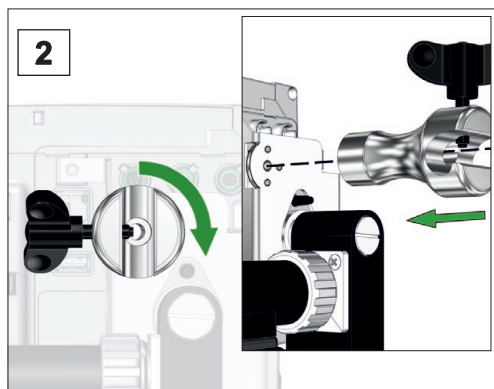

2. Drehen Sie den Stativhalter um 90° und stecken Sie den Stativhalter mit den Passstiften in die passenden Bohrungen.

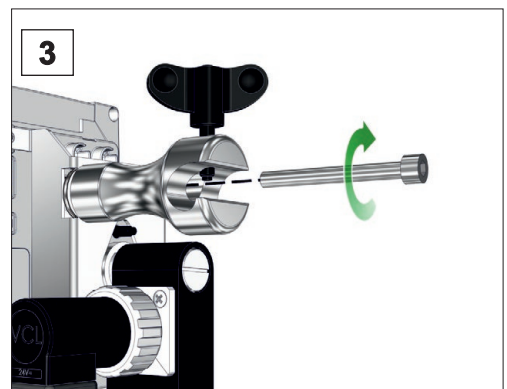


3. Schrauben Sie die Innensechskantschraube ein und drehen Sie die Flügelschraube handfest an.

### 4.2.3 Einbauversion


Verwendung als  
Einbaugerät

In der Einbauversion sind auf der Rückseite des Controllers Federclips montiert. Der Controller kann so direkt in den Einbausschnitt eines Labormöbels oder Schaltschranks geklipst werden. Das Display lässt sich drehen, so dass der Controller entweder horizontal oder vertikal eingeklipst werden kann.

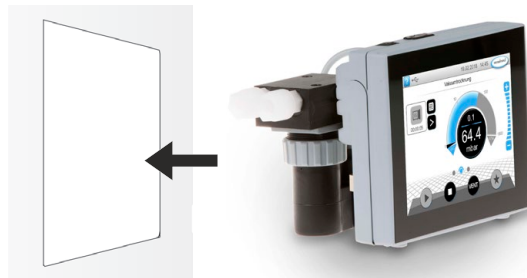

#### Einbausschnitt (in Schalttafel, Labormöbel, Kabelkanal)

Ausschnittsmaße für  
Einbau

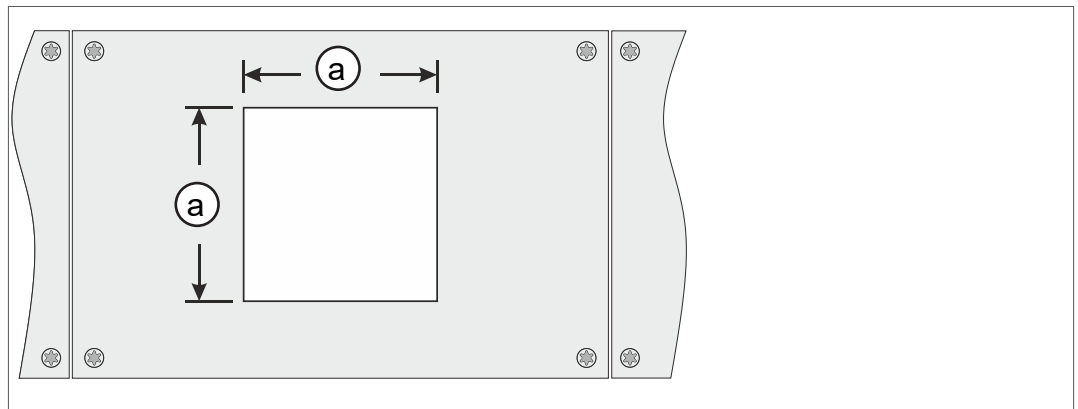

| Wandstärke |          | Maße (a) für Einbausschnitt |                     |
|------------|----------|-----------------------------|---------------------|
| 1 mm       | 0.04 in. | 111,5 mm x 111,5 mm         | 4.39 in. x 4.39 in. |
| 2 mm       | 0.08 in. | 112 mm x 112 mm             | 4.41 in. x 4.41 in. |
| 3 mm       | 0.12 in. | 112,5 mm x 112,5 mm         | 4.43 in. x 4.43 in. |

Je nach Wandstärke der Halterung sollte der Einbausschnitt mit passenden Toleranzen ausgeschnitten werden.

Federclips + Schrauben D3 x 10

20636593



## Ventilblock drehen


Je nach Einbauausrichtung lässt sich der Ventilblock um 90° drehen, z. B. für besseren Zugang und Anschluss der Verschlauchung.

Ventilblock der  
Einbauversion 90°  
drehen




### Vorbereitung:


⇒ Legen Sie Werkzeug bereit;  
Schlitzschraubendreher Gr. 6  
(alternativ eine passende  
Münze).

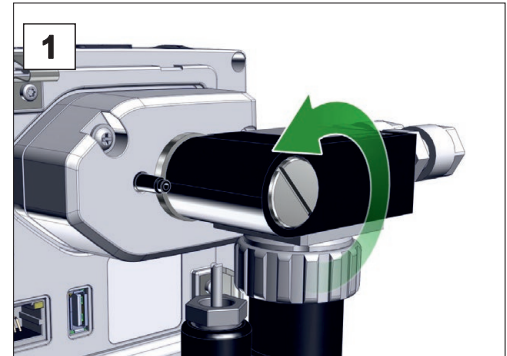


1. Drehen Sie die Befestigungs-  
schraube um eine halbe  
Umdrehung nach links.

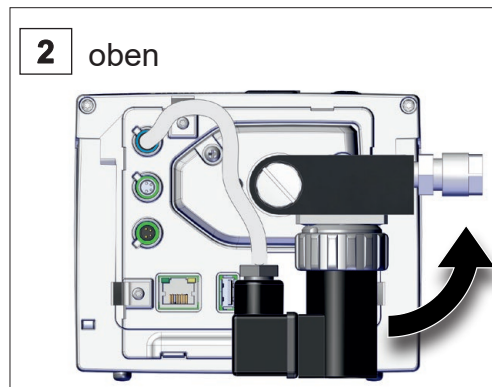

2. Drehen Sie den Ventilblock  
um 90°.

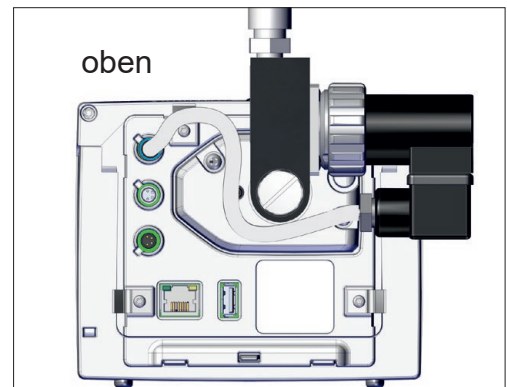

Ventilblock gedreht.

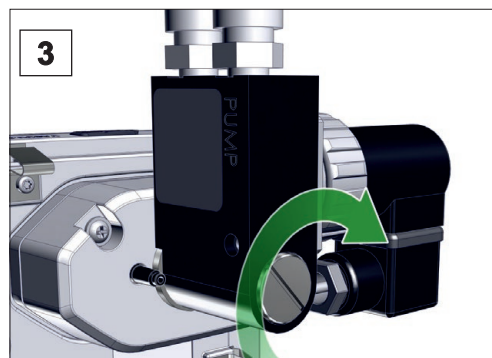

3. Drehen Sie die Befestigungs-  
schraube fest.



### 4.3 Elektrischer Anschluss

**WICHTIG!**

⇒ Verlegen Sie Anschlusskabel so, dass diese nicht durch scharfe Kanten, Chemikalien oder heiße Flächen beschädigt werden kann.


**HINWEIS**

**Die Gültigkeit des CE/UKCA-Kennzeichens und eine Zertifizierung für USA/Kanada (siehe Typenschild) kann erlöschen, wenn keine VACUUBRAND Spannungsversorgung verwendet wird.**

- ⇒ Verwenden Sie ein VACUUBRAND Steckernetzteil zur Spannungsversorgung.
- ⇒ Erfolgt die Spannungsversorgung nicht über ein VACUUBRAND Steckernetzteil, so muss die Spannungsversorgung eine stabilisierte 24 V Gleichspannung bereitstellen, welche auch im Fehlerfall nicht mehr als 6,25 A liefern darf.
- ⇒ Bei Verwendung von zusätzlichen Überstromschutzeinrichtungen (z. B. Sicherungen) müssen diese bei einem max. Strom von 8,4 A nach spätestens 120 s die Stromzufuhr unterbrechen.

#### Spannungsversorgung via Steckernetzteil\*

Steckernetzteil

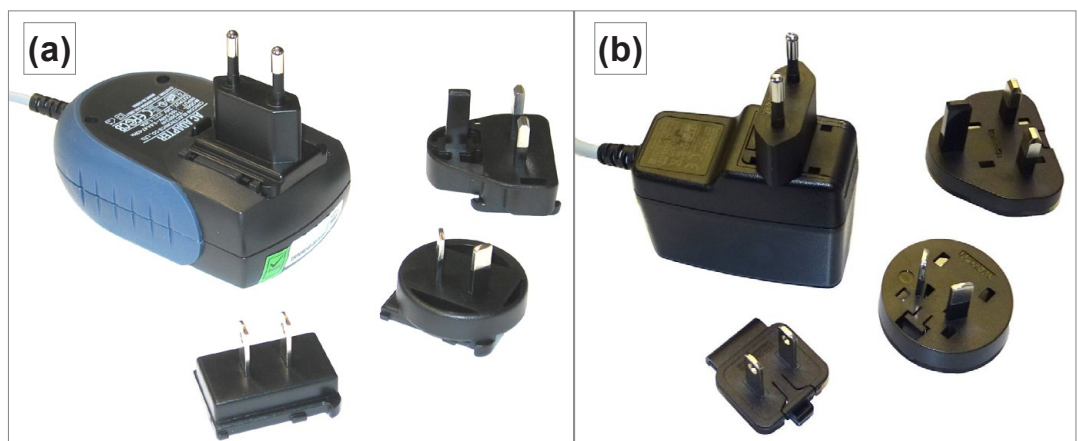

\* Kurzschlussfestes Weitbereichsnetzteil mit integriertem Überlastschutz und länderspezifischen Steckeraufsätzen: (a) bis 11/2020 (b) ab 12/2020

## Steckernetzteil vorbereiten

Anschluss  
vorbereiten

1. Nehmen Sie das Netzteil und die Steckeraufsätze aus der Verpackung.
2. Wählen Sie den Steckeraufsatz aus, der zu Ihrer Steckdose passt.
3. Stecken Sie den Steckeraufsatz auf die Metallkontakte des Netzteils.
4. Verschieben Sie den Steckeraufsatz bis dieser einrastet.

## Steckeraufsatz abnehmen


Steckeraufsatz vom  
Netzteil nehmen

1. Drücken Sie den Arretierungsknopf auf dem Netzteil.
  2. Nehmen Sie den Steckeraufsatz vom Netzteil ab.
- ☒ Ein anderer Steckeraufsatz kann fixiert werden.

## Steckernetzteil am Controller anschließen

- ⇒ Stecken Sie das **VACUU·BUS**-Kabel vom Steckernetzteil in den Steckeranschluss des Controllers.

Spannungs-  
versorgung über  
Steckernetzteil

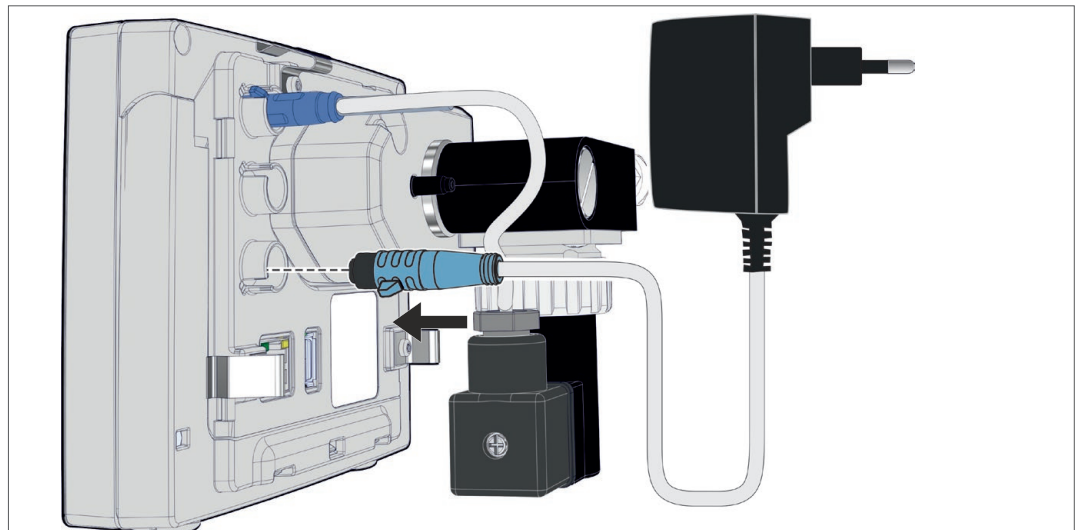

## Spannungsversorgung anschließen

- ⇒ Stecken Sie das Steckernetzteil in die Netzsteckdose.

## 4.4 Vakuumanschluss



### WARNUNG


#### Berstgefahr durch Überdruck

⇒ Verhindern Sie unkontrollierten Überdruck, z. B. beim Verbinden mit einem abgesperrten oder blockierten Leitungssystem.


Der Vakuumanschluss erfolgt auf der Rückseite des Controllers, am Chemie-Saugleitungsventil. Je nach Controller-Version stehen verschiedene Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung. Schlauchmaterial ist nicht teil des Lieferumfangs.

### Anschlussmöglichkeiten

Anschlussmöglichkeiten  
Controller-Versionen

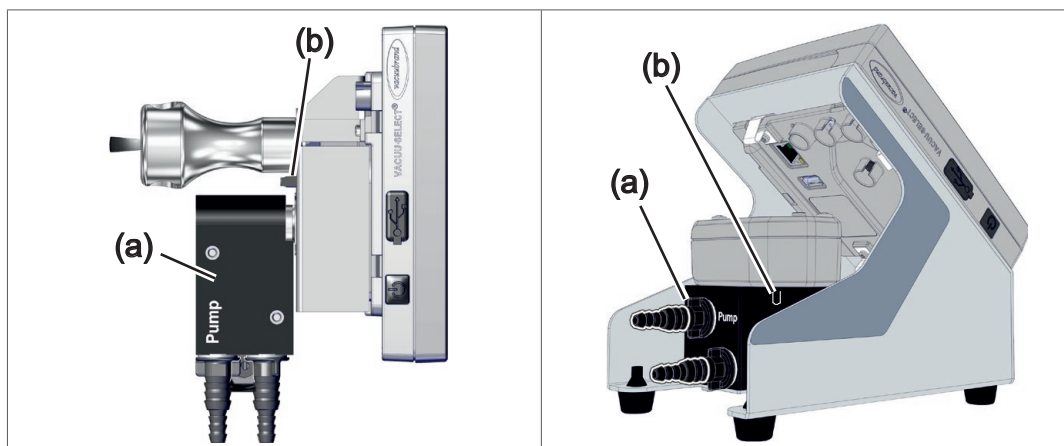

Anschluss via Schlauchwelle DN 6/10

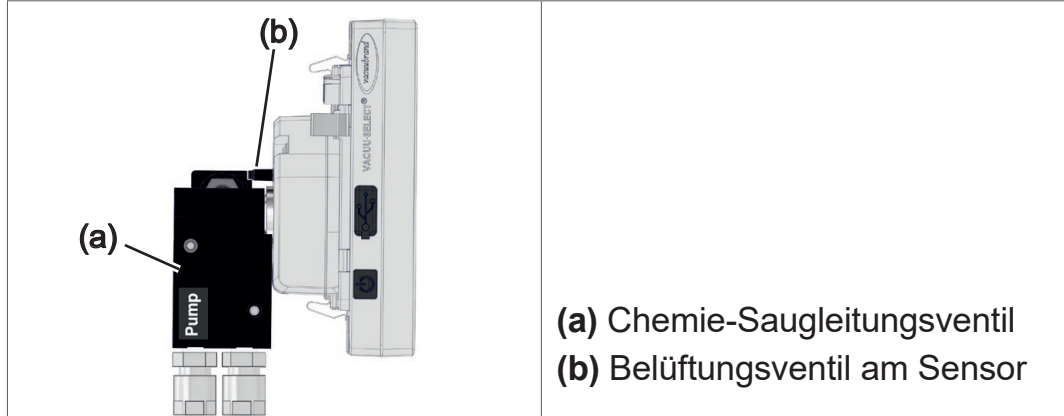

Anschluss via PTFE-Schlauch DN 8/10


### WICHTIG!

- ⇒ Verwenden Sie einen für den Vakuumbereich geeigneten Vakuumschlauch.
- ⇒ Schmutz, Schlauchknicke oder Beschädigungen können die Funktion beeinträchtigen.

## PTFE-Schlauch anschließen

Vakuumananschluss  
PTFE

**Benötigtes Anschlussmaterial:** PTFE-Schlauch.

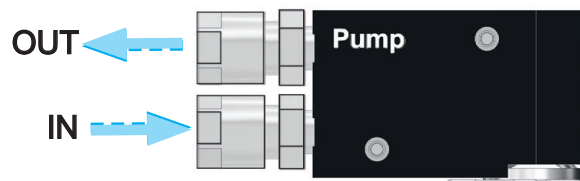

**OUT** Vakuumpumpe  
oder VACUU·LAN  
anschließen.


**IN** Anwendung an-  
schließen

|                 |   |
|-----------------|---|
| <p><b>1</b></p> | <p>1. Drehen Sie die Überwurfmutter heraus und schieben Sie sie auf die Schläuche.</p>                                    |
| <p><b>2</b></p> | <p>2. Stecken Sie die Schläuche in die Einschraubverschraubung und fixieren Sie die Schläuche mit den Überwurfmutter.</p> |

## Schlauch an Schlauchwelle anschließen

Vakuumananschluss  
Schlauchwelle

**Benötigtes Anschlussmaterial:** Vakuumschlauch und passende Schlauchschelle.

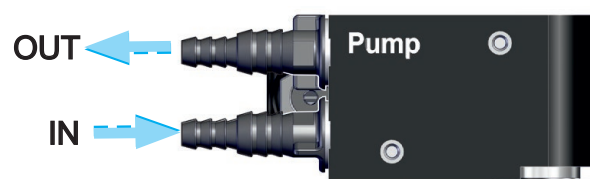

**OUT** Vakuumpumpe  
oder VACUU·LAN  
anschließen.

**IN** Anwendung an-  
schließen

|                 |  |
|-----------------|--|
| <p><b>1</b></p> | <p>1. Schieben Sie die Vakuumschläuche auf die Schlauchwellen.</p> |
| <p><b>2</b></p> | <p>2. Fixieren Sie die Vakuumschläuche mit Schlauchschellen.</p>   |

## 4.5 Belüftungsanschluss (Option)




### GEFAHR

#### Explosionsgefahr durch Belüften mit Luft.

Abhängig vom Prozess kann sich beim Belüften ein explosionsfähiges Gemisch bilden oder es können andere gefährliche Situationen entstehen.


- ⇒ Nie Prozesse mit Luft belüften, bei denen ein explosionsfähiges Gemisch entstehen kann.
- ⇒ Belüften Sie gegebenenfalls mit Inertgas (max. 1,2 bar/900 Torr, abs.).

Der Anschluss von Belüftungsgas erfolgt auf der Rückseite des Controllers, an der Schlauchwelle des **VACUU-SELECT Sensor**. Je nach Controller-Version ist der Sensor unterschiedlich montiert. Schlauchmaterial ist nicht teil des Lieferumfangs.

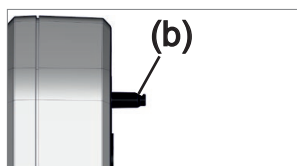

#### Mit Umgebungsluft belüften<sup>1</sup>


Für das Belüften **(b)** mit Umgebungsluft muss am Sensor nichts angeschlossen werden.

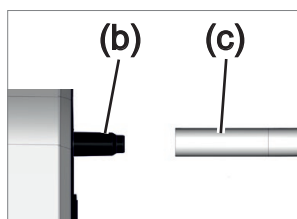

#### Mit Inertgas belüften – Belüftungsventil<sup>1</sup> anschließen

**Benötigtes Anschlussmaterial:** Schlauch für Schlauchwelle, z. B. Silikonschlauch 4/5 mm

⇒ Stecken Sie den Schlauch **(c)** auf den Anschluss vom Belüftungsventil **(b)**.

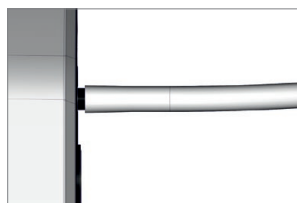

- ☒ Belüftungsventil mit Schlauch für Belüften mit Inertgas<sup>2</sup>.


<sup>1</sup> Nur gültig für Sensoren **mit integriertem Belüftungsventil**.

<sup>2</sup> Überdruck vermeiden.


## 5 Benutzeroberfläche

### 5.1 Controller einschalten

Gerät einschalten

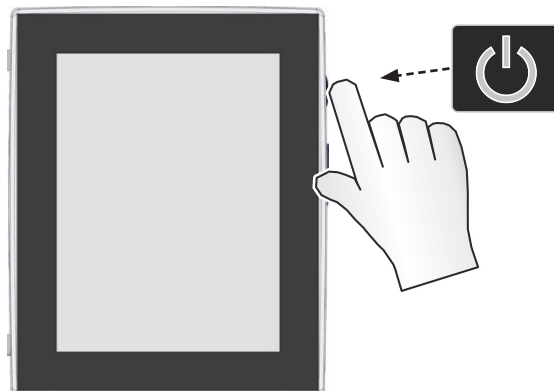

⇒ Drücken Sie am Controller kurz die ON/OFF-Taste

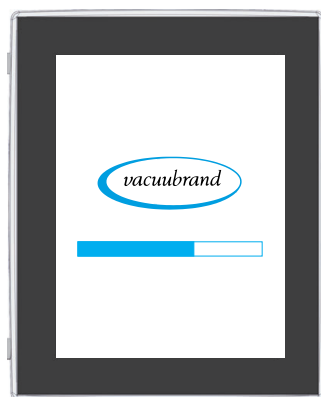


☑ Gerät startet.



☑ Hinweis wird angezeigt

### Funktionen ON/OFF-Taste

ON/OFF-Taste

| ON/OFF  | Bedeutung  |
|---|--|
|  | <b>Controller einschalten</b><br>▶ ON/OFF-Taste kurz drücken   |
|   | <b>Controller ausschalten</b><br>▶ ON/OFF-Taste ~3 Sekunden gedrückt halten und Pop-up bestätigen.   |
|   | <b>Controller sperren / entsperren</b><br>▶ ON/OFF-Taste kurz drücken.<br>▶ Gegen unbeabsichtigte Bedienung sperren, z. B. bei Reinigung des Displays. |
|   | <b>Controller Neustart (Reboot)</b><br>▶ ON/OFF-Taste ~10 Sekunden gedrückt halten.  |

### 5.1.1 Touchscreen


Touchscreen-  
Bedienung

Der Controller ist ein Gerät mit Touchscreenbedienung. Durch Berührung wählen Sie, z. B. eine Anwendung aus und starten oder stoppen diese.

Durch unterschiedliche Gesten können Sie erweiterte Funktionen des Geräts nutzen: Zwischen Anzeigen wechseln, Anwendungen editieren oder Hilfe- und Kontextfunktionen nutzen.

### 5.1.2 Gesten zur Bedienung

Gesten-Symbole

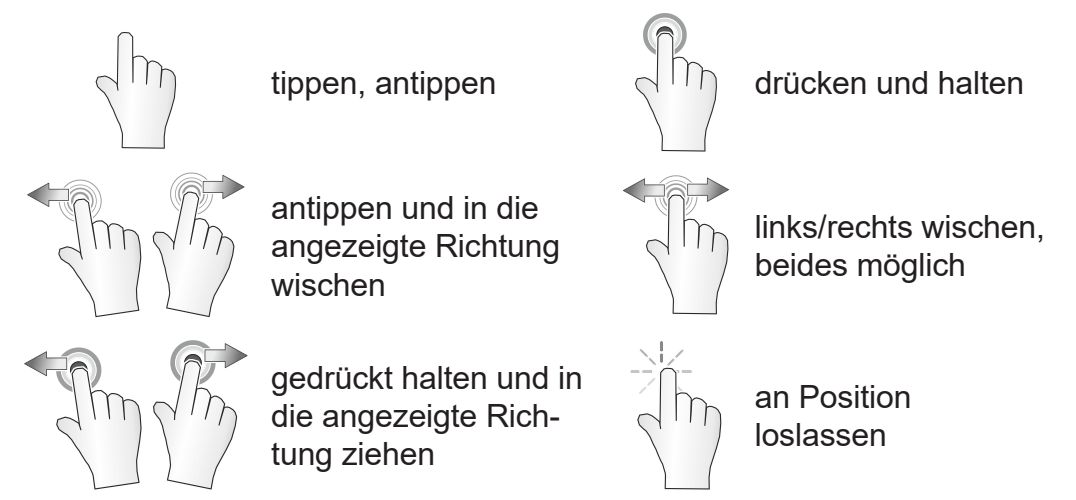


## 5.2 Gerät einrichten

Um das Gerät einzurichten, folgen Sie beim erstmaligen Einschalten des Geräts oder nach einem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

### 5.2.1 Hinweis zu Datenspeicherung

Bevor der Controller zur Prozessanzeige wechselt, erhalten Sie ein Pop-up mit Informationen zur aktuellen Datenspeicherung.

→ Beispiel  
Info-Pop-up  
Datenspeicherung

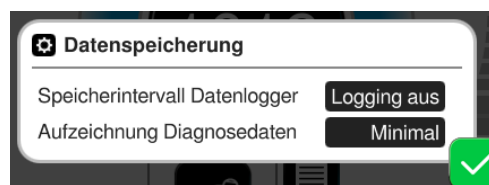

#### Datenspeicherung

- Speicherintervall Datenlogger
- Aufzeichnung Diagnosedaten

⇒ Wählen Sie Ihre bevorzugten Einstellungen und bestätigen Sie den Hinweis.



Im Auslieferungszustand oder nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen ist der Datenlogger ausgeschaltet und die Aufzeichnung der Diagnosedaten auf *Minimal* voreingestellt.

Der Hinweis zur Datenspeicherung erscheint mit jedem Neustart des Controllers.

Für spätere Anpassungen des Datenloggers

→ *siehe Kapitel: 7.2 Datenlogger auf Seite 77*


Für spätere Anpassungen von Diagnosedaten

→ *siehe Kapitel: 7.3 Service auf Seite 78*

## 5.3 Bildschirmausrichtung

### Unterstützte Bildschirmausrichtungen

→ Beispiel  
Ansicht Querformat  
und Hochformat

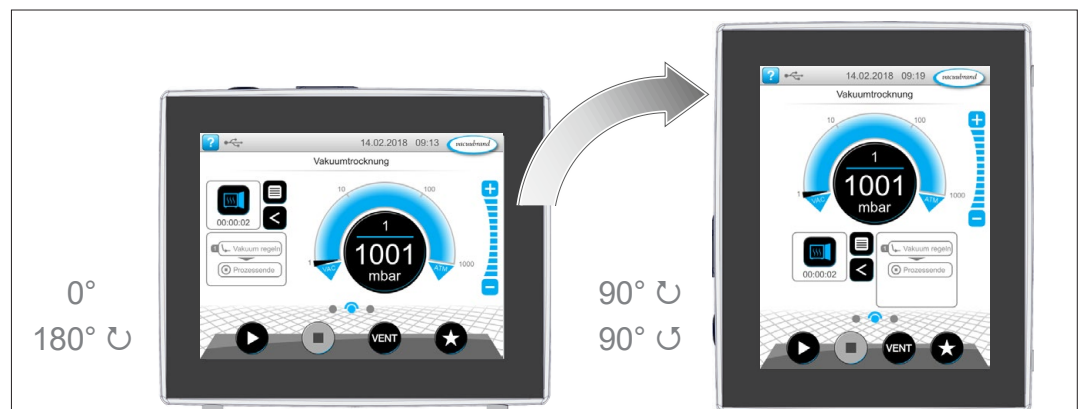

#### WICHTIG!

Die nachfolgenden Beschreibungen zu Bedienung und Funktion sind im Hochformat (Portrait) beschrieben. Die Beschreibungen sind, trotz anderer Anordnung der Bedienelemente, auch für das Querformat (Landscape) gültig.

Ändern der Bildschirmausrichtung

→ *siehe Kapitel: 7.1.7 Einstellungen auf Seite 69*



## 5.4 Anzeige- und Bedienelemente

In diesem Kapitel sind die Anzeige- und Bedienelemente des Controllers übersichtlich zusammengefasst und erklärt.




⇒ Nutzen Sie dieses Kapitel, wenn Sie bei der Bedienung noch einmal die Bedeutung einer Anzeige oder eines Bedienelements nachlesen möchten.

### 5.4.1 Prozessanzeige (Hauptbildschirm)

Nach dem Einschalten des Geräts erscheint die sogenannte Prozessanzeige. Die Prozessanzeige ist der Hauptbildschirm des Controllers. Die Anzeige passt sich der gewählten Anwendung an, z. B. Name der Anwendung, Prozessschritte, Sollwert.

#### Elemente der Prozessanzeige

→ Beispiel  
Prozessanzeige  
mit Anzeige- und  
Bedienelementen

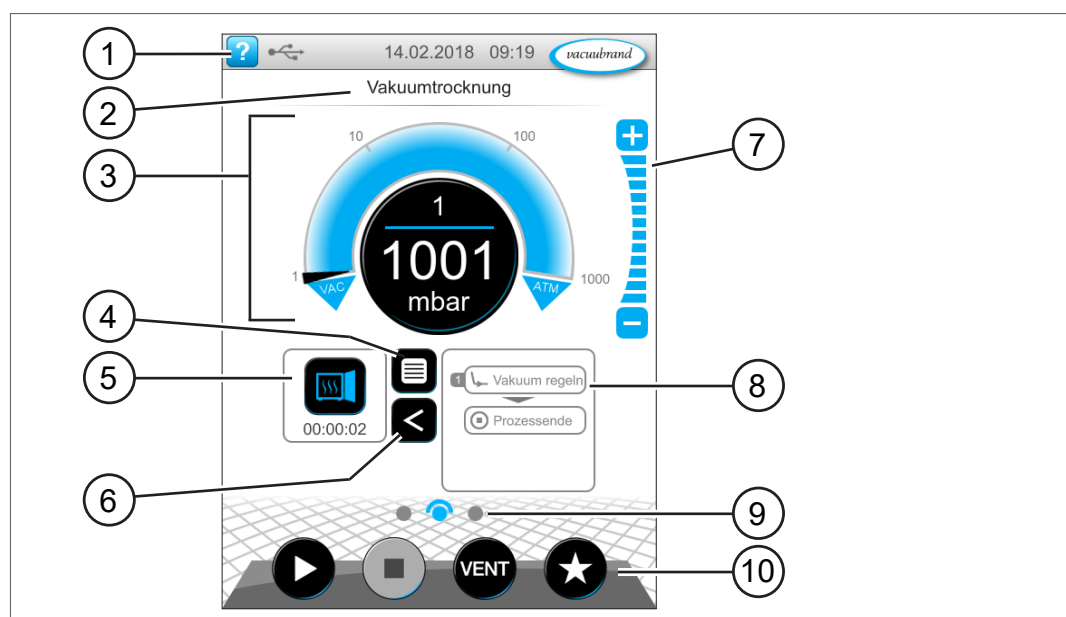

Bedeutung

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Statusleiste mit Hilfe-Taste, Datum/Uhrzeit, Fehlermeldung |
| 2  | Titelzeile: Name der Anwendung, der Anzeige oder des Menüs |
| 3  | Analoge und digitale Druckanzeige mit Soll- und Istdruck   |
| 4  | Taste Anwendungsmenü öffnen                                |
| 5  | Anwendungsicon mit Prozesszeit, Parameterliste öffnen      |
| 6  | Anzeige der Prozessschritte öffnen/schließen               |
| 7  | Stufentasten, Druckwert während dem Betrieb anpassen       |
| 8  | Anzeige der Prozessschritte                                |
| 9  | Bildschirmnavigation                                       |
| 10 | Bedientasten = Bedienelemente zur Steuerung                |

## 5.4.2 Anzeigeelemente





### Statusleiste

Farbcodierung  
Statusleiste

| Farbe       | Bedeutung       |
|-------------|-----------------|
| <b>Grau</b> | <i>Standard</i> |
| <b>Gelb</b> | <i>Warnung</i>  |
| <b>Rot</b>  | <i>Störung</i>  |



### Töne

Töne

| Ton   | Bedeutung  |
|---|--|
| <br>  | <i>Tastenton, wenn nicht auf Stumm geschaltet</i><br>▶ Eingabe Feedback  |
| <br> | <i>Warnung oder Störung</i><br>▶ Zeigt an, dass Störung oder Warnung anliegt.<br>▶ Aktiv, solange Fehlerzustand besteht. |


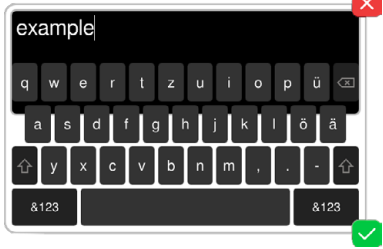
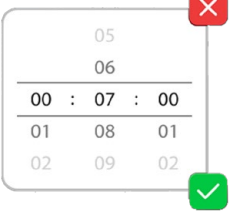
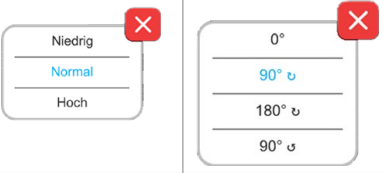

### Druckanzeige

→ Beispiel  
Druckanzeige  
Standard

| Symbol (Icon)   | Bedeutung  |
|---|--|
|  | <i>Druckanzeige Standard</i><br>▶ Druckkurve – analoge Druckanzeige.<br>▶ Digitale Druckanzeige. |
|   | <b>Blau</b> Istdruck   |
|   | <b>Grau</b> Regelbereich   |
|  | Solldruck  |
|   | Blaue Trennlinie – bei Betrieb animiert  |
|   | Istdruck und Druckeinheit  |


## Pop-up-Fenster (Kontextmenüs)

→ Beispiele  
Pop-up-Fenster

| Grafik  | Bedeutung   |
|---|---|
|    | <b>Zehnertastatur mit Sondertasten</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Numerische Werte eingeben.</li> <li>▶ Funktion über Sondertasten auswählen (AUS, ATM, AUTO).</li> <li>▶ Anzeige von Min-/Max-Werten.</li> <li>▶ Keine Übernahme von Werten außerhalb des zulässigen Eingabebereichs.</li> </ul> |
|    | <b>Bildschirmtastatur</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Alpha-Numerische Werte im Eingabefeld eingeben.</li> <li>▶ Automatische Umschaltung auf qwerty oder quertz.</li> </ul>   |
|   | <b>Timepicker</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zeitwert durch scrollen der Zahlen einstellen.</li> </ul>  |
|  | <b>Pop-up-Liste</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Funktion oder Einstellung auswählen.</li> </ul>  |
|  | <b>Meldung oder Störmeldung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Meldung, Störmeldung als Klartext.</li> <li>▶ Meldung bestätigen, Störung quittieren.</li> </ul>   |


## Parameterliste

→ Beispiel  
Parameterliste
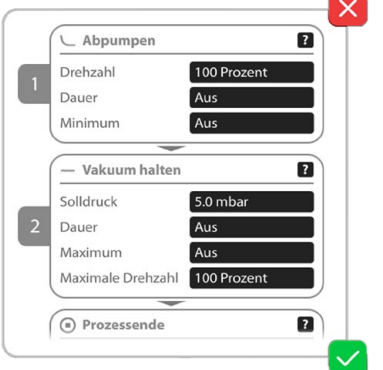
| Grafik  | Bedeutung   |
|---|---|
|  | <b>Parameterliste mit Eingabefeldern</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Anzeige und Anpassung von anwendungsbezogenen Werten.</li> <li>▶ Übersicht in Prozessschritte aufgeteilt.</li> <li>▶ Die Anzeige der Parameterliste passt sich der gewählten Anwendung an.</li> </ul> |
|   | <b>Blau</b> aktiver Prozessschritt<br><b>Grau</b> nicht aktiver Prozessschritt  |

### 5.4.3 Bedienelemente und Symbole


#### Statusleiste

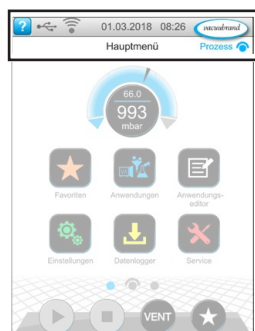

→ Beispiel  
Hauptmenü

| Symbol (Icon)        | Bedeutung   |
|----------------------|---|
|                      | <b>Hilfe aufrufen</b><br>► Von beliebiger Menüebene <i>Tipps zur Bedienung</i> aufrufen.                                |
|                      | <b>USB angeschlossen</b><br>► Zeigt an, dass ein Speichergerät über USB angeschlossen ist.                              |
|                      | <b>Ethernet angeschlossen (Option)</b><br>► Zeigt an, dass ein Ethernetkabel eingesteckt ist.                           |
|                      | <b>RS-232-Adapter angeschlossen (Option)</b><br>► Zeigt an, dass ein RS-232/USB-Wandler angeschlossen ist.              |
|                      | <b>WiFi aktiv (Option)</b><br>► Zeigt an, dass ein WLAN-USB-Adapter gesteckt ist.                                       |
| <b>Datum/Uhrzeit</b> | <b>Datum und Uhrzeit</b><br>► Zeigt Datum und Uhrzeit in dem voreingestellten Format an.                                |
|                      | <b>Prozessanzeige aufrufen</b><br>► Von beliebiger Menüebene zurück zur Prozessanzeige wechseln; Symbol Prozessanzeige: |


## Bedienelemente – Solldruck anpassen

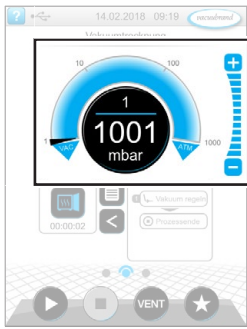





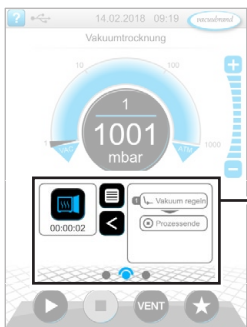


Prozessanzeige,  
Solldruck anpassen,  
auch während dem  
Betrieb

| Symbol (Icon) |  | Bedeutung   |
|---------------|--|---|
|               |  | <b>Druckkurve – analoge Druckanzeige</b><br>▶ Den Solldruck durch Verschieben der Pfeilmarkierung anpassen. |
|               |  | Pfeilmarkierung Solldruck   |
|               |  | <b>Digitale Druckanzeige</b><br>▶ Den Solldruck durch Antippen anpassen.                                    |
|               |  | <b>Stufentasten</b> (kein Schieberegler!)<br>▶ Den Solldruck durch Antippen anpassen.                       |
| <b>Blau</b>   |  |   |
| <b>Grau</b>   |  | aktiv   |
|               |  | gesperrt  |

## Bedienelemente – Prozessschritte



Prozessanzeige

| Taste oder Symbol (Icon)  |   | Bedeutung   |
|---|---|---|
| aktiv   | gesperrt  | <b>Anwendungsicon</b><br>▶ Kurz antippen: Parameterliste öffnen.<br>▶ Lang antippen: Kontextmenü öffnen.  |
|  |   |   |
|  |  | <b>Short-cut</b><br>▶ Menü Anwendungen öffnen.  |
|  |  |   |
|   |   | <b>Pfeil rechts/links</b><br>▶ Anzeige der Prozessschritte öffnen/schließen.                              |
|   |   |   |
|  |   | <b>Anzeige der Prozessschritte</b><br>▶ <i>Parameterliste</i> aufrufen.<br>▶ Anzeige der Prozessschritte. |
|   |   |   |
|   |   | <b>Blau</b> aktiver Prozessschritt bei Betrieb  |
|   |   | <b>Grau</b> nicht aktiver Prozessschritt  |
|  |   | <b>Bildschirmnavigation</b><br>▶ Zwischen den Bildschirmen einer Menüebene wechseln.                      |
|   |   |   |
|   |   | <b>Blau</b> ausgewählte Seite   |
|   |   | <b>Grau</b> weitere Seiten der Ebene  |

## Parameterliste



**Weiter mit [Text auf Taste], wenn im Prozess vor-gesehen**

- ▶ Durch Antippen den auf der Taste gezeigten, nächsten Prozessschritt starten, z. B. Vakuum halten.


## Bedienelemente – Parameterliste



→ Beispiel  
Parameterliste

| Symbol (Icon) | Bedeutung  |
|---------------|--|
|               | <b>Abbrechen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eingabe oder Auswahl abbrechen.</li> <li>▶ Zurück zur letzten Anzeige wechseln.</li> <li>▶ Menü verlassen.</li> </ul>                        |
|               | <b>Hilfe zum Prozessschritt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Informationen zum Prozessschritt anzeigen lassen.</li> </ul>  |
|               | <b>Bestätigen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Eingabe oder Auswahl bestätigen.</li> <li>▶ Menü verlassen.</li> <li>▶ Störung quittieren.</li> </ul>                                       |
|               | <b>Eingabefeld oder Auswahlfeld</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Durch Antippen öffnet ein Pop-up zur Eingabe von Werten oder Auswahl einer Funktion, auch während dem Betrieb.</li> </ul> |
|               | <b>Blau</b> Eingabefeld bei Betrieb  |
|               | <b>Schwarz</b> Eingabefeld in Stopp  |


## Bedienelemente zur Steuerung

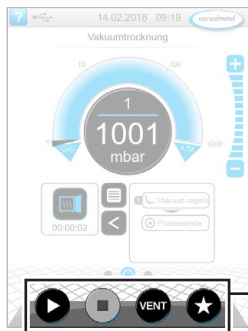

Prozessanzeige

| Taste |          | Funktion  |
|-------|----------|---|
| aktiv | gesperrt |   |
|       |          | <b>Start</b><br>► Anwendung starten – nur in der Prozessanzeige.  |
|       |          | <b>Stop</b><br>► Anwendung stoppen – immer möglich.   |
|       |          | <b>VENT – System belüften (Option)</b><br>► Tastendruck < 2 Sek. = kurz Belüften, Regelung läuft weiter.                                    |
| <br>  |          | ► Tastendruck > 2 Sek. = Belüften bis Atmosphärendruck, Vakuumpumpe wird gestoppt.<br>► Tastendruck beim Belüften = Belüften wird gestoppt. |
|       |          | <b>Favoriten</b><br>► Menü <i>Favoriten</i> aufrufen.   |

\* Taste wird nur angezeigt, wenn Belüftungsventil angeschlossen oder aktiviert.

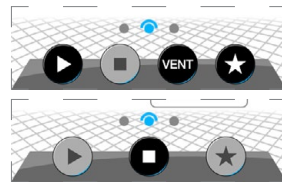

= Belüftungsventil angeschlossen und aktiviert

= kein Belüftungsventil angeschlossen, oder deaktiviert

## Sonstige Icons mit Funktion

| Icon | Bedeutung  |
|------|--|
|      | <b>Editieren</b><br>► Im Anwendungsektor Beschreibung für neue Anwendung eingeben.         |
|      | <b>Prozessschrittconfiguration</b><br>► Im Anwendungsektor Prozessschrittdetails anpassen. |



## 6 Bedienung

Der Controller lässt sich praxisbezogen bedienen. Aus einer Reihe vorbereiteter Anwendungen können Sie eine Anwendung auswählen, bearbeiten und starten. Feineinstellungen für die gewählte Anwendung können jederzeit in der Parameterliste vorgenommen werden oder direkt über die **5.4.3 Bedienelemente und Symbole auf Seite 48**.





### 6.1 Anwendungen

#### 6.1.1 Anwendung auswählen und starten

→ Beispiel  
Anwendung  
auswählen und  
starten



tippen,  
antippen

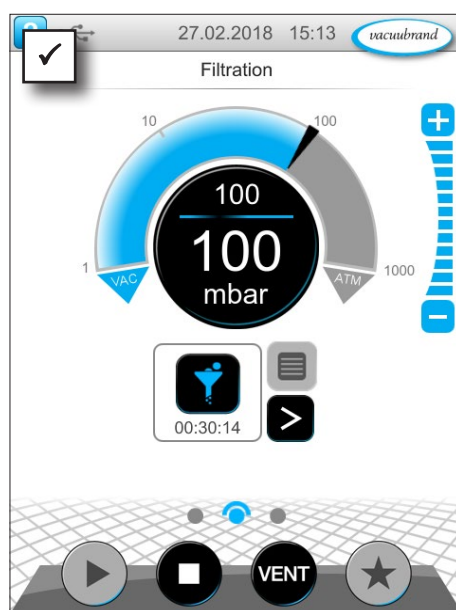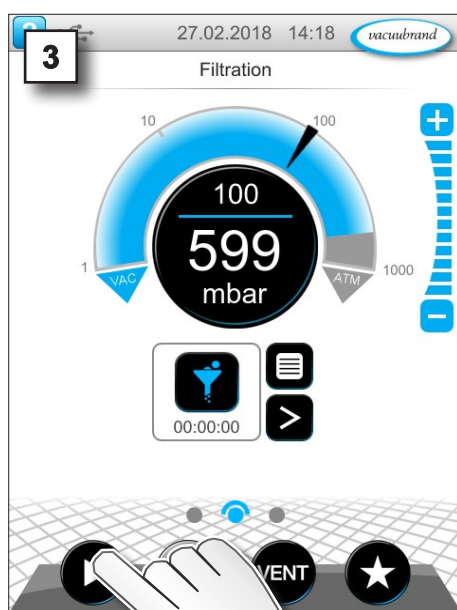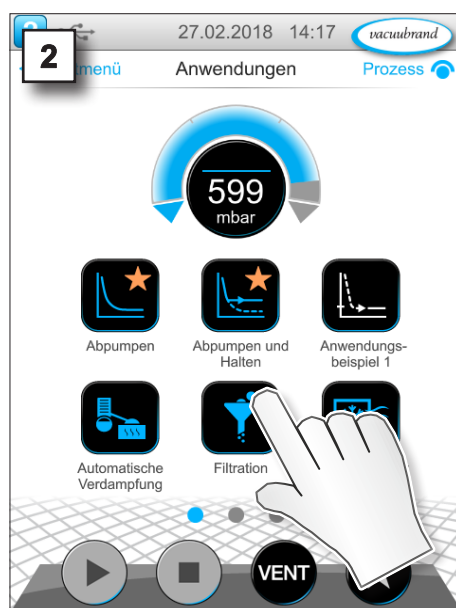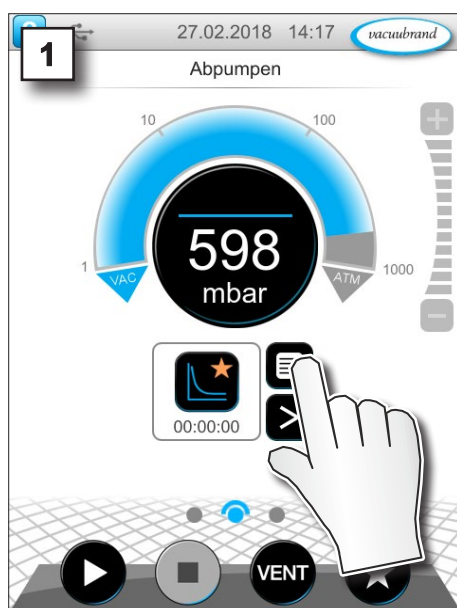

- ☒ Vakuumregelung läuft.
- ☒ Animierte blaue Trennlinie.






### 6.1.2 Solldruck anpassen

Der Controller bietet verschiedene Möglichkeiten, den Solldruck auch während dem laufenden Betrieb anzupassen.


#### Solldruck in Parameterliste ändern



tippen,  
antippen

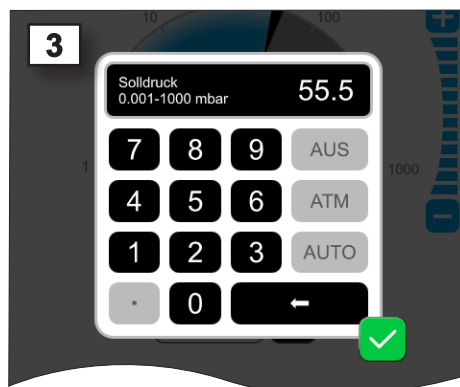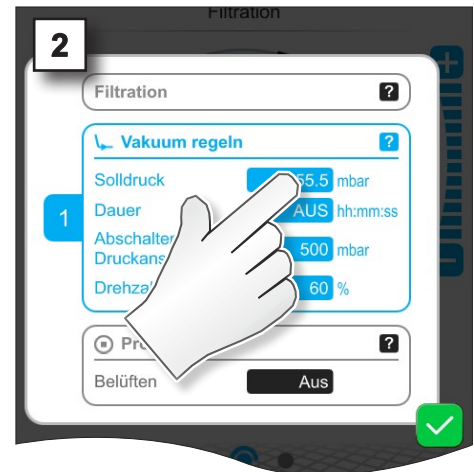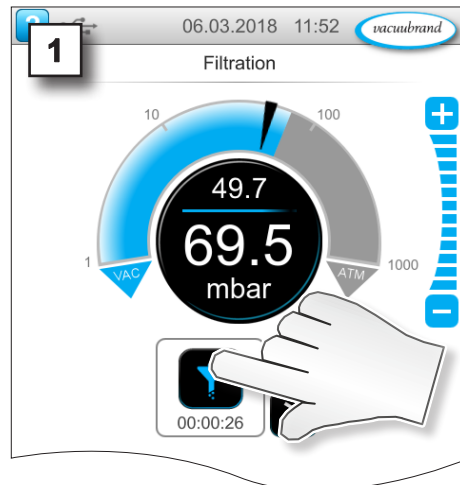


⇒ Im Pop-up einen Sollwert eingeben und die Eingabe 2x bestätigen.

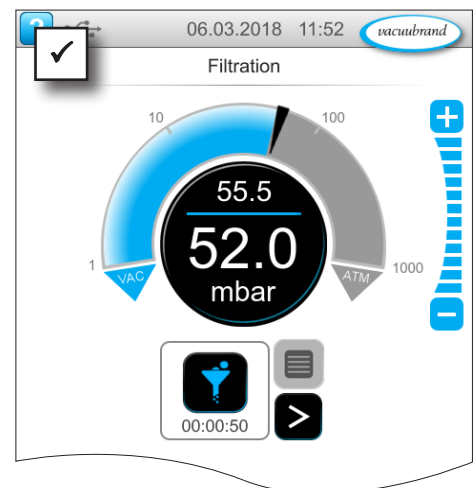



#### Feinanpassung über Stufentasten

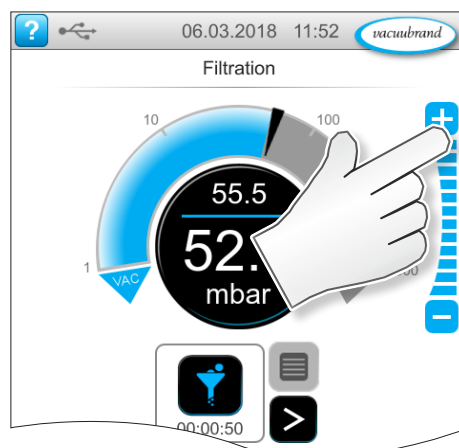


tippen,  
antippen



⇒  -Tasten antippen oder gedrückt halten = Sollwert vergrößern

⇒  -Tasten antippen oder gedrückt halten = Sollwert verkleinern



## Solldruck über Pfeilmarkierung anpassen

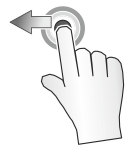

gedrückt  
halten  
und  
ziehen





loslassen

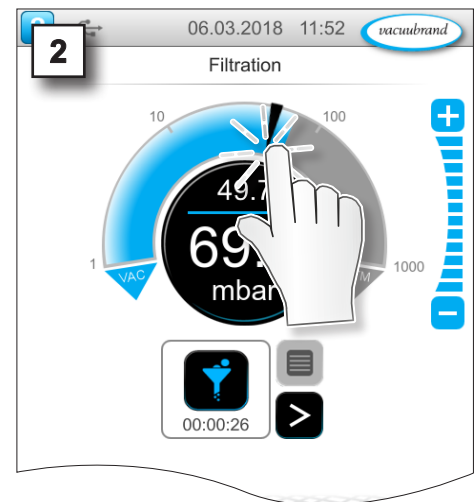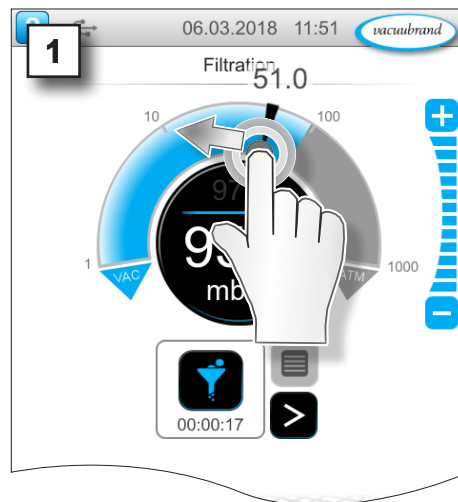


## Solldruck in digitaler Druckanzeige anpassen



tippen,  
antippen

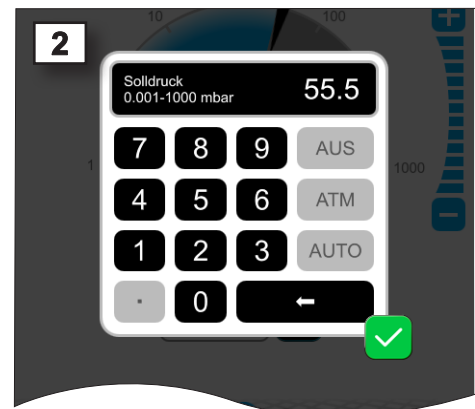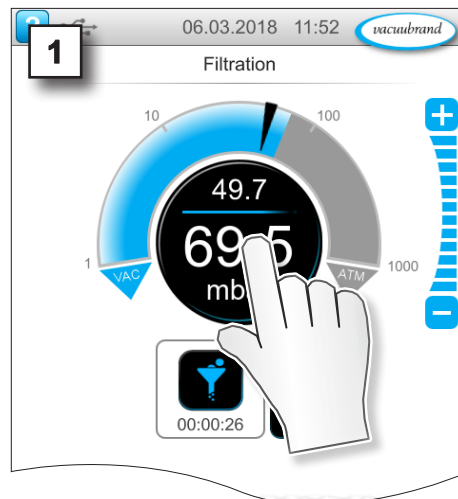

⇒ Im Pop-up einen Sollwert eingeben und die Eingabe bestätigen.

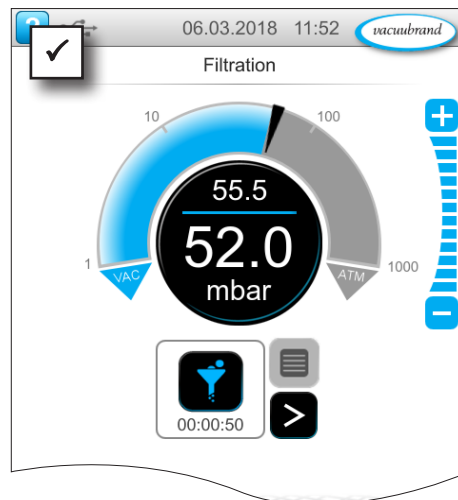



### 6.1.3 Belüften

#### Kurz belüften

Kurz belüften



tippen,  
antippen

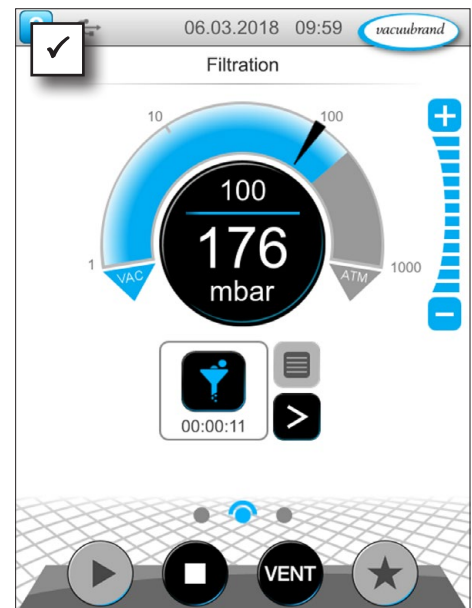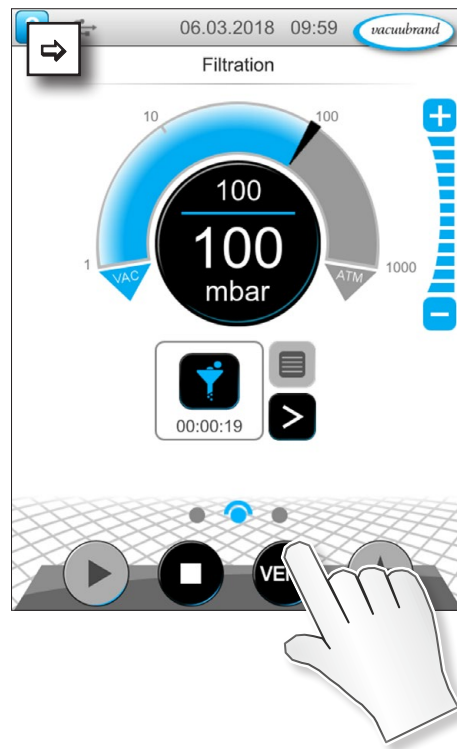



- ✓ Leichter Druckanstieg.
- ✓ Vakuumregelung läuft weiter.

#### Belüften bis Atmosphärendruck

Dauerhaft belüften



gedrückt  
halten

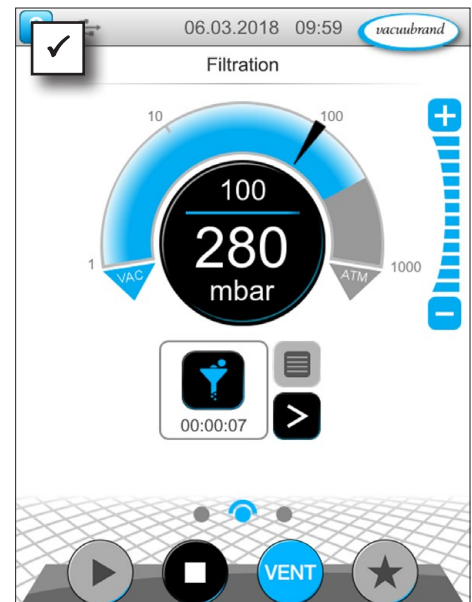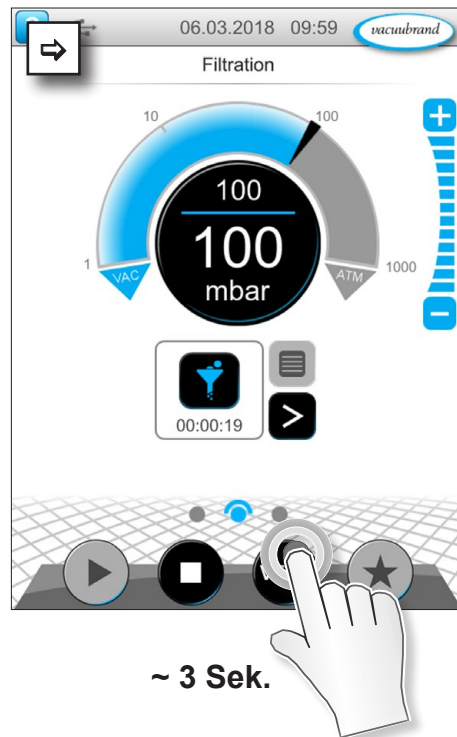



- ✓ Vakuumregelung stoppt.
- ✓ Druckanstieg bis Atmosphärendruck.

### 6.1.4 Anwendung stoppen

Anwendung stoppen



tippen,  
antippen

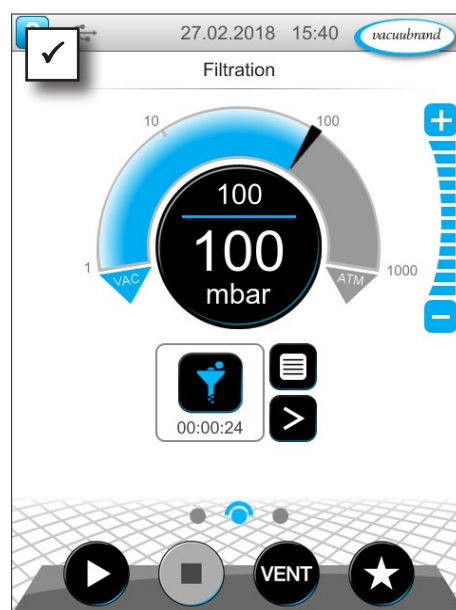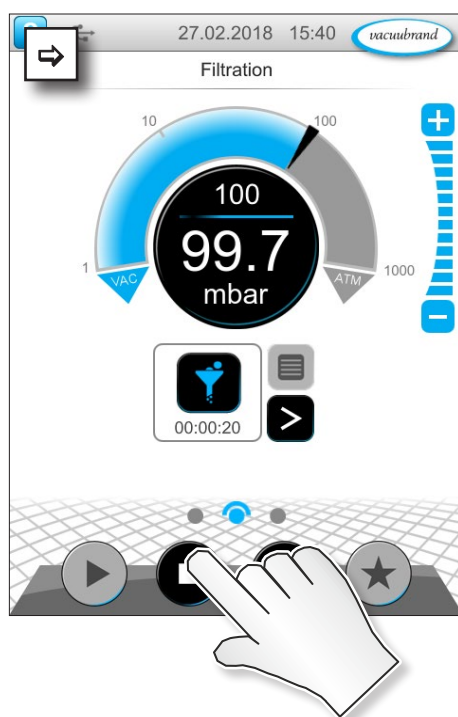


☒ Vakuumregelung stoppt.

## 6.2 Anwendungsparameter (Parameterliste)


In der Parameterliste können Sie vor und während dem Betrieb verschiedene, prozessbezogene Werte individuell ändern und anpassen.

### Parameter anpassen

→ Beispiel  
*Drehzahl* anpassen

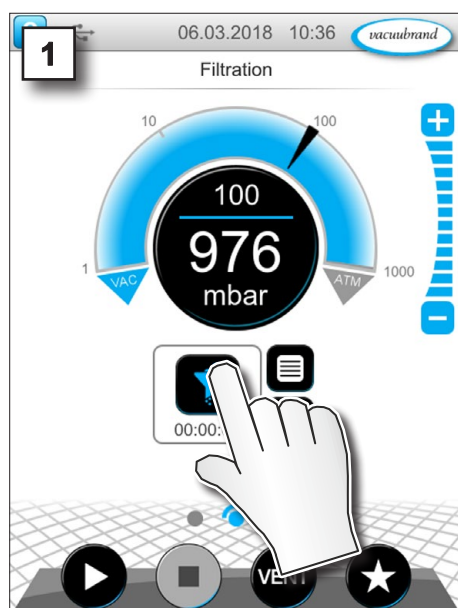

1. Parameterliste aufrufen.

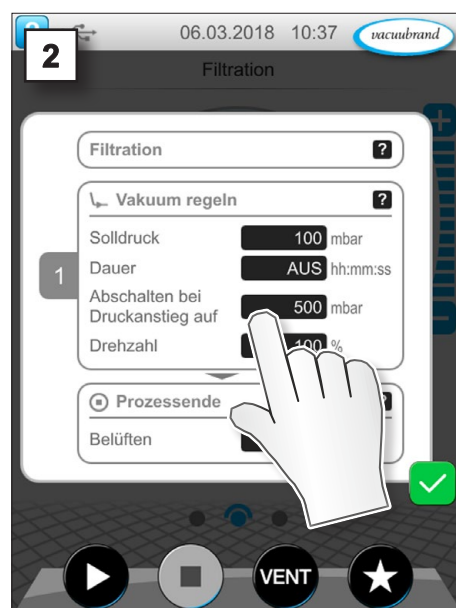


2. Gewünschtes Eingabefeld antippen.

→ Beispiel  
Parameter *Drehzahl*  
anpassen



3. Im Pop-up die gewünschte Drehzahl eingeben.

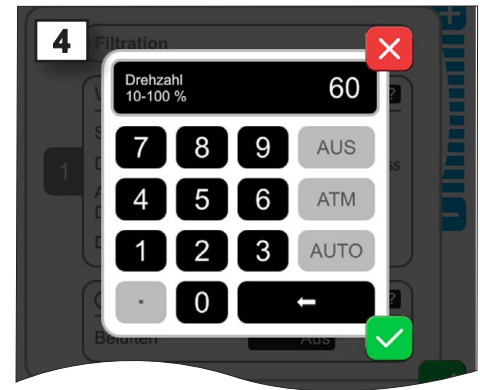

4. Eingabe bestätigen.




abbrechen




bestätigen



tippen,  
antippen

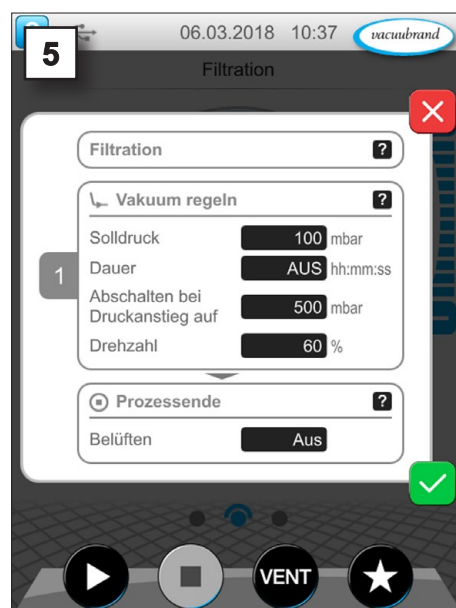

5. Änderung in der Parameterliste bestätigen.

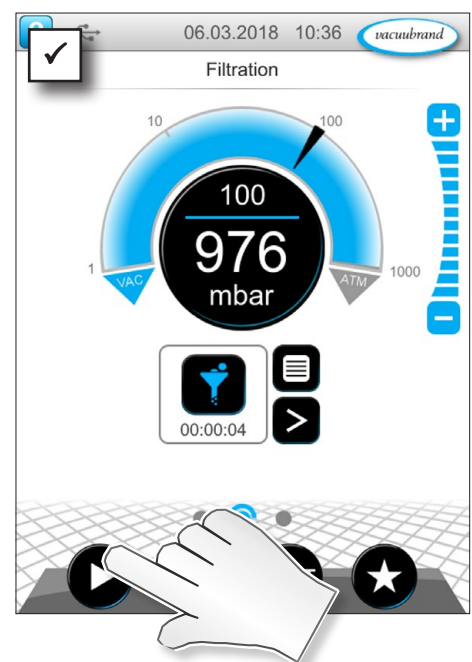

☑ Nach Start der Anwendung, läuft der Motor mit angepasster Drehzahl.

→ Beispiel  
Ansicht Parameter  
*Drehzahl* bei Betrieb



⇒ Sie können in der Parameterliste jederzeit individuelle Anpassungen für Ihren Prozess vornehmen.



## 6.3 Grafischer Druckverlauf

Auf der gleichen Ebene wie die Prozessanzeige befindet sich der *Grafische Druckverlauf*. Das Menü zeigt Druckkurven gemessener Vakuumwerte. Die Messkurve erlischt erst beim nächsten Start einer Anwendung und wird dann neu aufgezeichnet.

### Druckverlauf aufrufen


→ Beispiel  
Grafischer Druckverlauf aufrufen



nach  
links  
wischen




⇒ Anzeige nach links Wischen.

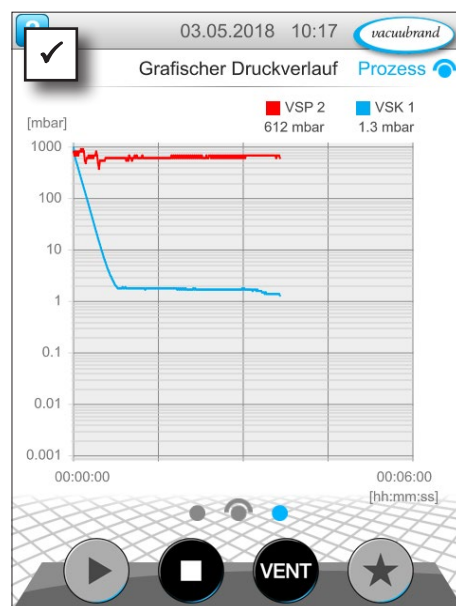

- ✓ Anzeige Grafischer Druckverlauf.
- ✓ Messkurven angeschlossener Vakuumsensoren.

### Anzeige Grafischer Druckverlauf

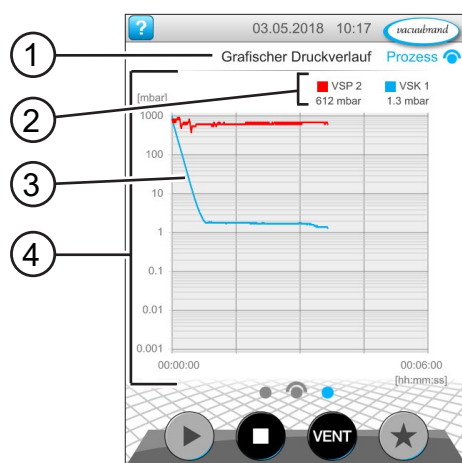

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | Menüname                        |
| 2 | Farblegende<br>Vakuumsensor(en) |
| 3 | Messkurve(n)                    |
| 4 | Druck-Zeit-Diagramm             |

■ VSK1    ■ VSK1  
■ VSP2    ■ VSP2

⇒ Tippen Sie auf die Farblegende eines Vakuumsensors, so können Sie Messkurven einzeln ein- und ausblenden.

## 6.4 Hauptmenü


Auf der gleichen Ebene wie die Prozessanzeige befindet sich das *Hauptmenü*. Ausgehend vom Hauptmenü gelangen Sie zu den Untermenüs des Controllers.

### Hauptmenü aufrufen


→ Beispiel  
Hauptmenü aufrufen



nach  
rechts  
wischen

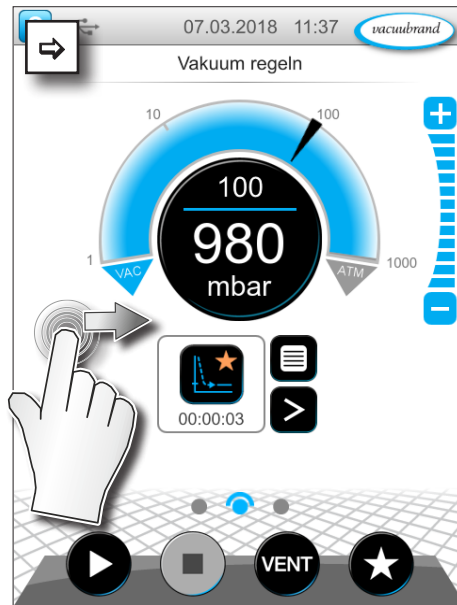


⇒ Anzeige nach rechts wischen.

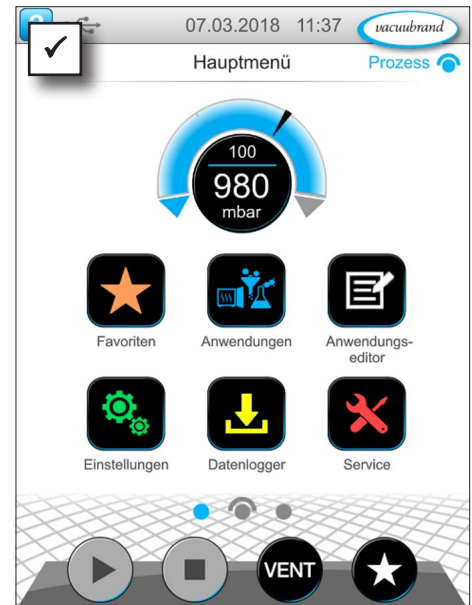

☒ Anzeige Hauptmenü.

### Anzeige Hauptmenü

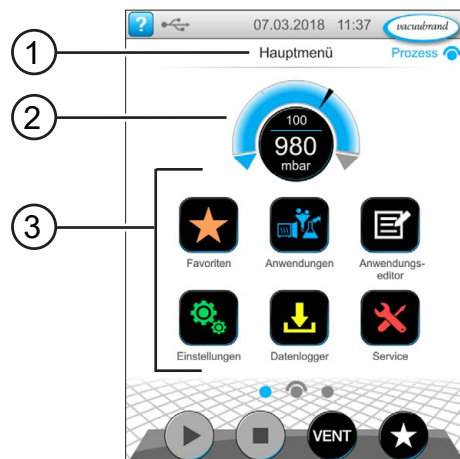

- |   |                      |
|---|----------------------|
| 1 | Menüname             |
| 2 | Druckanzeige         |
| 3 | Übersicht Untermenüs |

Die Funktion der jeweiligen Untermenüs geht aus den Icons und der zugehörigen Beschriftung hervor.

→ siehe auch Kapitel: 7.1 *Erweiterte Bedienung*

## 6.4.1 Anwendungen





In diesem Menü sind alle Anwendungen gelistet: Basisanwendungen, Favoriten und neu erstellte Anwendungen.

### Anwendungsmenü aufrufen

Untermenü  
Anwendungen  
aufrufen



tippen,  
antippen

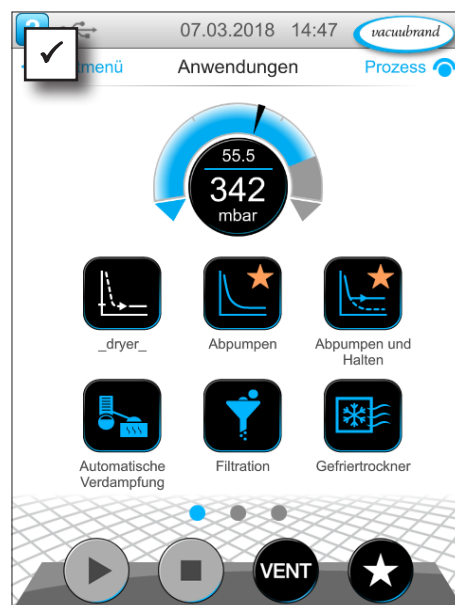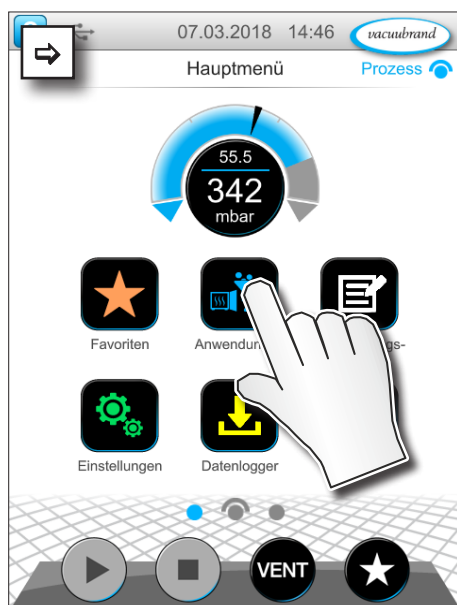


☒ Anzeige Untermenü  
Anwendungen.

### Kontextmenü anzeigen

→ Beispiel  
Kontextmenü zu  
Anwendungen  
aufrufen



gedrückt  
halten

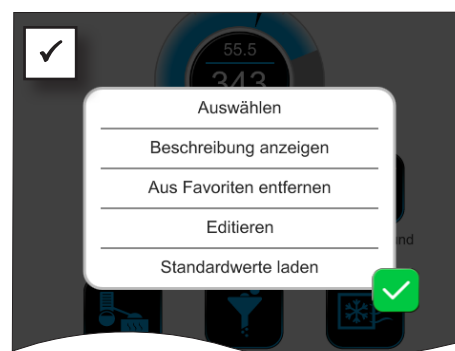

☒ Kontextmenü erscheint.

⇒ Wählen Sie im Kontextmenü die benötigte Funktion.



Sie möchten Ihre Anwendungen auf einen anderen VACUU·SELECT übertragen?

⇒ Nutzen Sie ganz einfach die Exportfunktion, beschrieben in Kapitel: **7.1.9 Administration/Import-Export**



## 6.4.2 Favoriten



Anwendungen, die als Favoriten angelegt sind, erhalten zur Kennzeichnung einen Stern auf der Schaltfläche.

### Favoriten anlegen

→ Beispiel  
Favoriten anlegen




gedrückt  
halten




tippen,  
antippen



bestätigen

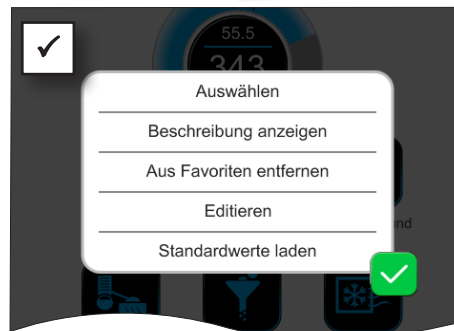

- ☒ Text im Kontextmenü geändert.

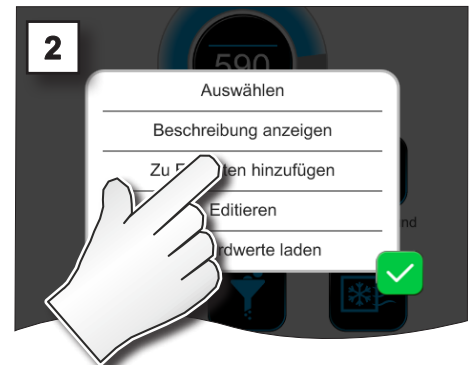

- ☒ Schaltfläche mit Favoritenkennzeichnung.
- ☒ Anwendung im Favoritenmenü gelistet.

### Favoriten entfernen

→ Beispiel  
Favoriten entfernen



- ⇒ Rufen Sie das Kontextmenü auf.
- ⇒ Tippen Sie auf: *Aus Favoriten entfernen* und bestätigen Sie die Aktion.



- ☒ Schaltfläche ohne Favoritenkennzeichnung.
- ☒ Anwendung aus Favoritenmenü entfernt.

## 7 Hauptmenü

### 7.1 Erweiterte Bedienung

#### 7.1.1 Anwendungseditor



Im Anwendungseditor können Sie im Baukastenprinzip Ihre eigene Anwendung zusammenstellen und unter einem passenden Namen im Controller speichern.

Bestehende Anwendungen können, als Vorlage genutzt, ebenfalls mit dem Anwendungseditor bearbeitet und unter einem neuen Namen gespeichert werden.



Bei umfangreichen Anwendungen lässt sich die Übersicht der Prozessschritte scrollen.

#### Anwendungseditor aufrufen


→ Beispiel  
Anwendungseditor  
aufrufen



tippen,  
antippen

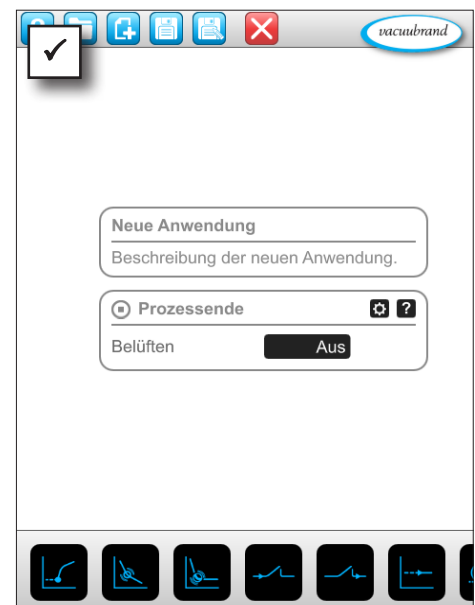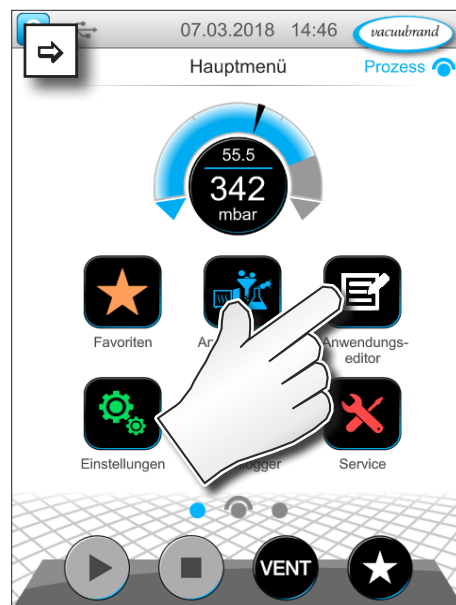


## Anzeige Anwendungseditor

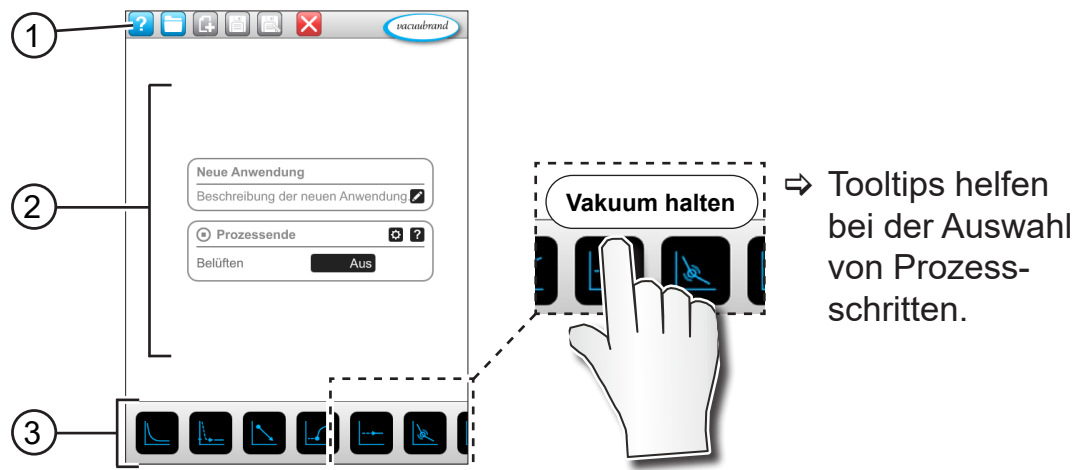

- 1 Menüleiste
- 2 Übersicht der Prozessschritte
- 3 Scrollbarer Baukasten mit einzelnen Prozessschritten zur Auswahl.

## 7.1.2 Menüleiste und Beschreibung


### Menüleiste

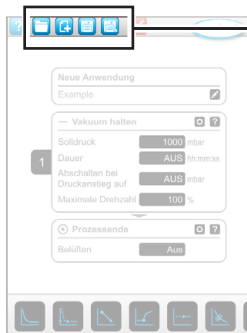

→ Beispiel Anwendungseditor

| Tasten Icon |          | Bedeutung  |
|-------------|----------|--|
| aktiv       | gesperrt |  |
|             |          | <b>Anwendungsvorlagen</b><br>► Aus einer Reihe vorhandener Anwendungen eine Anwendung zur Bearbeitung aussuchen. |
|             |          | <b>Neu</b><br>► Neue Anwendung anlegen.  |
|             |          | <b>Speichern</b><br>► Anwendung speichern.   |
|             |          | <b>Speichern unter</b><br>► Name der Anwendung.  |

## Beschreibung der Anwendung

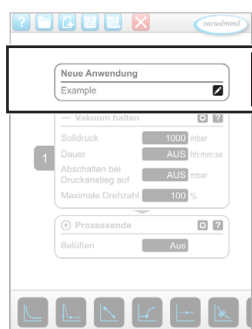

→ Beispiel  
Anwendungs-  
editor

Neue Anwendung

Beschreibung der neuen Anwendung

**Neue Anwendung**, dieser Name wird automatisch geändert, sobald Sie Ihrer Anwendung mit *Speichern unter* einen passenden Namen geben.

**Beschreibung der neuen Anwendung**, hier können Sie eine kurze Beschreibung für Ihre Anwendung eintragen. Diese Beschreibung erscheint später in der Parameterliste. Eigene Beschreibungen werden nur in der Sprache des Erstellers angezeigt.


⇒ Öffnen Sie das Kontextmenü zur Eingabe einer Beschreibung durch Antippen der Taste:

### 7.1.3 Übersicht Prozessschritte

Einzelne Prozessschritte lassen sich durch Ziehen und Ablegen (Drag-and-Drop) einfügen oder entfernen. Wird ein Prozessschritt auf die Editorfläche gezogen ändert sich die Darstellung. Der Prozessschritt wird als nummerierte Prozessschrittkartusche dargestellt.

### Bedeutung Prozessschrittkartusche(n)

→ Beispiel  
Prozessschritt-  
kartuschen

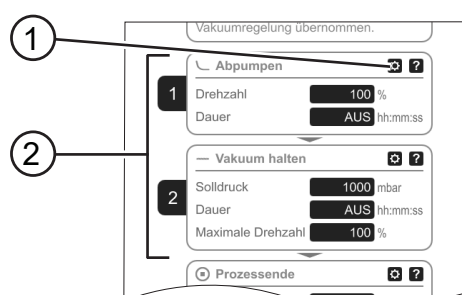

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Prozessschrittkonfiguration          |
| 2 | Prozessschrittkartusche, nummeriert. |




Mit der **Prozessschrittkonfiguration** legen Sie fest welche Parameter später in der Parameterliste angezeigt werden und zur Bearbeitung freigegeben sind.

Jede **Prozessschrittkartusche** stellt einen Prozessschritt dar. Durch gedrückt halten und schieben der Nummerierung sind Prozessschrittkartuschen beliebig platzierbar.

Als optisches Element für die Platzierung einer Prozessschrittkartusche erscheint ein **blauer Balken** an der Stelle, an der eine Platzierung möglich ist.

Die **Nummerierung** der Prozessschrittkartuschen erfolgt von oben nach unten, von 1 bis n. Wird eine Prozessschrittkartusche neu eingefügt, verschoben oder entfernt, passt sich die Nummerierung automatisch an.

#### 7.1.4 Prozessende

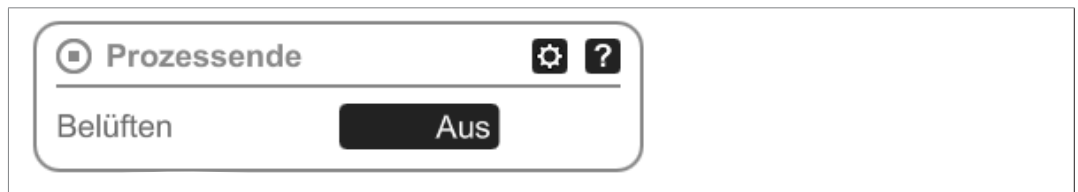

**Prozessende** bedeutet das definierte Ende einer Anwendung. Prozessschritte können nur davor platziert werden.

## 7.1.5 Anwendung editieren

### Neue Anwendung anlegen

→ Beispiel  
Neue Anwendung  
anlegen



tippen,  
antippen



gedrückt  
halten und  
ziehen



loslassen








speichern  
unter



bestätigen



Menü  
verlassen

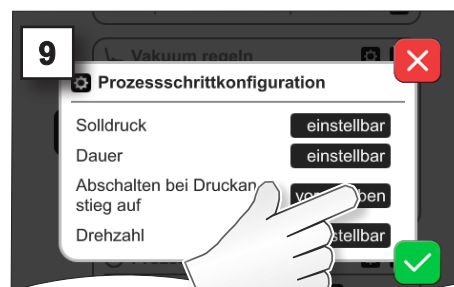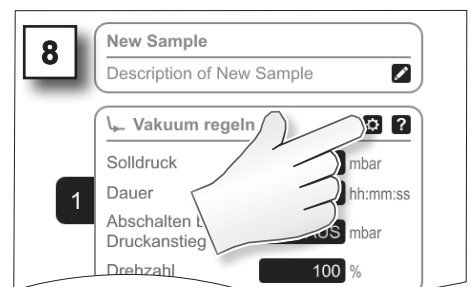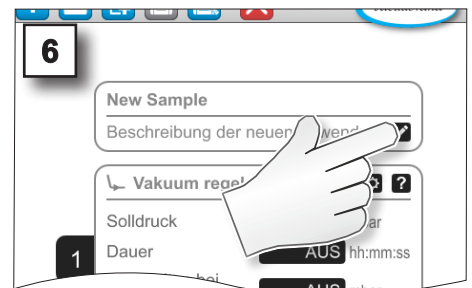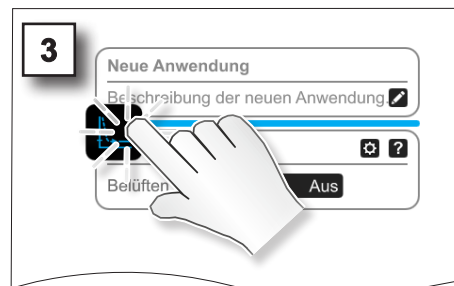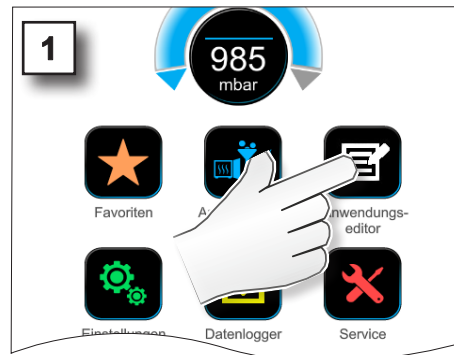

→ Beispiel  
Neue Anwendung  
bearbeiten



tippen,  
antippen



gedrückt  
halten







speichern



bestätigen



Menü  
verlassen

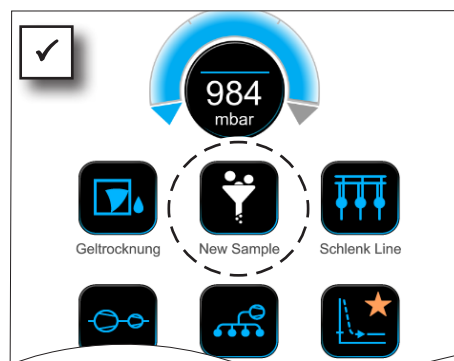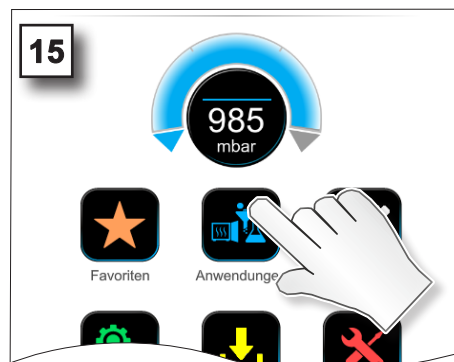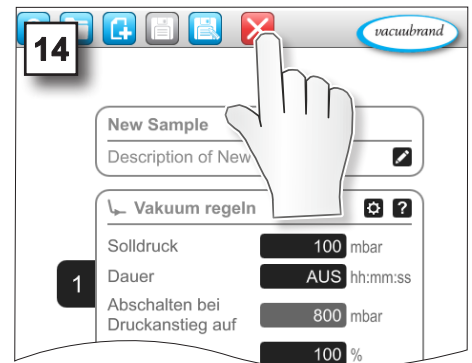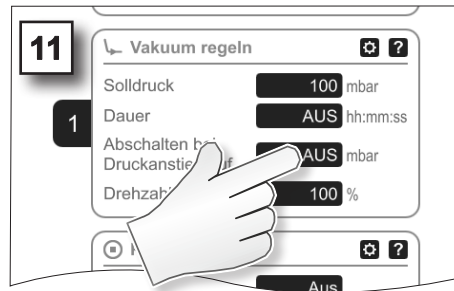

☑ Neue Anwendung mit weißem Symbol im Untermenü Anwendungen gelistet.



## 7.1.6 Prozessschritt entfernen

### Anwendung ändern

→ Beispiel  
Bestehende  
Anwendung  
editieren



gedrückt  
halten



tippen,  
antippen



gedrückt  
halten und  
ziehen









loslassen



speichern



Menü  
verlassen

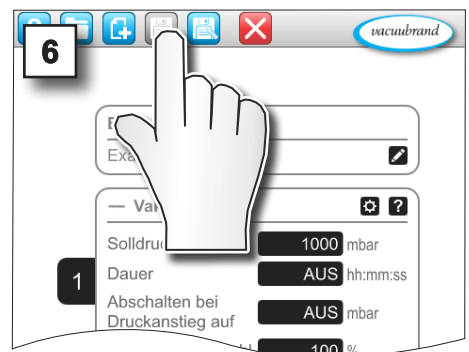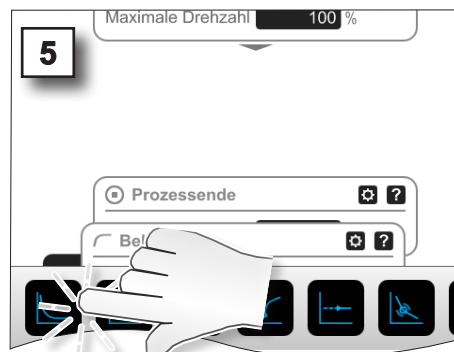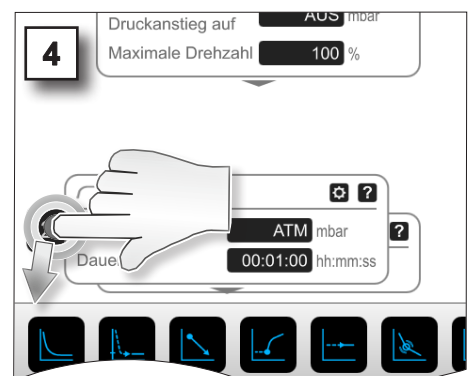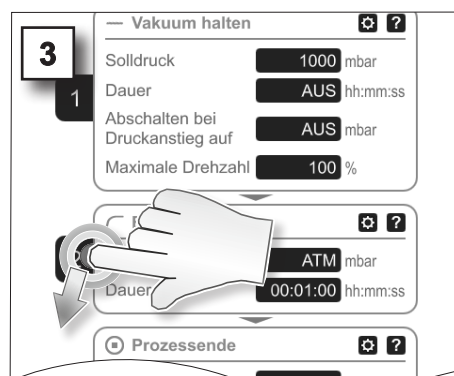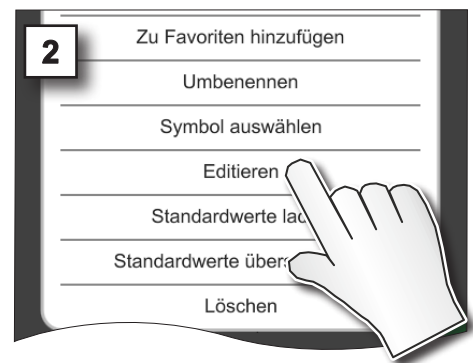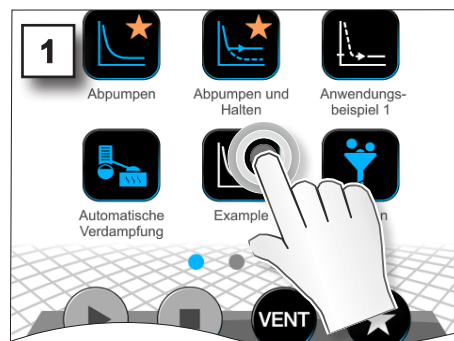

- ☒ In der Parameterliste der Anwendung wird der entfernte Prozessschritt nicht mehr angezeigt.



### 7.1.7 Einstellungen




In diesem Untermenü können Sie die Displayanzeige anpassen, auf eine andere Sprache umschalten sowie Voreinstellungen für angeschlossene VACUU-BUS-Peripherie vornehmen.

#### Untermenü Einstellungen aufrufen

→ Beispiel  
Hauptmenü \  
Einstellungen \  
Grundeinstellungen




tippen,  
antippen

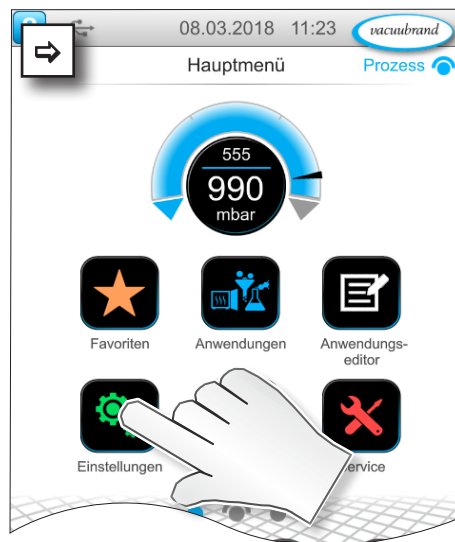


#### Bedeutung der Kontextmenüs


→ Beispiel  
Übersicht  
Kontextmenüs  
Einstellungen

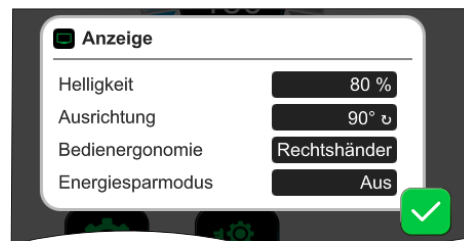

Unter **Anzeige** können Voreinstellungen für die Anzeige des Bildschirms vorgenommen werden.

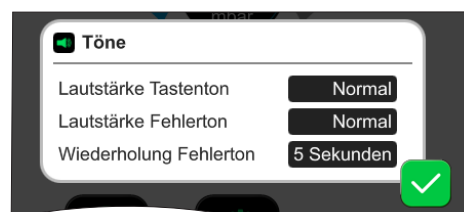

Unter **Töne** lässt sich die Lautstärke der Signaltöne für Warnung und Haptik einstellen oder ausschalten.

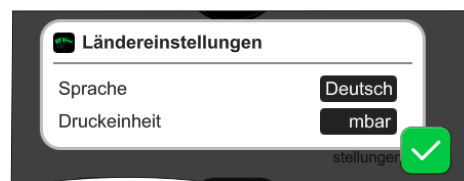

In den **Ländereinstellungen** können Sprache und Druckeinheit eingestellt werden.




abbrechen



bestätigen

→ Beispiel  
Übersicht  
Kontextmenüs  
Einstellungen

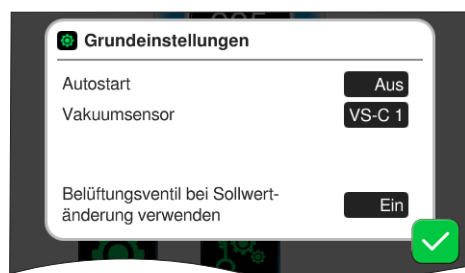

In den **Grundeinstellungen** können Sie Voreinstellungen für Ihren Prozess festlegen. Der Vakuumsensor, welcher den Istdruck misst, wird hier angezeigt.

## Bedeutung Grundeinstellungen

Übersicht möglicher  
Grundeinstellungen

| Funktion  | Einstellung     | Bedeutung   |
|---|-----------------|---|
| Autostart                                       | Aus / Ein       | Aus: Der Controller bleibt mit Einschalten der Spannungsversorgung auf Stopp.<br>Ein: Eine gestartete Anwendung wird nach Wegfallen der Spannungsversorgung (Ausschalten oder Ausfall) und anschließend Einschalten fortgesetzt. Empfohlen, z. B. wenn mit externem Schalter im Labormöbel die zuvor laufende Regelung gestartet werden soll. |
| Vakuumsensor                                    | VS-C _ / VS-P _ | Auswahl des Vakuumsensors für die Regelung, sofern mehrere angeschlossen sind. VS-C _: Grobvakuum, VS-P _: Feinvakuum   |
| Belüftungsventil bei Sollwertänderung verwenden | Aus / Ein       | Aus : Belüftungsventil schaltet nicht bei Sollwertänderung.<br>Ein: Belüftungsventil schaltet falls erforderlich zur Sollwertanpassung.   |
| Nachlaufzeit<br>Kühlwasserventil(e)*            | Aus / hh:mm:ss  | Zeitvorgabe für Nachlaufzeit von Kühlwasser.  |
| Verzögerungszeit<br>Füllstandssensor(en)*       | Aus / hh:mm:ss  | Verzögerungszeit für das Abschalten nach der Vollmeldung  |

*\*Option: Angezeigt wenn Komponente angeschlossen und erkannt.*

Die verfügbaren Grundeinstellungen passen sich den angeschlossenen VACUU·BUS-Komponenten an.

### 7.1.8 Einstellungen/Administration





Admin-Bereich des Controllers – nur für Personal mit Berechtigung.

#### Untermenü Administration aufrufen

→ Beispiel  
Hauptmenü \  
Einstellungen \  
Administration




tippen,  
antippen

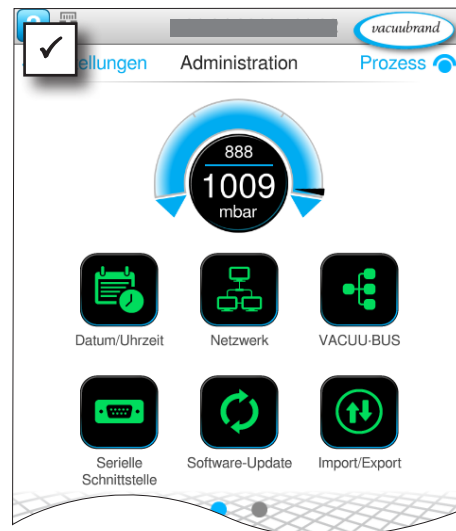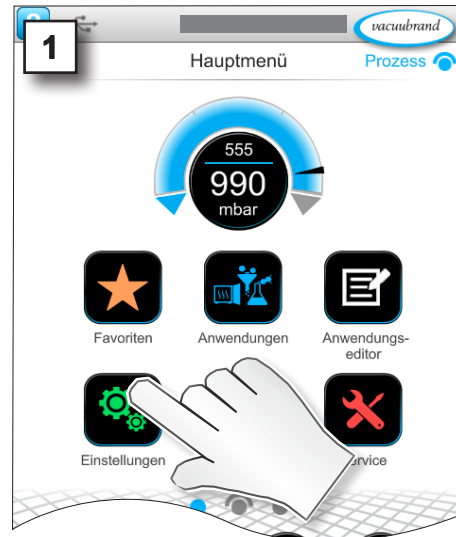


☑ Untermenü mit Schaltflächen zu administrativen Untermenüs.

#### Bedeutung der Kontextmenüs

→ Beispiel  
Übersicht  
Kontextmenüs  
Administration

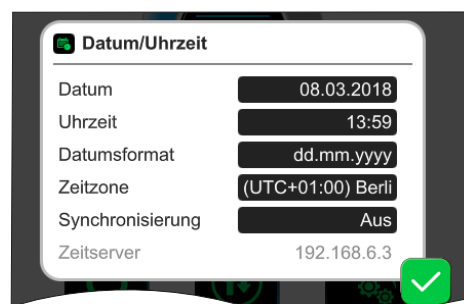


Anpassungen für **Datum und Uhrzeit**.

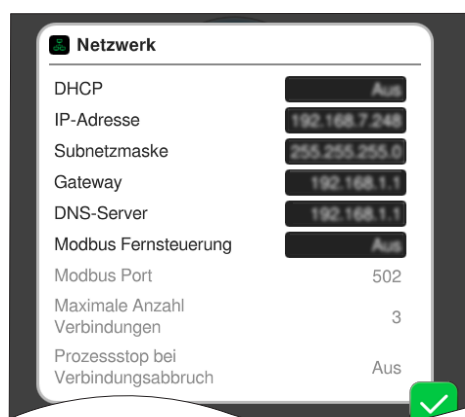


Voreinstellungen zur Einbindung des Controllers in Ihr **Netzwerk**.

Fernsteuerung über Modbus aktivieren/deaktivieren.

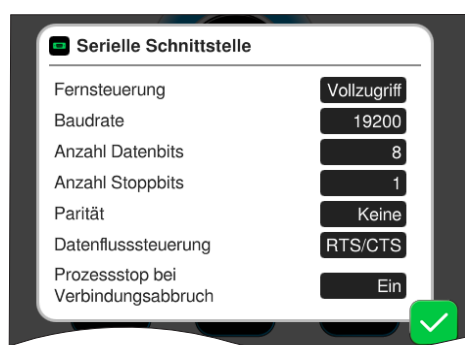

Voreinstellungen für **Serielle Schnittstelle** und Abgleich der Kommunikationseinstellungen (COM) für RS-232.

Fernsteuerung über RS-232 aktivieren/deaktivieren.

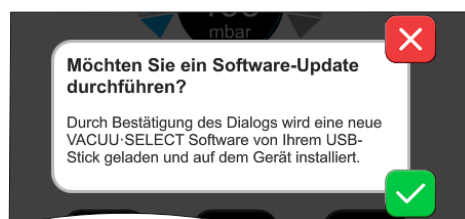

Befehl für **Software-Update** von angeschlossenem USB-Speicher-Stick laden aktivieren.



Controller auf **Werkseinstellungen** zurücksetzen.

## WICHTIG!

Bei Rücksetzen auf Werkseinstellungen werden sämtliche Daten, Einstellungen und Anwendungen gelöscht. Der Datenlogger wird ausgeschaltet und die Aufzeichnung der Diagnosedaten wieder auf *Minimal* gesetzt.

⇒ Sichern Sie Ihre Einstellungen, Anwendungen und Daten, siehe Kapitel: **7.1.9 Administration/Import-Export** und **7.2 Datenlogger**



## 7.1.9 Administration/Import-Export

### Untermenü Import/Export aufrufen

→ Beispiel  
Hauptmenü \  
Einstellungen \  
Administration \  
Import/Export



tippen,  
antippen

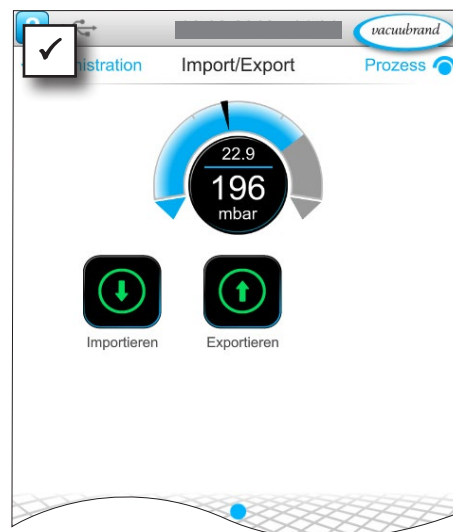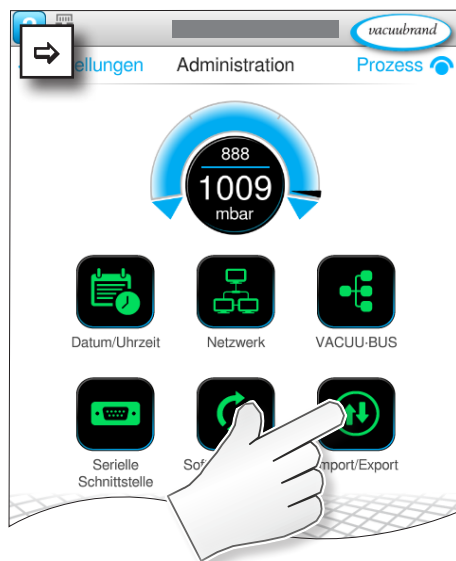

### Bedeutung der Kontextmenüs

→ Beispiel  
Übersicht  
Kontextmenüs  
Import/Export



abbrechen




bestätigen



Die **Exportfunktion** können Sie nutzen um Daten, wie z. B. angelegte Anwendungen auf andere Controller via USB-Speicher-Stick zu übertragen.



Den Datenexport können Sie durch Tippen auf das Eingabefeld gezielt vorgeben: **Vollständig**, **Einstellungen** oder **Anwendungen**.

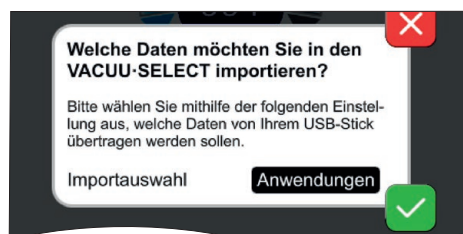

Die **Importfunktion** können Sie nutzen um Daten von einem anderen, externen Controller auf diesen zu übertragen.

## 7.1.10 Administration/VACUU-BUS




Das Untermenü VACUU-BUS vereinfacht die Erkennung und die Verwaltung von VACUU-BUS-Komponenten.

### Untermenü VACUU-BUS aufrufen

→ Beispiel  
Hauptmenü \  
Einstellungen \  
Administration \  
VACUU-BUS



tippen,  
antippen

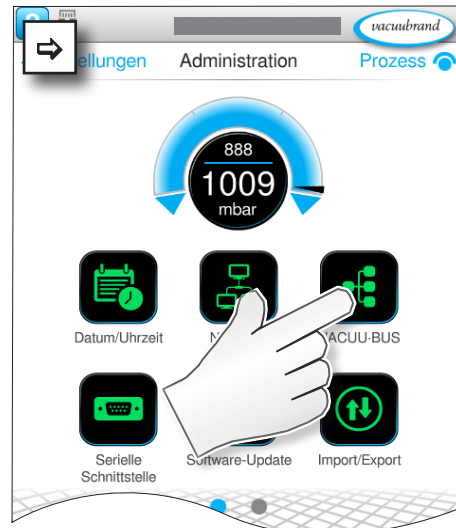

Die angezeigten Schaltflächen rufen Kontextmenüs auf. Durch die Kontextmenüs wird die Bedienung von Voreinstellungen für VACUU-BUS-Komponenten erleichtert, z. B. Adresskonfiguration, Erkennung angeschlossener Komponenten. In diesem Untermenü lässt sich außerdem der Abgleich von Vakuum Sensoren und Füllstandssensoren durchführen.

### Bedeutung der Kontextmenüs


Übersicht  
Kontextmenüs  
VACUU-BUS



abbrechen



bestätigen

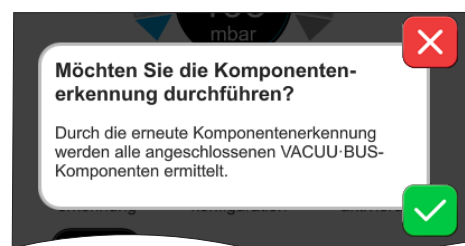

#### Die Komponentenerkennung

scannt alle angeschlossenen Komponenten und aktualisiert die Liste der angeschlossenen VACUU-BUS-Peripherie im Controller.

Beispiel: Wird ein Füllstandssensor entfernt und die Komponentenerkennung ausgeführt, ist der Füllstandssensor danach nicht mehr in der Komponentenkonfiguration gelistet.




Mit der **Komponentenkonfiguration** lassen sich auf einfache Weise die Adressen angeschlossener Komponenten ändern oder neu zuweisen.



Mit der **Komponentenaktivierung** lassen sich angeschlossene VACUU·BUS-Komponenten einzeln aktivieren oder deaktivieren, d. h. die Komponenten können angeschlossen bleiben, werden aber für den laufenden Prozess nach Bedarf am Controller ein- oder ausgeschaltet.



Bedienfeld für den **Abgleich** angeschlossener **Vakuumsensoren** bei Umgebungsdruck und unter Vakuum.

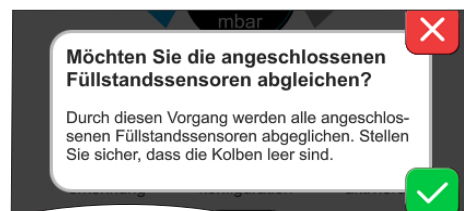

OPTION  
Bedienfeld für den Abgleich angeschlossener **Füllstandssensoren**.



### 7.1.11 Administration/Funktionserweiterungen



Das Untermenü **Funktionserweiterungen** ist für die Freischaltung weiterer Funktionen vorgesehen. Zur Freischaltung benötigen Sie einen USB-Stick mit einer gültigen Lizenzdatei oder einen Lizenzcode zur Eingabe über die Bildschirmtastatur.

#### Untermenü Funktionserweiterungen aufrufen

→ Beispiel  
Hauptmenü \  
Einstellungen \  
Administration \  
Funktionserweiterungen



antippen  
und in die  
angezeigte  
Richtung  
wischen



tippen,  
antippen



Übersicht  
Kontextmenüs  
VACUU-BUS



abbrechen



bestätigen

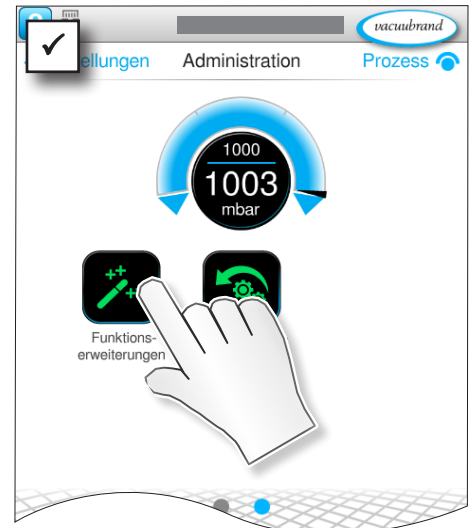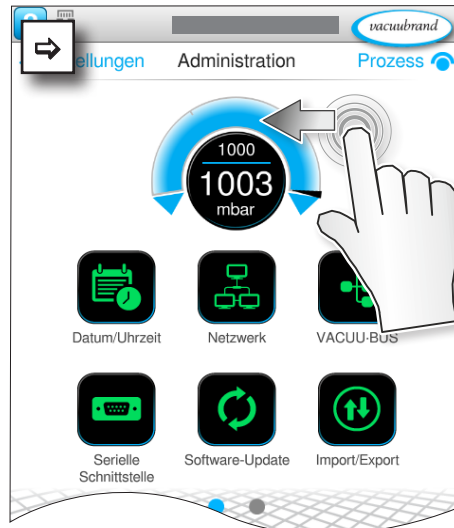

#### Bedeutung der Kontextmenüs



**Informationen zur Freischaltung** zeigt Ihnen die Kontaktdaten und die Angaben, die Sie für Ihr Gerät benötigen an. Für die Bestellung einer Lizenz zur Freischaltung von weiteren Funktionen, bitte immer die Seriennummer und das Herstellungsdatum Ihres Geräts angeben.

#### Funktionsfreischaltung

Verfügen Sie über einen gültige Lizenz, folgen Sie bitte der Benutzerführung, die erscheint, sobald Sie den USB-Stick mit der Lizenzdatei eingesteckt haben. Alternativ können Sie den Lizenzcode per Bildschirmtastatur eingeben.



<https://www.vacuubrand.com/20901536>



## 7.2 Datenlogger




Ist die Funktion eingeschaltet, zeichnet der Datenlogger Zeit-Druckverläufe auf und speichert diese in einem vorgegebenen Intervall, für eine Laufzeit von bis zu 30 Tagen. Für jeden Prozess wird eine separate Datei gespeichert, von Start bis Stop.

### Untermenü Datenlogger aufrufen

→ Beispiel  
Hauptmenü \  
Datenlogger



tippen,  
antippen

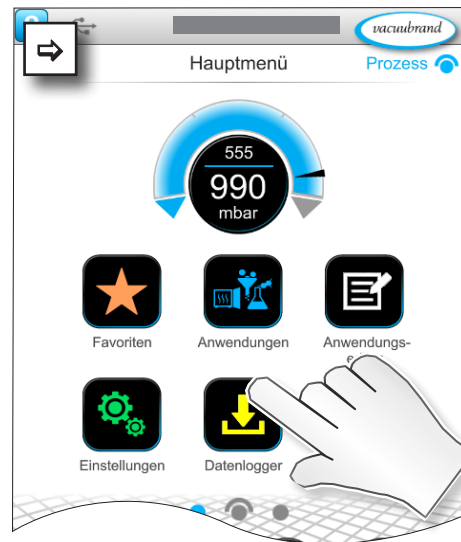

### Bedeutung der Kontextmenüs


Übersicht  
Kontextmenüs  
Datenlogger




abbrechen



bestätigen

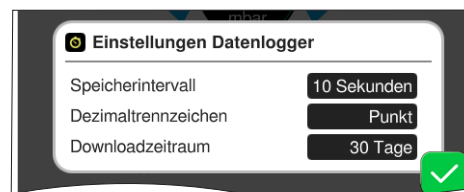

In den **Einstellungen Datenlogger** können das Speicherintervall, Dezimaltrennzeichen und der Downloadzeitraum ausgewählt werden. Unter *Speicherintervall* lässt sich das Logging ausschalten.

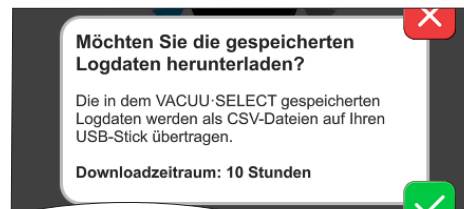

Ist ein USB-Speicherstick angeschlossen, lassen sich hier die **Logdaten** für den voreingestellten Zeitraum herunterladen.



Mit laden der Werkseinstellungen werden alle Einstellungen des Datenloggers zurückgesetzt, Logging ausgeschaltet und alle aufgezeichneten Daten gelöscht.

## 7.3 Service



In diesem Menü können Sie sich Informationen zum Gerät anzeigen lassen oder herunterladen. Im Fehlerfall sollten Sie diese Informationen an unseren Service weitergeben.



### 7.3.1 Serviceinformationen

#### Untermenü Service aufrufen

→ Beispiel  
Hauptmenü \  
Service



tippen,  
antippen

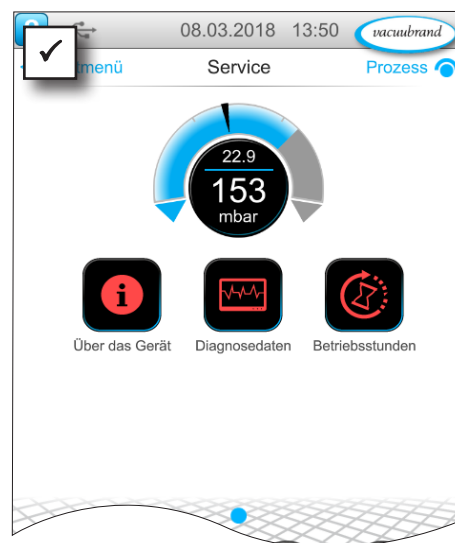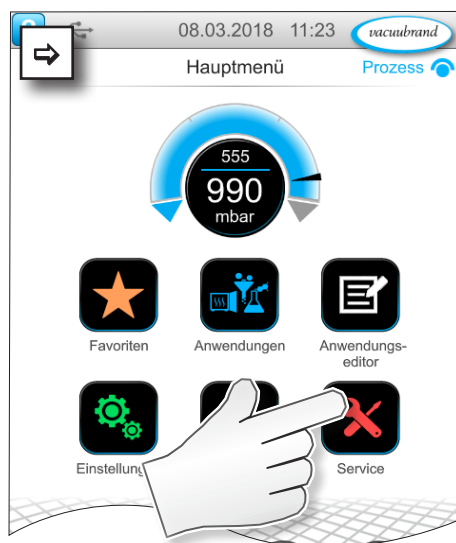

#### Bedeutung der Kontextmenüs


Übersicht  
Kontextmenüs  
Datenlogger



abbrechen



bestätigen

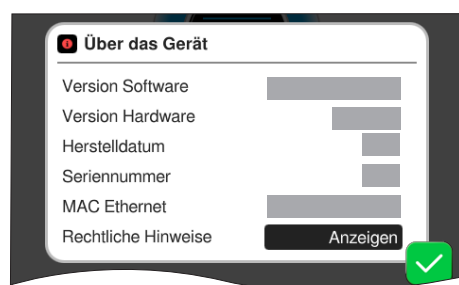

In diesem Menü werden Informationen **Über das Gerät** angezeigt.  
Die *Rechtlichen Hinweise* enthalten Lizenzinformationen.



Zähler **Betriebsstunden** mit aktivierbarem Wartungsassistenten.

Aus: Keine Erinnerungsmeldung.  
Ein: Erinnerungsmeldung für Wartung nach abgelaufenen Betriebsstunden.

### 7.3.2 Diagnosedaten





Zur besseren Diagnose des Gerätezustands im Fehler- oder Servicefall werden Diagnosedaten auf dem Gerät gespeichert. Die Daten können über das Service-Menü auf einen USB-Speicherstick heruntergeladen und zur Auswertung an unseren [Kundenservice](#) geschickt werden.

#### Untermenü aufrufen

→ Beispiel  
Hauptmenü \  
Service \  
Diagnosedaten



tippen,  
antippen

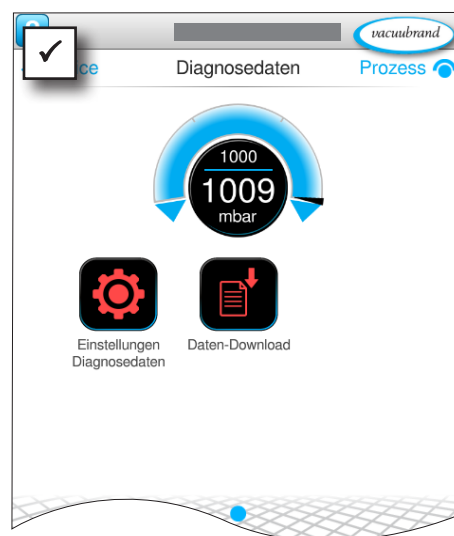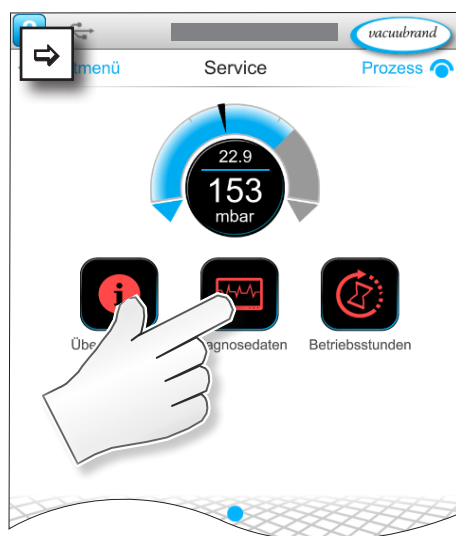

#### Bedeutung der Kontextmenüs


Übersicht  
Kontextmenüs  
Diagnosedaten



abbrechen



bestätigen

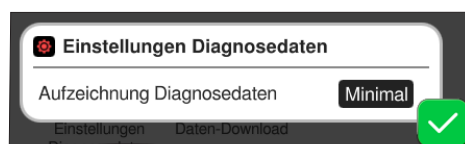

- In den **Einstellungen Diagnosedaten** kann die Art der Aufzeichnung angepasst werden.
- ▶ **Minimal:** Aufzeichnung Gerätedaten, Komponentenfehler, ohne Überdruck- und Vollmeldung.
  - ▶ **Vollständig:** Wie Minimal plus Benutzereingabe von Parametern, Änderung von Einstellungen.



Ist ein USB-Speicherstick angeschlossen, lassen sich hier die **Diagnosedaten** herunterladen.

## 8 Fehlerbehebung

Technische  
Hilfestellung


Nutzen Sie zur Fehlersuche und -beseitigung die Tabelle **Fehler – Ursache – Beseitigung**.

Für technische Hilfestellung oder bei Störungen nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrem Fachhändler oder unserem [Service](#)<sup>1</sup> auf.

### 8.1 Störmeldungen


Störungen werden vom Controller sofort als Klartext in einer Pop-up-Meldung ausgegeben. Die Statuszeile zeigt optisch den Grad der Störung. Zusätzlich ertönt ein akustisches Signal solange die Störung ansteht.

→ Beispiel  
Störmelde-Pop-up



|   |   |
|---|---|
|  <b>Fehler und Warnungen</b> | Pop-up-Meldung                            |
| LEVEL-S 1 Füllstand erreicht [0x04c]  | Fehlerquelle,<br>Beschreibung, Fehler-Nr. |

#### 8.1.1 Störungsanzeige
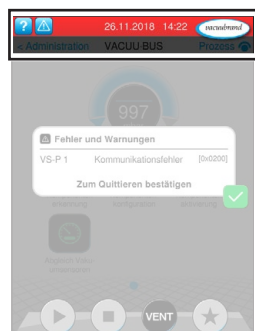
##### Störungsanzeige




→ Beispiel  
Störung

| Symbol  | Bedeutung   |
|---|---|
|  | <b>Störungsanzeige</b><br>▶ Anzeige bei Störung oder Warnung.<br>▶ Antippen zur Textanzeige und Störungsquittierung.  |
| Farbe   | Bedeutung   |
| <b>Gelb</b>   | <b>Warnung</b><br>▶ Zeigt an, dass ein Fehler ansteht, Prozess läuft weiter.<br>▶ Warnungen werden nach Beseitigung automatisch zurück gesetzt.                                 |
| <b>Rot</b>  | <b>Störung</b><br>▶ Zeigt an, dass ein Fehler ansteht, Prozess stoppt.<br>▶ Erst nach Störungsbeseitigung und Quittieren der Störmeldung lässt sich der Prozess wieder starten. |
| Ton   | Bedeutung   |
|  | <b>Warnung oder Störung</b><br>▶ Zeigt an, dass Störung oder Warnung anliegt.<br>▶ Aktiv, solange Fehlerzustand besteht.  |

## 8.1.2 Störmeldung quittieren

Störmeldungen müssen nach Störungsbeseitigung quittiert werden.

### Störmeldung aufrufen und quitteren

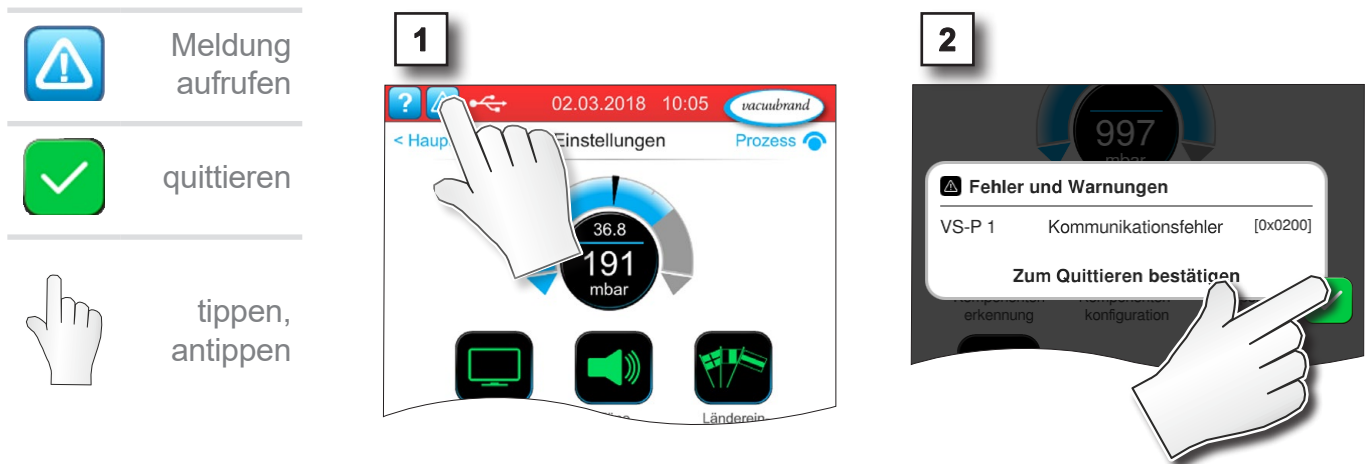

☒ Störmeldung zurückgesetzt.

## 8.2 Fehler – Ursache – Beseitigung

### 8.2.1 Pop-up-Meldung

| Fehler                        | ► mögliche Ursache  | ✓ Beseitigung   | Personal           |
|-------------------------------|---|---|--------------------|
| Kommunikationsfehler          | ► Eine oder mehrere VACUUBUS-Komponenten wurde entfernt.                | ✓ Betreffende VACUUBUS-Komponenten deaktivieren.<br>✓ Komponentenerkennung ausführen. | Fachkraft          |
| Fehler Frequenzumrichter (FU) | ► Adresse falsch konfiguriert.<br>► Temperatur zu hoch.<br>► FU defekt. | ✓ Richtige Adresse konfigurieren.<br>✓ Defekte Bauteile austauschen.                  | verantw. Fachkraft |
| Fehler Ansteuerung            | ► Ventil defekt.  | ✓ Adresse prüfen.<br>✓ Defekte Bauteile austauschen.                                  | Fachkraft          |
| Fehler Pumpe                  | ► VMS-B (Schaltgerät) prüfen.   | ✓ Defektes Gerät einschicken.   | verantw. Fachkraft |
| Fehler Analog-I/O-Modul       | ► Keine Spannungsversorgung.  | ✓ Spannungsversorgung anschließen.  | Fachkraft          |

| Fehler                   | ► mögliche Ursache   | ✓ Beseitigung   | Personal                      |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|
| Sensorbruch              | ► Vakuumsensor defekt.   | ✓ Defekte Komponente einschicken.   | verantw. Fachkraft            |
| Fehler Digital-I/O-Modul | ► Keine Spannungsversorgung an IN von I/O-Modul.<br>► Stecker abgezogen.<br>► An der Anlage ist eine Störung aufgetreten, das I/O-Modul hat die Störung an den Controller weitergegeben. | ✓ Spannungsversorgung anschließen.<br>✓ Steckverbindung prüfen.<br>✓ Ursache für externe Störung beseitigen.  | Fachkraft, verantw. Fachkraft |
| Fehler Peltronic         | ► Umgebungstemperatur zu hoch, Gerät überhitzt.<br>► Sehr hohe Kondensationsleistung.<br>► Gerät defekt.   | ✓ Grund für Überhitzung des Peltronic beseitigen.<br>✓ Defektes Gerät zur Reparatur einschicken.<br>✓ Defektes Gerät austauschen.   | Fachkraft                     |
| Überdruck                | ► Druck zu hoch.<br>► Messbereich überschritten.   | ✓ Warnung quittieren.<br>✓ Ursache für Überdruck beseitigen.  | Bediener, Fachkraft           |
| Underrange               | ► Messbereich unterschritten.<br>► Abgleich Vakuumsensor falsch.   | ✓ Vakuumsensor korrekt abgleichen.  | Fachkraft                     |
| Füllstand erreicht       | ► Vollmeldung eines Füllstandssensors.<br>► Füllstandssensor abgezogen.<br>► Füllstandssensor nicht richtig abgeglichen.<br>► Komponente defekt.   | ✓ Betreffenden Glaskolben oder Behälter leeren.<br>✓ Füllstandssensor anschließen.<br>✓ Bei dauerhafter Entfernung die VACUU-BUS-Komponentenerkennung ausführen.<br>✓ Füllstandssensor neu abgleichen.<br>✓ Defekte Komponente austauschen. | Bediener                      |

## 8.2.2 Fehler allgemein

| Fehler              | ► mögliche Ursache  | ✓ Beseitigung   | Personal |
|---------------------|---|---|----------|
| Display eingefroren | ► Controller in undefiniertem Zustand.<br>► Controller hat sich aufgehängt. | ✓ Neustart des Controllers: ON/OFF-Taste länger als 10 Sekunden gedrückt halten bis Gerät rebootet. | Bediener |

| Fehler                          | ► mögliche Ursache  | ✓ Beseitigung   | Personal           |
|---------------------------------|---|---|--------------------|
| Display aus                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Netzstecker oder Steckernetzteil nicht richtig gesteckt oder abgezogen.</li> <li>► Pumpstand ausgeschaltet.</li> <li>► VACUU·BUS-Steckverbindung oder -verkabelung defekt oder nicht eingesteckt.</li> <li>► Controller ausgeschaltet oder defekt.</li> <li>► Gerätesicherung hat ausgelöst</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Netzanschluss oder Steckernetzteil und Verkabelung kontrollieren.</li> <li>✓ VACUU·BUS-Steckverbindung und -verkabelung zum Controller kontrollieren.</li> <li>✓ Defekte Bauteile austauschen.</li> </ul>                                      | Bediener           |
| Platinensicherung defekt        | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kurzschluss auf der Platine.</li> <li>► Defektes Zubehör angeschlossen.</li> <li>► Stromaufnahme zu hoch.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ursache für den Kurzschluss beseitigen und Platinensicherung erneuern.</li> <li>✓ Einschicken.</li> </ul>  | verantw. Fachkraft |
| Übertragung fehlgeschlagen      | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kein USB-Speicher-Stick angeschlossen.</li> <li>► Nicht genügend Speicherplatz auf dem USB-Speicher-Stick.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ USB-Speicher-Stick mit ausreichend Speicherplatz anschließen.</li> </ul>   | Fachkraft          |
| Belüftungsventil schaltet nicht | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Keine Spannung angelegt.</li> <li>► VACUU·BUS-Steckverbindung oder -verkabelung defekt oder nicht eingesteckt.</li> <li>► Belüftungsventil verschmutzt.</li> <li>► Belüftungsventil im Sensor defekt.</li> <li>► Belüftungsventil deaktiviert</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ VACUU·BUS-Steckverbindung und -verkabelung zum Controller kontrollieren.</li> <li>✓ Belüftungsventil reinigen.</li> <li>✓ Ggf. ein anderes, externes Belüftungsventil nutzen.</li> <li>✓ Belüftungsventil im Controller aktivieren.</li> </ul> | Fachkraft          |
| Keine Bedienung möglich         | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Schnittstelle angeschlossen: Ethernet und/oder RS-232.</li> <li>► Bedienung von externem Terminal.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bedienung von externem Terminal freigeben lassen.</li> <li>✓ Schnittstellenverbindung abziehen.</li> </ul>   | verantw. Fachkraft |
| Keine Lizenzdatei gefunden      | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Kein USB-Stick eingesteckt.</li> <li>► USB-Stick ohne gültige Lizenz eingesteckt.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ USB-Stick mit gültiger Lizenz einstecken.</li> </ul>   | verantw. Fachkraft |



### 8.3 Gerätesicherung

Auf der Platine des Controllers befindet sich eine Gerätesicherung, Typ: Nano-Sicherung 4 A/t. Wurde die Sicherung ausgelöst, kann diese, nach Beseitigung der Ursache und unter ESD-Bedingungen, erneuert werden.

#### HINWEIS


**Beschädigung durch unsachgemäß durchgeführte Arbeiten möglich.**

- ⇒ Lassen Sie Wartungsarbeiten von einer ausgebildeten Elektro-Fachkraft durchführen oder mindestens von einer elektrotechnisch unterwiesenen Person.
- ⇒ Halten Sie für Tätigkeiten an der Platine ESD-Schutzvorkehrungen ein.

#### Gerätesicherung wechseln

**Benötigtes ESD-Werkzeug:** Erdungsarmband, Schlitzschraubendreher, Gr. 1, Torx-Schraubendreher mit Drehmoment TX10, Pinzette.

Gerätesicherung  
wechseln

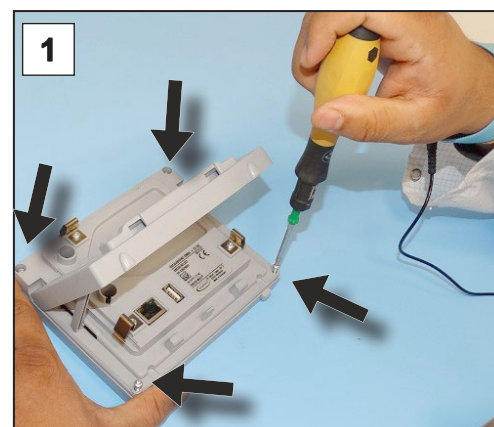


#### Vorbereitung:


- ⇒ Legen Sie das Werkzeug bereit (Beispiel).
- ⇒ Trennen Sie den Controller von der Spannungsversorgung.
- ⇒ Entfernen Sie befestigte Anbauteile, z. B. Sensor, Saugleitungsventil oder Tischgehäuse.

1. Legen Sie den Controller vorsichtig auf das Display und drehen Sie die 4 Gehäuseschrauben heraus.

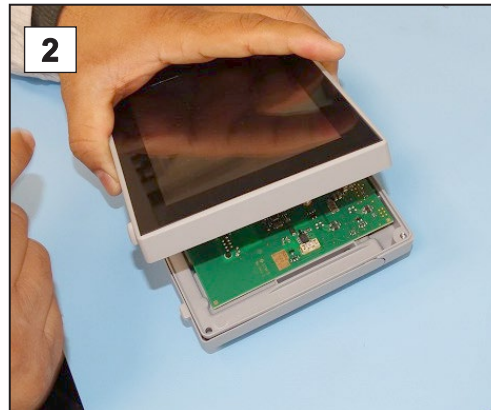


Gerätesicherung  
wechseln


**2.** Heben Sie das Display vorsichtig an.

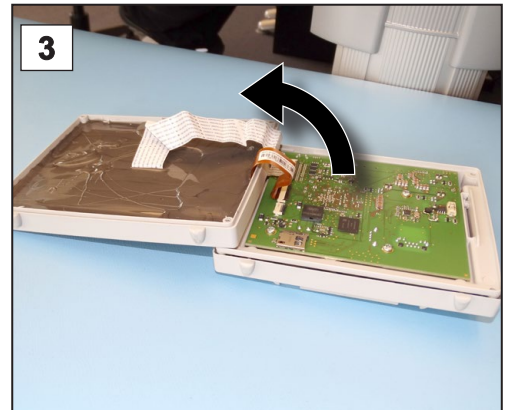


**3.** Klappen Sie das Display vorsichtig auf.

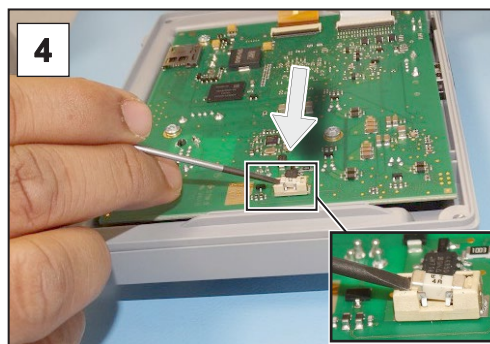


**4.** Hebeln Sie die Sicherung aus dem Sockel.

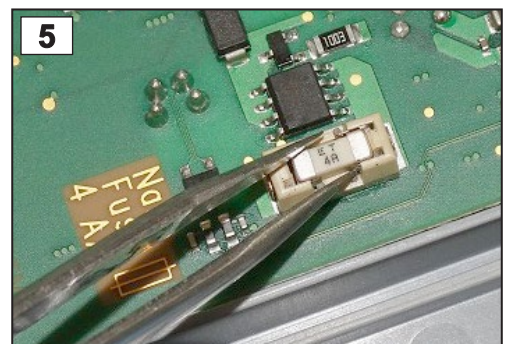

**5.** Setzen Sie die neue Sicherung in den Sockel.

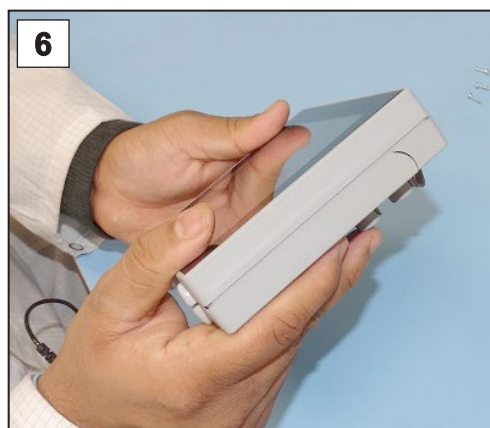

**6.** Schließen Sie das Gehäuse bündig.

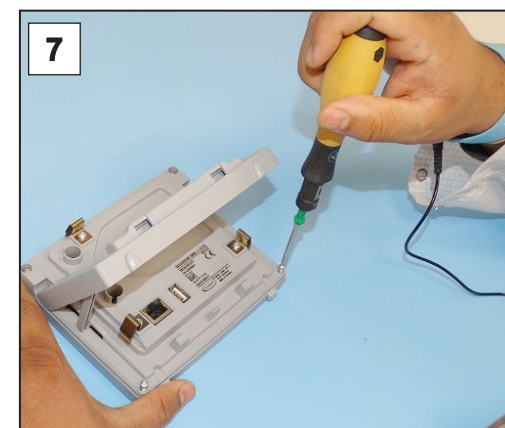

**7.** Drehen Sie die Gehäuseschrauben mit dem Torx-Schraubendreher fest (Drehmoment 1,1 Nm) und befestigen Sie nach Abschluss der Arbeiten die Anbauteile.

## 9 Anhang

### 9.1 Technische Informationen

| Ausführung        |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Vakuum-Controller | <b>VACUU-SELECT Kompakt</b> |
| Softwareversion   | V1.07 / V1.00               |

#### 9.1.1 Technische Daten

Technische Daten

| Umgebungsbedingungen   |                         | (US)                       |
|--|-------------------------|----------------------------|
| Betriebstemperatur   | 10–40 °C                | 50–104 °F                  |
| Lager-/Transporttemperatur   | -10–60 °C               | 14–140 °F                  |
| Aufstellhöhe, maximal  | 2000 m<br>über NHN      | 6562 ft<br>above sea level |
| Schutzart (IEC 60529)  | IP 40                   |                            |
| Schutzart (IEC 60529),<br>Frontseite                                 | IP 41                   |                            |
| Schutzart (UL 50E)   |                         | Type 1                     |
| Schutzart (UL 50E),<br>Frontseite                                    |                         | Type 2                     |
| Schlagenergie  | 1 J                     |                            |
| Luftfeuchte  | 30–85 %, nicht betauend |                            |
| Kondensat oder Verschmutzung durch Staub und Flüssigkeiten vermeiden |                         |                            |

| Elektrische Daten           |                |
|-----------------------------|----------------|
| Nennspannung                | 24 VDC         |
| Leistung Controller         | 1,2 W          |
| Spannungsversorgung über    | VACUU-BUS      |
| Gerätesicherung auf Platine | Nano fuse 4A/t |

| Steckernetzteil                      | 30 W       | 25 W        |
|--------------------------------------|------------|-------------|
| Eingangsspannung                     | 90–264 VAC | 100–240 VAC |
| Frequenz                             | 50–60 Hz   | 50–60 Hz    |
| Stromaufnahme, max.                  | 0,8 A      | 0,7 A       |
| Ausgangsstrom, max.                  | 1,25 A     | 1,05 A      |
| Ausgangsspannung,<br>kurzschlussfest | 24 VDC     | 24 VDC      |

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Kabellänge, circa | 2 m   | 79 in. |
| Abmessung         | 108 mm x 58 mm x 34 mm<br>4.3 in. x 2.3 in. x 1.4 in. |        |

## Technische Daten

|             |  |              |
|-------------|--|--------------|
| Gewicht     | 140–300 g                              | 0.31–0.66 lb |
| Netzstecker | AC, auswechselbar: CEE/CH/UK/US/AUS/CN |              |




| Chemie-Saugleitungsventil     |                             | (US)       |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|
| Versorgungsspannung           | 24 VDC ±10%                 |            |
| Ventilstecker                 | 3-polig auf VACUU·BUS       |            |
| Stromaufnahme, circa          | 0,22 A                      |            |
| Leistung                      | 6 W                         |            |
| Schalzhäufigkeit/Minute, max. | 50                          |            |
| Schaltzustand                 | Schließer                   | NC contact |
| Leckrate                      | 1*10 <sup>-2</sup> mbar l/s |            |
| Betriebsdruck                 | 1,5 bar                     | 1.125 Torr |

| Schnittstellen Controller |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Steckverbinder            | VACUU·BUS                         |
| Ethernet (LAN)            | Patchkabel min. Cat.5e RJ45       |
| USB-Anschluss (1.0–2.0)   | 2x USB-A 2.0, max. 0,5 A pro Port |

| Anschlüsse Controller       |  |
|-----------------------------|--|
| Tischversion, Stativversion | 2x Schlauchwelle DN 6/10 mm                  |
| Einbauversion               | 2x gerade Einschraubverschraubung<br>DN 8/10 |
| Belüftungsventil, Option    | Schlauchwelle DN 4–5 mm                      |

| Gewichte                  |       | (US)    |
|---------------------------|-------|---------|
| Tischversion              | 745 g | 1.64 lb |
| Stativversion             | 590 g | 1.3 lb  |
| Einbauversion             |       |         |
| Steckernetzteil           | 250 g | 0.55 lb |
| VACUU·SELECT Sensor       | 145 g | 0.3 lb  |
| Chemie-Saugleitungsventil | 210 g | 0.46 lb |

## Abmessungen

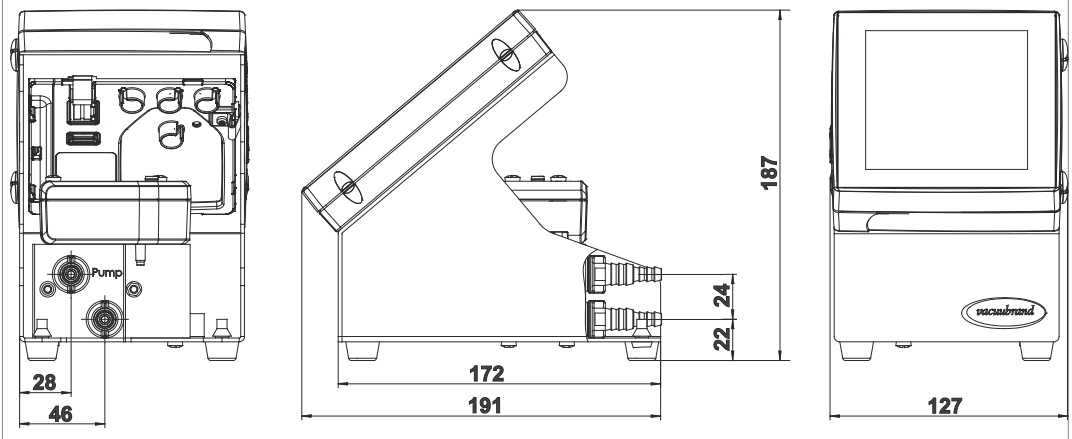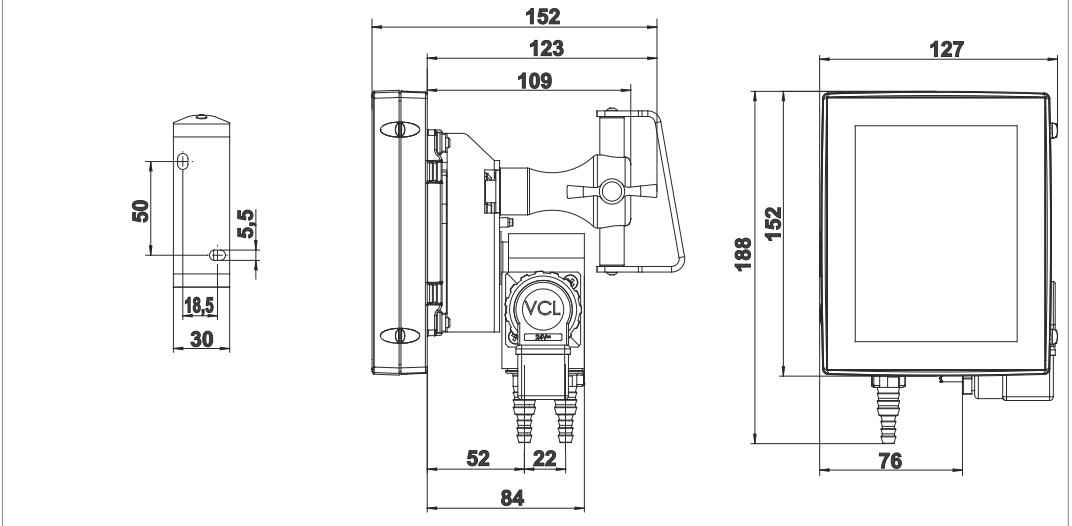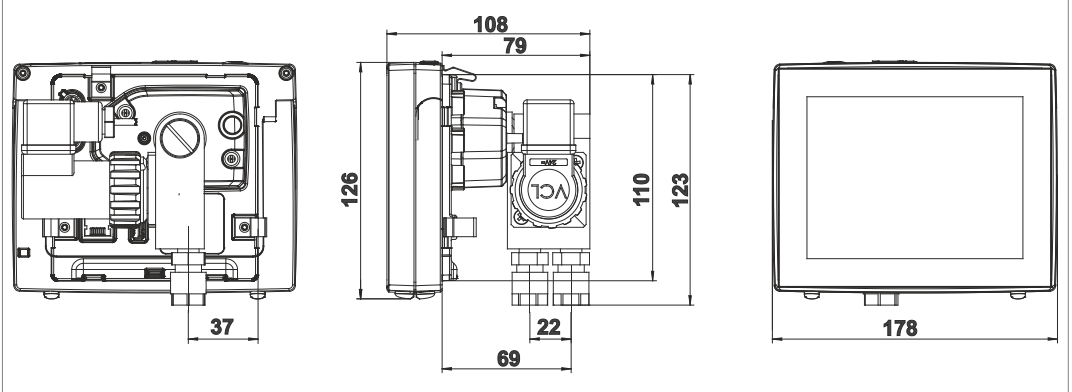**Tischversion – Abmessungen (mm)****Stativversion – Abmessungen (mm)****Einbauversion – Abmessungen (mm)**


## 9.1.2 Typenschild



- ⇒ Notieren Sie im Fehlerfall Typ und Seriennummer vom Typenschild.
- ⇒ Geben Sie bei Kontakt zu unserem Service Typ und Seriennummer vom Typenschild an. So kann Ihnen gezielt Unterstützung und Beratung zu Ihrem Produkt angeboten werden.

### Typenschild VACUU·SELECT, allgemein

Angaben vom  
Typenschild

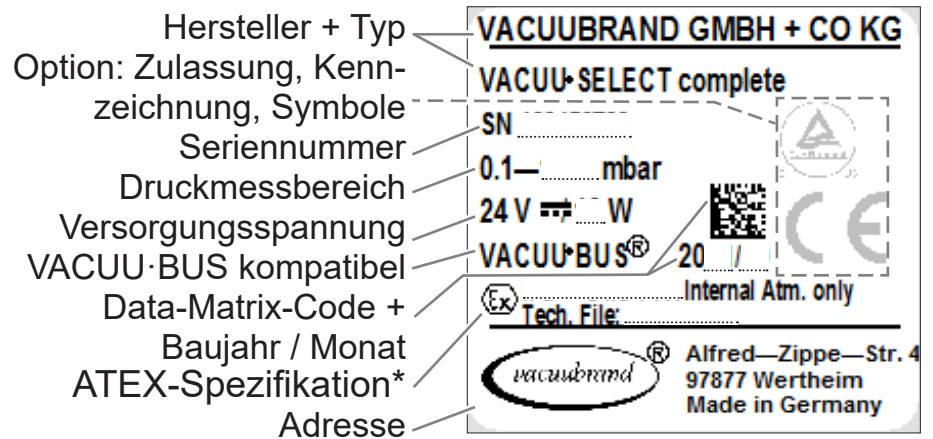

\* Angabe der Dokumentation, Gruppe und Kategorie, Kennzeichnung G (Gas), Zündschutzart, Explosionsgruppe, Temperaturklasse (siehe auch: [Zulassung ATEX-Geräte-kategorie](#)).


### 9.1.3 Medienberührte Werkstoffe

Medienberührte  
Werkstoffe

| Komponente                                   | Medienberührte Werkstoffe                  |
|--|--|
| Sensor                                       | Aluminiumoxidkeramik, ggf. goldbeschichtet |
| Messkammer                                   | PPS  |
| Dichtung Belüftungsventil                    | FFKM                                       |
| Option: Blindstopfen ohne Belüftungsventil   | Epoxidharz                                 |
| Dichtungen                                   | chemisch beständiges Fluorelastomer, PTFE  |
| Anschlüsse zu Pumpe / Anwendung              | PVDF                                       |
| Ventilblock                                  | PP   |
| O-Ringe                                      | FKM  |
| Ventilkörper                                 | PVDF                                       |
| Rückschlagventil                             | FFKM                                       |
| Einschraubverschraubung, Membrane, Dichtring | PTFE                                       |
| Schlauchwelle                                | PP   |

### 9.1.4 Vakuumdaten

Vakuumdaten

| Werte  |  | (US)           |
|--|--|----------------|
| Messbereich, absolut   | 1080–0,1 mbar  | 810–0.1 Torr   |
| Messgenauigkeit  | ±1 mbar/hPa/Torr, ±1 digit, mit Vakuum-Controller VACUU·SELECT (nach Abgleich, konstante Temperatur) |                |
| Messprinzip  | Keramik-Membran (Aluminiumoxid, goldbeschichtet), kapazitiv, gasartunab., Absolutdruck               |                |
| Temperaturgang   | < ±0,15 mbar (hPa)/K   | < ±0.11 Torr/K |
| maximal zulässiger Druck, abs.   | 1,5 bar  | 1125 Torr      |
| maximal zulässige Medientemperatur (Gas) nicht explosive Atmosphären:  |  |                |
| kurzzeitig (< 5 Min)   | 80 °C  | 176 °F         |
| Dauerbetrieb   | 45 °C  | 113 °F         |
| ATEX-Zulassung bei ATEX-Kennzeichnung auf dem Typenschild  | II 3/- G Ex h IIC T4 Gc X<br>Internal Atm. only  |                |
| Innenraum (geförderte Gase)  | Tech.File: VAC-EX02  |                |
| maximal zulässige Medientemperatur (Gas)  -Atmosphären: |  |                |
| kurzzeitig   | 40 °C  | 104 °F         |
| Dauerbetrieb   | 40 °C  | 104 °F         |



## 9.2 Bestelldaten

### Bestelldaten

| <b>Vakuum-Controller</b>                             |  | Bestell-Nr. |
|--|--|-------------|
| <b>VACUU-SELECT Tischversion</b>                     |  | 20700070    |
| <b>VACUU-SELECT Stativversion</b>                    |  | 20700080    |
| <b>VACUU-SELECT Einbauversion</b>                    |  | 20700060    |
| <b>Zubehör</b>                                       |  | Bestell-Nr. |
| Vakuumschlauch DN 6 mm (l = 1000 mm)                 |  | 20686000    |
| PTFE-Schlauch KF16                                   |  | 20686031    |
| Silikonkautschukschlauch 3/6 (Belüften mit Inertgas) |  | 20636156    |
| Wanddurchführung VACUU-BUS                           |  | 20636153    |
| DAkKS Erstkalibrierung                               |  | 20900214    |
| DAkKS Nachkalibrierung                               |  | 20900215    |
| Adapterkabel USB auf RS-232, 1 m                     |  | 20637838    |
| Nullmodemkabel RS-232C, 2x Buchse Sub-D 9pol., 1,5 m |  | 20637837    |

### Übersicht möglicher VACUU-BUS- Komponenten (Option)

| <b>VACUU-BUS-Peripherie</b>          |   | Bestell-Nr. |
|--------------------------------------|---|-------------|
| Vakuumsensor                         | VACUU-SELECT Sensor                       | 20700020    |
|                                      | VACUU-SELECT Sensor ohne Belüftungsventil | 20700021    |
|                                      | VSK 3000                                  | 20636657    |
|                                      | VSP 3000                                  | 20640530    |
|                                      |   |             |
| Vakuum-Messgerät                     | VACUU-VIEW                                | 20683220    |
|                                      | VACUU-VIEW extended                       | 20683210    |
| Vakuumventil<br>(Saugleitungsventil) | VV-B 6                                    | 20674290    |
|                                      | VV-B 6C                                   | 20674291    |
|                                      | VV-B 15C, KF 16                           | 20674210    |
|                                      | VV-B 15C, KF 25                           | 20674215    |
| Kühlwasserventil                     | VKW-B                                     | 20674220    |
| Belüftungsventil                     | VBM-B                                     | 20674217    |
|                                      | VACUU-SELECT Sensor                       | 20700020    |
| Modul zum Schalten einer Vakuumpumpe | VMS-B                                     | 20676030    |
| ...-I/O-Modul                        | Digital ...                               | 20636228    |
|                                      | IN: 5-75 VDC / OUT: 60 VDC (2,5 A)        |             |
|                                      | IN: 5-50 VAC / OUT: 40 VAC (2,5 A)        |             |
|                                      | Analog ...                                | 20636229    |
|                                      | IN: 0-10 V / OUT: 0-10 V                  |             |
|                                      | Analog ...                                | 20635425    |
|                                      | IN: 4-20 mA / OUT: 0-10 V                 |             |
| Emissionskondensator                 | Peltronic                                 | 20699905    |
| Füllstandssensor                     | für 500 ml Rundkolben                     | 20699908    |



Bestelldaten  
Ersatzteile

| Ersatzteile                               |                 | Bestell-Nr. |
|---|-----------------|-------------|
| Schlauchwelle DN 6/10                     |                 | 20636635    |
| Flachkopfschraube M6 x 10                 |                 | 23110179    |
| Rückschlagventil (Einlass-/Auslassventil) |                 | 20638836    |
| Magnetventil VCL-C3, 24 VDC               |                 | 20636667    |
| Ventilkabel-B VV, komplett                |                 | 20612753    |
| Gerade Einschraubverschraubung VCL-G      |                 | 20637221    |
| Verlängerungskabel                        | VACUU·BUS 0,5 m | 20612875    |
|   | VACUU·BUS 2 m   | 20612552    |
|   | VACUU·BUS 10 m  | 22618493    |
| Y-Adapter VACUU·BUS                       |                 | 20636656    |
| Steckernetzteil 30W 24V; mit Netzadaptern |                 | 20612090    |
| Steckernetzteil 25W 24V; mit Netzadaptern |                 | 20612089    |
| Sicherheitshinweise für Vakuumgeräte      |                 | 20999254    |
| Betriebsanleitung                         |                 | 20901170    |

### Bezugsquellen

Internationale  
Vertretung und  
Fachhandel

Beziehen Sie Originalzubehör und Originalersatzteile über eine Niederlassung der **VACUUBRAND GMBH + CO KG** oder von Ihrem Fachhandel.



- ⇒ Informationen zur kompletten Produktpalette erhalten Sie im aktuellen [Produktkatalog](#).
- ⇒ Für Bestellungen, Fragen zur Vakuumregelung und optimalem Zubehör steht Ihnen Ihr Fachhandel oder Ihr [Vertriebsbüro](#) der **VACUUBRAND GMBH + CO KG** zur Verfügung.

## 9.3 Lizenzinformationen und Datenschutz

- ⇒ Dieses Produkt enthält Open Source Software. Die Lizenzinformationen dazu finden Sie im VACUU·SELECT im Servicemenü → **Über das Gerät** unter der Rubrik **Rechtliche Hinweise**
- ⇒ Der Controller zeichnet zu Diagnosezwecken Daten auf. Die Aufzeichnung von **Diagnosedaten** kann minimiert werden. Mit Rücksetzen auf Werkseinstellung werden diese Daten gelöscht.

Anzeige *Rechtliche Hinweise* oder Anpassung *Diagnosedaten*  
→ siehe Kapitel: **7.3 Service auf Seite 78**

## 9.4 Service

Serviceangebot und  
Serviceleistungen

Nutzen Sie die umfangreichen Serviceleistungen der  
**VACUUBRAND GMBH + CO KG.**



### Serviceleistungen im Detail

- Produktberatung und Lösungen für die Praxis,
- schnelle Zulieferung von Ersatzteilen und Zubehör,
- fachgerechte Wartung,
- umgehende Reparaturabwicklung,
- Vor-Ort-Service (auf Anfrage),
- Kalibrierung (DAkkS akkreditiert),
- Mit Unbedenklichkeitsbescheinigung: Rückgabe, Entsorgung.

⇒ Weitere Informationen können Sie auch auf unserer Homepage abrufen: [www.vacuubrand.com](http://www.vacuubrand.com).

### Ablauf Serviceabwicklung

Service-  
anforderungen  
erfüllen

1. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder unseren Service.
2. Lassen Sie sich für Ihren Auftrag eine RMA-Nr. geben.
3. Reinigen Sie das Produkt gründlich oder dekontaminieren Sie es fachgerecht, falls erforderlich.
4. Laden Sie sich die Unbedenklichkeitsbescheinigung herunter.
5. Füllen Sie das Formblatt Unbedenklichkeitsbescheinigung vollständig aus.

Rücksendung

6. Schicken Sie uns Ihr Produkt zusammen mit Ihrer/Ihrem:
  - RMA-Nr. und Fehlerbeschreibung,
  - Reparatur- oder Serviceauftrag,
  - Unbedenklichkeitsbescheinigung,
  - alles außen auf der Verpackung befestigt.



⇒ Verringern Sie Ausfallzeiten, beschleunigen Sie die Abwicklung. Halten Sie bei Servicekontakt die benötigten Daten und Unterlagen bereit.

- ▶ Ihr Auftrag lässt sich schnell und einfach zuordnen.
- ▶ Gefährdungen können ausgeschlossen werden.
- ▶ Eine kurze Beschreibung und/oder Fotos helfen bei der Fehlereingrenzung.

## 9.5 Stichwortverzeichnis

### Stichwortverzeichnis

|   |        |  |
|---|--------|--|
| <b>A</b>  |        |  |
| Abkürzungen .....                                   | 12     |  |
| Administration .....                                | 71     |  |
| Anleitungsmodule .....                              | 8      |  |
| Anschluss Ethernet .....                            | 30     |  |
| Anschlussmöglichkeiten .....                        | 39     |  |
| Anschluss RS-232 .....                              | 30     |  |
| Ansicht Hochformat .....                            | 44     |  |
| Ansicht Querformat .....                            | 44     |  |
| Anwendung anlegen .....                             | 66     |  |
| Anwendung auswählen .....                           | 52     |  |
| Anwendung bearbeiten .....                          | 67     |  |
| Anwendungseditor aufrufen .....                     | 62     |  |
| Anwendung starten .....                             | 52     |  |
| Anwendung stoppen .....                             | 56     |  |
| Anzeigeelemente .....                               | 46     |  |
| Anzeige- und Bedienelemente .....                   | 45     |  |
| ATEX-Gerätekategorie .....                          | 19     |  |
| ATEX-GeräteKennzeichnung .....                      | 19     |  |
| ATEX-Spezifikation (Typenschild) ....               | 89     |  |
| ATEX-   |        |  |
| Zulassung .....                                     | 19     |  |
| Aufbau der Betriebsanleitung .....                  | 8      |  |
| Ausschnittsmaße für Einbau .....                    | 35     |  |
| <b>B</b>  |        |  |
| Bedienelemente – Prozessschritte ...                | 49     |  |
| Bedienelemente und Symbole .....                    | 48     |  |
| Bedienelemente zur Steuerung .....                  | 51     |  |
| Bedienschritte .....                                | 11     |  |
| Bedienschritte als Grafik .....                     | 11     |  |
| Bedienteil .....                                    | 13     |  |
| Begriffserklärung .....                             | 13     |  |
| Belüftungsanschluss (Option) .....                  | 41     |  |
| Belüftungsventil anschließen .....                  | 41     |  |
| Benutzerhinweise .....                              | 7      |  |
| Beschreibung VACUU·SELECT® Sen-<br>sor .....        | 26     |  |
| Beschreibung Vakuumregler .....                     | 21     |  |
| Bestelldaten .....                                  | 91     |  |
| Bezugsquellen .....                                 | 92     |  |
| Bildschirmausrichtungen .....                       | 44     |  |
| <b>C</b>  |        |  |
| Controller-Versionen .....                          | 21     |  |
| Copyright © .....                                   | 7      |  |
| CU-Zertifikat .....                                 | 97     |  |
| <b>D</b>  |        |  |
| Darstellung Bedienschritte .....                    | 11     |  |
| Darstellungskonventionen .....                      | 9      |  |
| Datenlogger .....                                   | 77     |  |
| Datenspeicherung .....                              | 43     |  |
| Dauerhaft belüften .....                            | 55     |  |
| Diagnosedaten .....                                 | 79     |  |
| Diagnosedaten abschalten (Daten-<br>schutz) .....   | 92     |  |
| Diagnosedaten löschen .....                         | 92     |  |
| Draufsicht .....                                    | 25     |  |
| Drehzahl anpassen .....                             | 56, 57 |  |
| Druckanzeige Standard .....                         | 46     |  |
| <b>E</b>  |        |  |
| EG-Konformitätserklärung .....                      | 96     |  |
| Einbaugerät .....                                   | 35     |  |
| Einbauversion .....                                 | 21, 35 |  |
| Einsatzgrenzen .....                                | 31     |  |
| Elektrischer Anschluss .....                        | 37     |  |
| Entsorgung .....                                    | 20     |  |
| Ergänzende Symbole .....                            | 10     |  |
| Erklärung Sicherheitssymbole .....                  | 10     |  |
| Erläuterung Einsatzbedingungen X..                  | 20     |  |
| Ersatzteile .....                                   | 92     |  |
| Ethernet .....                                      | 24     |  |
| Explosionsfähige Gemische verhindern                | 19     |  |
| <b>F</b>  |        |  |
| Fachhandel .....                                    | 92     |  |
| Farbcodierung Statusleiste .....                    | 46     |  |
| Favoriten anlegen .....                             | 61     |  |
| Favoriten entfernen .....                           | 61     |  |
| Formblatt Unbedenklichkeitsbescheini-<br>gung ..... | 93     |  |
| Frontansicht .....                                  | 23     |  |
| Funktionserweiterungen .....                        | 76     |  |
| <b>G</b>  |        |  |
| Gebotszeichen .....                                 | 10     |  |
| Gefahrenzeichen .....                               | 10     |  |
| Gerät einschalten .....                             | 42     |  |
| Gerätesicherung wechseln .....                      | 84, 85 |  |
| Gesten .....  | 43     |  |
| Grafischer Druckverlauf aufrufen .....              | 58     |  |
| Grundeinstellungen .....                            | 69, 70 |  |
| <b>H</b>  |        |  |
| Handlungsanweisung .....                            | 11     |  |
| Handlungsschritt .....                              | 11     |  |
| Hauptbildschirm .....                               | 45     |  |
| Hauptmenü aufrufen .....                            | 59     |  |
| <b>I</b>  |        |  |
| Import/Export .....                                 | 73     |  |
| <b>K</b>  |        |  |
| Kontextmenüs VACUU·BUS. 74, 76, 79                  |        |  |
| Kontextmenü zu Anwendungen .....                    | 60     |  |
| Kurz belüften .....                                 | 55     |  |
| <b>L</b>  |        |  |
| Länderspez. Steckeraufsatz .....                    | 37     |  |
| Landscape .....                                     | 44     |  |
| Lizenzinformationen .....                           | 78, 92 |  |
| Lizenzinformationen aufrufen .....                  | 92     |  |
| Logging ausschalten .....                           | 77     |  |
| <b>M</b>  |        |  |
| Medienberührte Werkstoffe .....                     | 90     |  |
| Messkammer .....                                    | 90     |  |

|  |        |                                      |    |
|--|--------|--------------------------------------|----|
| Mit Inertgas belüften .....            | 41     | Touchscreen-Bedienung.....           | 43 |
| Mit Umgebungsluft belüften.....        | 41     | Typenschild.....                     | 89 |
| Modbus aktivieren/deaktivieren .....   | 72     | Typenschild (Controller).....        | 24 |
| Montage des Wandhalters.....           | 33     | Typenschild (Vakuumsensor) .....     | 26 |
| <b>O</b>                               |        | <b>U</b>                             |    |
| ON/OFF-Taste .....                     | 42     | Unsachgemäße Verwendung .....        | 15 |
| <b>P</b>                               |        | Untermenü Anwendungen aufrufen..     | 60 |
| Parameter anpassen .....               | 57     | <b>V</b>                             |    |
| Parameterliste .....                   | 56     | VACUU·BUS.....                       | 13 |
| Personalqualifikation .....            | 16     | VACUU·BUS-Stecker .....              | 13 |
| Piktogramme .....                      | 10     | VACUU·BUS vereinfacht .....          | 74 |
| Pop-up-Fenster.....                    | 47     | VACUU·BUS-Zubehör .....              | 91 |
| Portrait .....                         | 44     | VACUU·SELECT ensor .....             | 26 |
| Produktbeschreibung.....               | 21     | VACUU·VIEW .....                     | 91 |
| Produktspezifische Begriffe .....      | 13     | VACUU·VIEW extended .....            | 91 |
| Prozessanzeige .....                   | 45     | Vakuumananschluss.....               | 39 |
| Prozessschritt.....                    | 64     | Vakuumananschluss PTFE .....         | 40 |
| Prozessschrittkartusche .....          | 64     | Vakuumananschluss Schlauchwelle..... | 40 |
| Prozessschrittkonfiguration .....      | 64     | Vakuumdaten.....                     | 90 |
| <b>Q</b>                               |        | Ventilblock 90° drehen.....          | 36 |
| Qualitätsanspruch.....                 | 17     | Verbotszeichen .....                 | 10 |
| <b>R</b>                               |        | Vorhersehbare Fehlanwendung .....    | 15 |
| RS-232 aktivieren/deaktivieren.....    | 72     | <b>W</b>                             |    |
| Rücksendung.....                       | 93     | Wareneingang .....                   | 31 |
| <b>S</b>                               |        | <b>Z</b>                             |    |
| Schnittstellen Stativversion.....      | 24     | Zuständigkeitsmatrix.....            | 16 |
| Schutzkleidung .....                   | 17     |                                      |    |
| Seitenansicht.....                     | 23     |                                      |    |
| Service.....                           | 78     |                                      |    |
| Serviceabwicklung.....                 | 93     |                                      |    |
| Serviceleistungen .....                | 93     |                                      |    |
| Sicherheit.....                        | 7      |                                      |    |
| Sicherheitshinweise .....              | 14     |                                      |    |
| Sicherheitshinweise für Vakuumgeräte . | 14     |                                      |    |
| Solldruck anpassen .....               | 49     |                                      |    |
| Spannungsversorgung .....              | 38     |                                      |    |
| Spannungsversorgung Controller.....    | 38     |                                      |    |
| Spannungsversorgung via Steckernetz-   |        |                                      |    |
| teil .....                             | 37     |                                      |    |
| Sprache ändern .....                   | 69     |                                      |    |
| Stativgerät .....                      | 32     |                                      |    |
| Stativhalter 90° drehen .....          | 34     |                                      |    |
| Stativversion .....                    | 21, 32 |                                      |    |
| Statusleiste .....                     | 48     |                                      |    |
| Steckernetzteil .....                  | 37     |                                      |    |
| Störmelde-Pop-up .....                 | 80     |                                      |    |
| Symbole.....                           | 10     |                                      |    |
| Symbole mit Bedienfunktion .....       | 49     |                                      |    |
| <b>T</b>                               |        |                                      |    |
| Technische Daten.....                  | 86, 87 |                                      |    |
| Tischgerät.....                        | 32     |                                      |    |
| Tischversion .....                     | 21, 32 |                                      |    |
| Töne .....                             | 46     |                                      |    |
| Tooltips .....                         | 63     |                                      |    |

## 9.6 EG-Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung

### EG-Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity Déclaration CE de conformité



Hersteller / Manufacturer / Fabricant:

**VACUUBRAND GMBH + CO KG** · Alfred-Zippe-Str. 4 · 97877 Wertheim · Germany

Hiermit erklärt der Hersteller, dass das Gerät konform ist mit den Bestimmungen der Richtlinien:

Hereby the manufacturer declares that the device is in conformity with the directives:

Par la présente, le fabricant déclare, que le dispositif est conforme aux directives:

- 2014/30/EU
- 2014/35/EU
- 2014/34/EU
- 2011/65/EU, 2015/863
- 2009/125/EG, (EU) 2019/2021

Vakuum- Controller/ Vacuum controller / Regulateur de vide:

Typ / Type / Type: **VACUU-SELECT complete**

Artikelnummer / Order number / Numéro d'article: 20700060, 20700070, 20700080, 22615724

Seriennummer / Serial number / Numéro de série: Siehe Typenschild / See rating plate / Voir plaque signalétique

Angewandte harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes harmonisées utilisées:

DIN EN 61326 -1 :2013

DIN EN 61010-1:2020, IEC 61010-1:2010 + COR:2011 + A1:2016, modifiziert / modified / modifié + A1:2016/ COR1:2019

DIN EN 1127-1:2019, DIN EN ISO 80079-36:2016

DIN EN IEC 63000:2019

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen / Person authorised to compile the technical file / Personne autorisée à constituer le dossier technique:

Dr. Constantin Schöler · VACUUBRAND GMBH + CO KG · Germany

Ort, Datum / place, date / lieu, date: Wertheim, 09.01.2023

(Dr. Constantin Schöler)

*Geschäftsführer / Managing Director / Gérant*

ppa.

(Jens Kaibel)

*Technischer Leiter / Technical Director /  
Directeur technique*

**VACUUBRAND GMBH + CO KG**

Alfred-Zippe-Str. 4  
97877 Wertheim

Tel.: +49 9342 808-0

Fax: +49 9342 808-5555



E-Mail: [info@vacuubrand.com](mailto:info@vacuubrand.com)

Web: [www.vacuubrand.com](http://www.vacuubrand.com)

**VACUUBRAND®**

## 9.7 CU-Zertifikat



## CU-Zertifikat

| Certificate   |  |  |
|---|--|---|
| Certificate no.   | CU 72228817 01   |   |
| License Holder:   | Manufacturing Plant:   |   |
| VACUUBRAND GMBH + CO KG   | VACUUBRAND GMBH + CO KG  |   |
| Alfred-Zippe-Str. 4   | Alfred-Zippe-Str. 4  |   |
| 97877 Wertheim  | 97877 Wertheim   |   |
| Deutschland   | Deutschland  |   |
| Test report no.:  | USA- 31880183 003  | Client Reference: Dr. A. Wollschläger   |
| Tested to:  | UL 61010-1:2012 R7.19<br>CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-12 + GI1 + GI2 (R2017) + A1                                   |   |
| Certified Product:  | Measurement and control device for vacuum  | License Fee - Units   |
| Model   | : (1) VACUU VIEW; (2) VACUU VIEW extended;   | 7   |
| Designation   | : (3) VACUU SELECT; (4) VACUU SELECT complete;   |   |
|   | (5) VACUU SELECT Sensor;   |   |
|   | (6) VSP 3000; (7) CVC 3000; (8) VSK 3000;  |   |
|   | (9) VSK PV; (10) DCP 3000  |   |
| Rated Voltage:  | DC 24V; class III (all devices)  |   |
| Rated Power   | : (1+2) 1.3W; (3) 5.0W; (4) 13W; (5) 1.2W;   |   |
|   | (6) 1.6W; (7+10) 3.4W; (8+9) 0.12W   |   |
| Degree of   | : (7+10) IP20/Type 1 (UL50E)   |   |
| Protection  | : (3+4) IP40/Type 1 (UL50E)  |   |
|   | (5) IP41/Type 2 (UL50E)  |   |
|   | (1+2+6+8+9) IP54/Type 5 (UL50E)  |   |
| Appendix:   | 1, 1-13  |   |
| Licensed Test mark:   | Date of Issue<br>(day/mo/yr)<br>09/02/2023   |   |
|  | TUV Rheinland of North America, Inc., 12 Commerce Road, Newtown, CT 06470, Tel (203) 426-0888 Fax (203) 426-4009 |   |







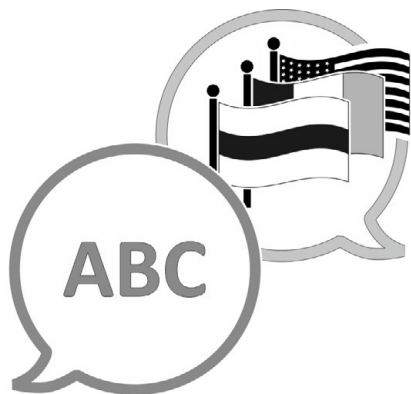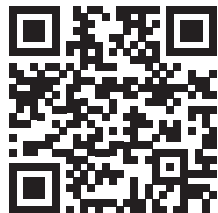

[VACUUBRAND > Support > Manuals](#)

Hersteller:

**VACUUBRAND GMBH + CO KG**  
**Alfred-Zippe-Str. 4**  
**97877 Wertheim**  
**GERMANY**

Tel.:

Zentrale: +49 9342 808-0

Vertrieb: +49 9342 808-5550

Service: +49 9342 808-5660

Fax: +49 9342 808-5555

E-Mail: [info@vacuubrand.com](mailto:info@vacuubrand.com)

Web: [www.vacuubrand.com](http://www.vacuubrand.com)